



Instructions for Use - HAART 201 Instrument Set

Instructions for Use -

HAART 201 Instrument Set2

Инструкции за употреба –

комплект с инструменти HAART 2019

Upute za upotrebu –

Komplet instrumenata HAART 20117

Návod k použití -

Souprava nástrojů HAART 20124

Brugsanvisning -

HAART 201 Instrument Set31

Instructies voor gebruik -

HAART 201-instrumentset38

Käyttöohje -

HAART 201-instrumenttisarja45

Mode d'emploi -

Ensemble d'instruments HAART 20152

Gebrauchsanweisung -

Aortenanoloplastie-Instrumentensatz HAART 201 ..59

Οδηγίες χρήσης -

Σετ οργάνων HAART 20166

Használati utasítás -

HAART 201 műszerkészlet74

Istruzioni per l'uso -

Set di strumenti HAART 20181

Bruksanvisning -

HAART 201-instrumentsett88

Instrukcja użytkowania -

zestaw instrumentów HAART 20195

Instrucțiuni de utilizare -

Setul de instrumente HAART 201102

Návod na použitie –

Súprava nástrojov HAART 201109

Navodila za uporabo –

komplet instrumentov HAART 201116

Instrucciones de uso -

Juego de instrumentos HAART 201123

Bruksanvisning -

HAART 201 instrumentset130



Instructions for Use - HAART 201 Instrument Set

Table of Contents

1. Instrument Labeling Symbols	2
2. Indications	2
3. Description	2
4. Warnings	4
5. Precautions	4
6. How Supplied	4
7. Directions for Use	5
8. Sizer and Gage Sphere Accuracy Statement	5
9. Cleaning and Sterilization Prior to Use	5
Disclaimer of Warranties	7
Patents	8
Figures.....	137

1. Instrument Labeling Symbols



Manufacturer



Nonsterile



Batch code



Catalog number



Authorized European Rep



Product complies with requirements of directive 93/42/EEC for medical devices



Consult Instructions for Use

2. Indications

The HAART 201 Instrument Set is intended to be used as an aid in the implantation of the HAART 200 Aortic Annuloplasty Device.

3. Description

The HAART 201 Instrument Set consists of four (4) Sizers, one (1) Gage Sphere, and two (2) Handles provided in a stainless steel tray (Figure 1 on page “Obrázok 1 Súprava nástrojov HAART 201” on page 137). The Instrument Set is used to select the proper HAART 200 Aortic Annuloplasty Device size for a given patient and to assist

in the assessment of leaflet coaptation after completion of the overall repair of the aortic valve. The HAART 201 Instrument Set is reusable; however, it must be cleaned and sterilized by autoclave (steam) prior to each use. Refer to the sections below for detailed information on accessory use and sterilization.

3.1 Handle

The Handle is machined from ASTM A276 stainless steel, and cleaned and passivated per ASTM specification F86. The Handle may be threaded into the Sizers, Gage Sphere, and Holder to facilitate positioning during the procedure (Figure 2 on page “Obrázek 2 Zařízení k aortální anuloplastice HAART 200 a držák připojené k rukojeti” on page 137). The stainless steel Handle may be bent in the narrowed section to present the Sizers, Gage Sphere, and Device to the surgical site in the desired manner. The Handle is very similar in design and manufacture to handles supplied with replacement heart valve prostheses and is intended to be used in a similar manner.

3.2 Sizers

The Sizers are machined from polyphenylsulfone. Each Sphere has a through hole along its axis (Figure 3 on page “Obrázek 3 Ilustrace měřicí pomůcky” on page 138). The top of the through hole is threaded to receive the instrument Handle.

The Sizers are laser marked with a line at the equator and 15° wide stippled regions, oriented 180° apart, to assist the user with assessment of leaflet free-edge length. The size of the corresponding HAART 200 device is prominently marked on the upper surface of each Sizer.

3.3 Gage Sphere

The Gage Sphere is machined from polyphenylsulfone and has a through hole along its axis. The top of the through hole is threaded to receive the instrument Handle.

After completion of leaflet repair, effective height and leaflet geometric height may be assessed using the Gage Sphere provided in the HAART 201 Instrument Set. The Gage Sphere has two different vertical scales marked on the surface (Figure 4 on page “Obrázek 4 Škála k měření délky cípů (vlevo) a škála k měření efektivní výšky (vpravo)” on page 139). One scale originates at the apex of the Sphere and is intended for estimating the effective height of the valve leaflet. For a successful repair, leaflet effective height should be approximately 8 to 10 mm. The second scale may be used to assess leaflet geometric heights, when desired,

for further evaluation of leaflet size and symmetry after the overall valve repair.

4. Warnings

- Do not use other manufacturer's annuloplasty sizers. Other annuloplasty sizers may not indicate the appropriate HAART 200 Aortic Annuloplasty Device size.
- Correct annuloplasty device sizing is an important element of successful valve repair. Significant undersizing can result in valve stenosis or ring dehiscence. Oversizing can result in valve regurgitation. The size of the HAART 200 Aortic Annuloplasty Device is selected using Sizers consistent with the design intent of the Device. Use only the HAART Sizers included in the HAART 201 Instrument Set to select the proper Device size.
- Use only the HAART Handle to interface with the Device Holder, Sizers and Gage Sphere.
- The Sizers, Gage Sphere, and Handle are provided NONSTERILE and must be cleaned and sterilized prior to each use.
- Only surgeons having received training in HAART device implantation and sizing techniques should use this Device.
- The HAART 201 Instrument Set is not intended for use with devices other than the HAART 200 Aortic Annuloplasty Device.
- Ultrasonic cleaning should not be used on the HAART 201 Sizers or Gage Sphere since it may cause crazing of the polymer material and markings.

5. Precautions

The Sizers and Gage Sphere should be visually inspected for crazing of polymer materials, cracks and signs of structural weakness, or unreadable markings before each use.

The Handle should be inspected for visible cracks or signs of structural weakness before each use and after bending. Replace any instrument that exhibits these faults as they may not function properly and could cause patient injury.

6. How Supplied

The HAART 201 Instrument Set is provided NONSTERILE in a stainless steel tray. The instruments are provided clean, but NONSTERILE.

Upon initial receipt of the Instrument Set, remove all packaging materials and carefully examine all instruments for signs of shipping damage. The instruments must be visually inspected, cleaned, and sterilized before each use.

Discard any instruments that show signs of damage or unreadable markings.

Store the instrument set in a clean environment.

7. Directions for Use

The HAART 201 Instrument Set is intended to be used as an aid in the implantation of the HAART 200 Aortic Annuloplasty Device. See the Directions for Use for the HAART 200 Aortic Annuloplasty Device.

8. Sizer and Gage Sphere Accuracy Statement

Sizers serve as a visual gage for choosing an appropriate Device size based on the leaflet free-edge lengths of the aortic valve. Size diameters are accurate to ± 0.010 inches (0.254 mm) of the specified size.

The Gage Sphere is intended only as a reference and visual aid to assess leaflet effective height and leaflet geometric length following leaflet repair. The scales on the Gage Sphere are accurate to ± 0.008 inches (0.2 mm) between adjacent marks.

9. Cleaning and Sterilization Prior to Use

Warning: The HAART 201 Instrument Set is provided NONSTERILE and must be thoroughly cleaned and sterilized prior to use.

9.1 Cleaning Instructions

The Handle should be removed from the Sizer or the Gage Sphere prior to cleaning.

Note: If transport of the instruments to the processing area is likely to be delayed, place the instruments in a covered container with an appropriate detergent (e.g. Enzol Enzymatic Detergent or equivalent) to delay drying.

Within a maximum of 2 hours after use, remove gross soil using a cold (25° to 30°C) water rinse with running tap water and soak for 1 minute in an enzyme detergent (e.g. Enzol Enzymatic Detergent) prepared with 2 oz. per gallon of water. Immerse instruments in a container of an appropriate cleaner (e.g. Enzol) prepared with 2 ounces to 1 gallon tap water (15° to 30°C) for a minimum of two (2) minutes. Using a bristle brush, clean the threaded area of the sizers and gage spheres for 15 to 20 seconds to ensure removal of any impacted soil.

Rinse in running tap water (20° to 35°C) until all traces of cleaning solution are visually removed. Visually inspect for any remaining soil and repeat the process if necessary. Dry using a soft cloth and transport to the cleaning step.

Clean the instrument in an automated washer using the following parameters:

Automated Cleaning Parameters

Process Step	Time (mm:ss)	Temp (C)	Cleaner
Enzymatic Wash	04:00	Hot tap water	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 mL/liter
Wash	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0.7 mL/liter
Rinse	02:00	70	N/A
Dry	15:00	Low	N/A

Visually inspect each instrument for remaining soil and moisture. If soil remains, repeat the cleaning process. If instruments are wet, use filtered compressed air or a lint free wipe to dry.

Warning: Ultrasonic cleaning should not be used on the Sizers since it may cause crazing of the polymer material and markings.

The user is responsible for the qualification of any deviation from the recommended cleaning method.

9.2 Sterilization Instructions

The Handles should be removed from the Sizer or Gage Sphere prior to cleaning and sterilization.

The four Sizers, the single Gage Sphere, and Handles should be placed in the instrument tray for steam sterilization. The following sterilization cycle is recommended:

Temperature: 132°C (270°F)

Dwell time: 4 minutes

Cycle: Pre-vacuum

Dry time: 20 minutes minimum

The user is responsible for qualification of any deviations from the recommended sterilization method.

Corcym acknowledges that the sterilization cycle described below is routinely used by European hospitals and has been validated for many similar heart valve sizer systems and surgical instruments.

Pre-vacuum: cycle

Temperature: 134°C (274°F)

Dwell time: 3 minutes

Dry time: 20 minutes

The components of the HAART 201 Instrument Set do not pose any significant challenge to sterilization using this widely validated process. The instrument materials can withstand temperatures up to 137°C.

9.3 Re-use

Corcym has performed a minimum of 50 sterilization and use cycles on the HAART 201 Instrument Set without any signs of wear being noted.

Caution: The Sizers, Gage Sphere, and Handle are intended for multiple uses as long as they are inspected before each use for signs of damage. The Sizers and Gage Sphere should be visually inspected for crazing of polymer materials, cracks and signs of structural weakness or unreadable markings before each use. The Handle should be inspected for visible cracks or signs of structural weakness before each use and after bending. Replace any instrument that exhibits these faults, as it may not function properly and could cause patient injury.

Disclaimer of Warranties

Although the HAART 200 Aortic Annuloplasty Device and HAART 201 Instrument Set, hereafter referred to as “product,” have been manufactured under carefully controlled conditions, Corcym has no control over the conditions under which this product is used. Corcym and its affiliates (collectively, “Corcym”), therefore, disclaims all warranties, both express and implied, with respect to the product, including, but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Corcym shall not be liable to any person or entity for any medical expenses or any direct, incidental, or consequential damages caused by any use, defect, failure, or malfunction of the product, whether a claim for such damages is based upon warranty, contract, tort, or otherwise. No person has any authority to bind Corcym to any representation or warranty with respect to the product.

The exclusions and limitations set out above are not intended to, and should not be construed so as to, contravene mandatory provisions of applicable law. If any part or term of this Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability is held by any court of competent jurisdiction to be illegal, unenforceable, or in conflict with applicable law, the validity of the remaining portion of the Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability shall not be affected, and all rights and obligations shall be construed and enforced as if this Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability did not contain the particular part or term held to be invalid.

Patents

Patents: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835;
US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462;
US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205;
JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Инструкции за употреба – комплект с инструменти HAART 201

Съдържание

1. Символи от етикетите на инструментите	9
2. Индикации	9
3. Описание	9
4. Предупреждения.....	11
5. Предпазни мерки	12
6. Как се доставя.....	12
7. Инструкции за употреба	12
8. Декларация за точност на оразмерителя и измерващата сфера	12
9. Почистване и стерилизация преди употреба	13
Отказ от гаранции	15
Патенти.....	16
Фигури.....	137

1. Символи от етикетите на инструментите



Производител



Нестерилно



Код на партидата



Каталожен номер



Оторизиран европейски представител



Продуктът отговаря на изискванията на Директива
93/42/ЕИО относно медицинските изделия



Направете справка с инструкциите
за употреба

2. Индикации

Комплектът с инструменти HAART 201 е предназначен да се използва като помощно средство при имплантирането на изделие за аортна анулопластика HAART 200.

3. Описание

Комплектът с инструменти HAART 201 се състои от четири (4) оразмерителя, една (1) измерваща сфера

и две (2) дръжки, предоставени в тава от неръждаема стомана (Фигура 1 на стр. “Obrázok 1 Súprava nástrojov HAART 201” on page 137). Комплектът с инструменти се използва за избор на правилния размер на изделието за аортна анулопластика HAART 200 за даден пациент и в помощ на оценката на коаптацията на платната след завършване на цялостна корекция на аортната клапа. Комплектът с инструменти HAART 201 може да се използва многократно. Той обаче трябва да се почиства и стерилизира с автоклав (пара) преди всяка употреба. Вижте разделите по-долу за подробна информация относно използването и стерилизацията на аксесоарите.

3.1 Дръжка

Дръжката е изработена от неръждаема стомана ASTM A276 и е почиствена и пасивирана съгласно спецификация ASTM F86. Дръжката може да бъде нанизана на оразмерителите, измерващата сфера и държача, за да се улесни позиционирането по време на процедурата (Фигура 2 на стр. “Obrázek 2 Zařízení k aortální anuloplastice HAART 200 a držák připojené k rukojeti” on page 137). Дръжката от неръждаема стомана може да бъде огъната в стеснения участък за поставяне на оразмерителите, измерващата сфера и изделието на хирургичното място по желания начин. Дръжката е много подобна по дизайн и производство на дръжките, снабдени със протези за смяна на сърдечна клапа, и е предназначена да се използва по подобен начин.

3.2 Оразмерители

Оразмерителите са изработени от полифенилсулфон. Всяка сфера има отвор по оста си (Фигура 3 на стр. “Obrázek 3 Ilustrace měřicí pomůcky” on page 138). Горната част на отвора е с резба за закачане на дръжката на инструмента.

Оразмерителите са маркирани с лазер с линия в екватора и с гравирани участъци от 15°, ориентирани на 180° един от друг, за да помогнат на потребителя при оценка на дължината на свободния ръб на платното. Размерът на съответното изделие HAART 200 е маркиран ясно върху горната повърхност на всеки оразмерител.

3.3 Измерваща сфера

Измерващата сфера е изработена от полифенилсулфон и има отвор по оста си. Горната част на отвора е с резба за закачане на дръжката на инструмента.

След приключване на корекцията на платната ефективната височина и геометричната височина на платната могат да бъдат оценени с помощта на измерващата сфера, предоставена в комплекта с инструменти HAART 201. Измерващата сфера има две различни вертикални скали, маркирани на повърхността (Фигура 4 на стр. "Obrázek 4 Škála k měření délky cípů (vlevo) a škála k měření efektivní výšky (vpravo)" on page 139). Една скала започва от върха на сферата и е предназначена за оценка на ефективната височина на клапното платно. За успешна корекция ефективната височина на платното трябва да бъде приблизително 8 до 10 mm. Втората скала може да се използва за оценка на геометричните височини на платната, когато е необходимо, за по-нататъшна оценка на размера и симетрията на платната след цялостната корекция на клапата.

4. Предупреждения

- Не използвайте оразмерители за анулопластика на други производители. Други оразмерители за анулопластика може да не показват подходящия размер на изделието за аортна анулопластика HAART 200.
- Правилното оразмеряване на изделието за анулопластика е важен елемент от успешната клапна корекция. Изборът на много по-малък размер може да доведе до стеноза на клапата или дехисценция на пръстена. Изборът на по-голям размер може да доведе до регургитация на клапата. Размерът на изделието за аортна анулопластика HAART 200 се избира с помощта на оразмерители, съобразени с предназначението на дизайна на изделието. Използвайте само оразмерители HAART, включени в комплекта с инструменти HAART 201, за да изберете правилния размер на изделието.
- Използвайте само дръжката HAART, за да работите с държача, оразмерителите и измерващата сфера на изделието.
- Оразмерителите, измерващата сфера и дръжката се предоставят НЕСТЕРИЛНИ и трябва да се почистват и стерилизират преди всяка употреба.
- Изделието трябва да се използва само от хирурзи, преминали обучение по техники за имплантация и оразмеряване на изделието HAART.
- Комплектът с инструменти HAART 201 не е предназначен за употреба с изделия, различни от изделието за аортна анулопластика HAART 200.

- С оразмерителите или измерващата сфера HAART 201 не трябва да се използва ултразвуково почистване, тъй като това може да доведе до повреда на полимерния материал и маркировките.

5. Предпазни мерки

Оразмерителите и измерващата сфера трябва да се проверяват визуално за повреда на полимерните материали, пукнатини, признаци на структурна слабост или нечетливи маркировки преди всяка употреба.

Дръжката трябва да се проверява за видими пукнатини или признаци на структурна слабост преди всяка употреба и след огъване. Сменете всеки инструмент, който има тези неизправности, тъй като той може да не функционира правилно и да причини нараняване на пациента.

6. Как се доставя

Комплектът с инструменти HAART 201 се предлага НЕСТЕРИЛЕН в тава от неръждаема стомана. Инструментите се предоставят чисти, но НЕСТЕРИЛНИ.

След първоначалното получаване на комплекта с инструменти премахнете всички опаковъчни материали и внимателно проверете всички инструменти за признаци на повреда при транспортиране. Инструментите трябва да се проверяват визуално, да се почистват и да се стерилизират преди всяка употреба.

Изхвърлете всички инструменти, които проявяват признаци на повреда или нечетливи маркировки.

Съхранявайте комплекта с инструменти в чиста среда.

7. Инструкции за употреба

Комплектът с инструменти HAART 201 е предназначен да се използва като помощно средство при имплантирането на изделие за аортна анулопластика HAART 200. Вижте инструкциите за употреба на изделието за аортна анулопластика HAART 200.

8. Декларация за точност на оразмерителя и измерващата сфера

Оразмерителите служат като визуален измервателен уред за избор на подходящ размер на изделието

въз основа на дължините на свободните ръбове на платното на аортната клапа. Размерът на диаметрите е с точност до 0,254 mm

($\pm 0,010$ инча) от посочения размер.

Измерващата сфера е предназначена само като справочна и визуална помощ за оценка на ефективната височина и геометричната дължина на платното след корекция на платното. Скалите на измерващата сфера са с точност до 0,2 mm ($\pm 0,008$ инча) между съседните обозначения.

9. Почистване и стерилизация преди употреба

Предупреждение: Комплектът с инструменти HAART 201 се предоставя НЕСТЕРИЛЕН и трябва да бъде щателно почистен и стерилизиран преди употреба.

9.1 Инструкции за почистване

Дръжката трябва да се отстрани от оразмерителя или измерващата сфера преди почистване.

Забележка: Ако е вероятно транспортирането на инструментите до зоната за обработка да се забави, поставете инструментите в покрит контейнер с подходящ препарат (напр. Enzol Enzymatic Detergent или еквивалент), за да забавите изсушаването.

В рамките на максимум 2 часа след употреба отстранете грубото замърсяване, като използвате студена вода (25° до 30°C), изплакнете с течаща чешмяна вода и накиснете за 1 минута в ензимен препарат (напр. Enzol Enzymatic Detergent), приготвен с 2 oz. (60 ml) на галон (3785 ml) вода. Потопете инструментите в контейнер с подходящ почистващ препарат (напр. Enzol), приготвен с 2 унции (60 ml) на 1 галон (3785 ml) чешмяна вода (15° до 30°C) за минимум две (2) минути. Като използвате четка, почистете резбованата зона на оразмерителите и измерващите сфери за 15 до 20 секунди, за да осигурите отстраняване на всички полепнали замърсявания.

Изплакнете с течаща чешмяна вода (20° до 35°C), докато визуално се отстранят всички следи от почистващ разтвор. Визуално проверете за остатъци от замърсяване и повторете процеса, ако е необходимо. Подсушете с помощта на мека кърпа и транспортирайте до мястото за почистване.

Почистете инструмента в автоматична миялна машина, като използвате следните параметри:

Параметри за автоматизирано почистване

Стъпка на процеса	Време (мм:сс)	Темп. (C)	Почистващ препарат
Ензимно почистване	04:00	Гореща чешмяна вода	Steris Prolystica 2X концентрат Предварително на кисване в ензимен разтвор и почистващ препарат 3 mL/литър
Измиване	02:00	60	Steris Prolystica Ултраконцентрат Неутрален детергент 0,7 mL/литър
Изплакване	02:00	70	Не е приложимо
Изсушаване	15:00	Ниска	Не е приложимо

Проверете визуално всеки инструмент за оставащо замърсяване и влага. Ако остане замърсяване, повторете процеса на почистване. Ако инструментите са мокри, използвайте филтриран сгъстен въздух или кърпа без власинки за изсушаване.

Предупреждение: С оразмерителите не трябва да се използва ултразвуково почистване, тъй като това може да доведе до повреда на полимерния материал и маркировките.

Потребителят е отговорен за квалификацията на всяко отклонение от препоръчания метод на почистване.

9.2 Инструкции за стерилизация

Дръжките трябва да се отстранят от оразмерителя или измерващата сфера преди почистване и стерилизиране.

Четирите оразмерители, единичната измерваща сфера и дръжките трябва да бъдат поставени в тавата за инструменти за стерилизация с пара. Препоръчва се следният цикъл на стерилизация:

- Температура: 132°C (270°F)
- Време на престой: 4 минути
- Цикъл: Предварителен вакуум
- Време на сушене: 20 минути минимум

Потребителят е отговорен за квалификацията на всяко отклонение от препоръчания метод на стерилизация.

Corcym приема, че описаният по-долу цикъл на стерилизация се използва рутинно от европейските болници и е валидиран за много подобни системи за оразмеряване на сърдечни клапи и хирургически инструменти.

Предварителен вакуум: цикъл

Температура: 134°C (274°F)

Време на престой: 3 минути

Време на сушене: 20 минути

Компонентите на комплекта с инструменти HAART 201 не представляват трудност при стерилизацията, използвайки този широко утвърден процес. Материалите на инструмента могат да издържат на температури до 137°C.

9. 3 Повторна употреба

Corcym е извършила минимум 50 цикъла на стерилизация и употреба на комплекта с инструменти HAART 201, без да се забелязват признаци на износване.

Внимание: Оразмерителите, измерващата сфера и дръжката са предназначени за многократна употреба, при условие че преди всяка употреба се проверяват за признаци на повреда. Оразмерителите и измерващата сфера трябва да се проверяват визуално за повреда на полимерните материали, пукнатини, признаци на структурна слабост или нечетливи маркировки преди всяка употреба. Дръжката трябва да се проверява за видими пукнатини или признаци на структурна слабост преди всяка употреба и след огъване. Сменете всеки инструмент, който има тези неизправности, тъй като той може да не функционира правилно и да причини нараняване на пациента.

Отказ от гаранции

Въпреки че изделието за аортна анулопластика HAART 200 и комплектът с инструменти HAART 201, наричани по-долу „продукт“, са произведени при внимателно контролирани условия, Corcym няма контрол върху условията, при които този продукт се използва. Следователно Corcym и нейните филиали (наричани заедно „Corcym“) отхвърля всички гаранции, както изрични, така и подразбиращи се, по отношение на продукта, включително, но не само, всяка подразбираща се гаранция за продаваемост

или годност за определена цел. Corsum не носи отговорност пред физическо или юридическо лице за каквито и да е медицински разходи или каквито и да било преки, случайни или последващи щети, причинени от каквато и да е употреба, дефект, повреда или неизправност на продукта, независимо дали искът за такива щети се основава на гаранция, договор, деликт или по друг начин. Никое лице няма право да обвързва Corsum с каквото и да е представяне или гаранция по отношение на продукта.

Изложените по-горе изключения и ограничения не са предназначени и не трябва да се тълкуват така, че да противоречат на задължителните разпоредби на приложимото право. Ако някоя част от или условие на настоящите „Отказ от гаранции“ и „Ограничаване на отговорността“ се считат от който и да е съд с компетентна юрисдикция за незаконни, неприложими или в противоречие с приложимото законодателство, валидността на останалата част от „Отказ от гаранции“ и „Ограничаване на отговорността“ няма да бъде засегната и всички права и задължения ще се тълкуват и прилагат така, сякаш тези „Отказ от гаранции“ и „Ограничаване на отговорността“ не съдържат конкретната част или условие, считани за невалидни.

Патенти

Патенти: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Upute za upotrebu – Komplet instrumenata HAART 201

Sadržaj

1. Simboli na oznakama instrumenata	17
2. Indikacije	17
3. Opis	17
4. Upozorenja	19
5. Mjere opreza	19
6. Način isporuke	20
7. Upute za upotrebu	20
8. Izjava o točnosti komponenti za određivanje veličine i mjerne kugle	20
9. Čišćenje i sterilizacija prije upotrebe	20
Izjava o odricanju jamstava	22
Patenti	23
Slike	137

1. Simboli na oznakama instrumenata



Proizvođač



Nesterilno



Šifra serije



Kataloški broj



Ovlašteni predstavnik u Europskoj
zajednici / Europskoj uniji



Proizvod je u skladu sa zahtjevima Direktive
93/42/EEZ o medicinskim proizvodima



Pročitati upute za upotrebu

2. Indikacije

Komplet instrumenata HAART 201 namijenjen je kao pomoć pri ugradnji proizvoda HAART 200 za aortnu anuloplastiku.

3. Opis

Komplet instrumenata HAART 201 sastoji se od četiriju (4) komponenti za određivanje veličine, jedne (1) mjerne kugle i dviju (2) drški koji se isporučuju u plitici od nehrđajućeg čelika (Slika 1 na 137. stranici). Komplet instrumenata upotrebljava se za odabir ispravne veličine proizvoda HAART 200 za aortnu anuloplastiku za

određenog bolesnika i za pomoć pri procjeni koaptacije listića nakon dovršetka cjelokupnog popravka aortnog zaliska. Komplet instrumenata HAART 201 služi za višekratnu upotrebu; međutim, mora se očistiti i sterilizirati u autoklavu (sterilizacija parom) prije svake upotrebe. Pogledajte odjeljke u nastavku za detaljne informacije o upotrebi i sterilizaciji pribora.

3.1. Drška

Drška je proizvedena od nehrđajućeg čelika tipa ASTM A276 te je očišćena i pasivizirana u skladu sa specifikacijom F86 Američkog društva za ispitivanje i materijale (ASTM). Drška se može umetnuti u komponente za određivanje veličine, mjernu kuglu i držač radi lakšeg postavljanja tijekom zahvata (Slika 2 na 137. stranici). Drška od nehrđajućeg čelika može se saviti na suženom dijelu radi dovođenja komponenti za određivanje veličine, mjerne kugle i proizvoda do kirurškog mjesta na željeni način. Drška je po dizajnu i proizvodnji vrlo slična drškama koje se isporučuju sa zamjenskim protezama srčanih zalistaka i namijenjena je za upotrebu na sličan način.

3.2. Komponente za određivanje veličine

Komponente za određivanje veličine proizvedene su od polifenilsulfona. Svaka kugla ima rupu duž svoje osi (Slika 3 na 138. stranici). Vrh rupe sadrži navoje za umetanje drške instrumenta.

Komponente za određivanje veličine laserski su označene linijom na sredini i točkastim dijelovima širine 15°, usmjerenima 180° jedan od drugoga, da bi se korisniku pomoglo pri procjeni duljine slobodnog ruba listića. Veličina odgovarajućeg proizvoda HAART 200 jasno je označena na gornjoj površini svake komponente za određivanje veličine.

3.3. Mjerna kugla

Mjerna kugla proizvedena je od polifenilsulfona i ima rupu duž svoje osi. Vrh rupe sadrži navoje za umetanje drške instrumenta.

Nakon dovršetka popravka listića, efektivna visina i geometrijska visina listića mogu se procijeniti s pomoću mjerne kugle koja je isporučena u kompletu instrumenata HAART 201. Mjerna kugla ima dvije različite okomite skale označene na površini (Slika 4 na 139. stranici). Jedna skala počinje na vrhu kugle i namijenjena je za procjenu efektivne visine listića zaliska. Za uspješan popravak efektivna visina listića trebala bi iznositi otprilike 8 – 10 mm. Druga skala može se upotrebljavati za procjenu geometrijskih visina listića kada je to potrebno

radi dodatne procjene veličine i simetrije listića nakon cjelokupnog popravka zaliska.

4. Upozorenja

- Nemojte upotrebljavati komponente za određivanje veličine drugih proizvođača prilikom zahvata anuloplastike. Upotrebom drugih komponenti za određivanje veličine prilikom zahvata anuloplastike možda neće biti moguće odrediti ispravnu veličinu proizvoda HAART 200 za aortnu anuloplastiku.
- Ispravno određivanje veličine proizvoda za anuloplastiku važan je dio uspješnog popravka zaliska. Značajno manja veličina može dovesti do stenoze zaliska ili dehiscencije prstena. Prekomjerna veličina može dovesti do regurgitacije zaliska. Veličina proizvoda HAART 200 za aortnu anuloplastiku odabire se s pomoću komponenti za određivanje veličine u skladu s konstrukcijskom namjenom proizvoda. Za odabir ispravne veličine proizvoda upotrebljavajte samo komponente za određivanje veličine HAART koje su isporučene u kompletu instrumenata HAART 201.
- Upotrebljavajte samo dršku HAART za spajanje s držačem proizvoda, komponentama za određivanje veličine i mjernom kuglom.
- Komponente za određivanje veličine, mjerna kugla i drška isporučuju se NESTERILNI te se moraju očistiti i sterilizirati prije svake upotrebe.
- Samo kirurzi koji su prošli obuku o ugradnji proizvoda HAART i tehnikama određivanja veličine smiju upotrebljavati ovaj proizvod.
- Komplet instrumenata HAART 201 nije namijenjen za upotrebu s proizvodima koji nisu proizvod HAART 200 za aortnu anuloplastiku.
- Ultrazvučno čišćenje ne smije se provoditi na komponentama za određivanje veličine i mjernoj kugli iz kompleta HAART 201 jer može doći do oštećenja polimernog materijala i oznaka.

5. Mjere opreza

Prije svake upotrebe potrebno je vizualno pregledati komponente za određivanje veličine i mjernu kuglu radi uočavanja znakova oštećenja polimernih materijala, pukotina i znakova strukturnog oštećenja ili nečitljivih oznaka.

Prije svake upotrebe i nakon savijanja dršku je potrebno pregledati radi uočavanja vidljivih pukotina ili znakova strukturnog oštećenja. Zamijenite bilo koji instrument na kojem su prisutna ta oštećenja jer možda neće ispravno funkcionirati i mogao bi uzrokovati ozljedu bolesnika.

6. Način isporuke

Komplet instrumenata HAART 201 isporučuje se NESTERILAN u plitici od nehrđajućeg čelika. Instrumenti se isporučuju čisti, ali NESTERILNI.

Nakon prvog primitka kompleta instrumenata uklonite sve materijale pakiranja i pažljivo pregledajte sve instrumente radi uočavanja znakova oštećenja nastalih prilikom isporuke. Instrumenti se moraju vizualno pregledati, očistiti i sterilizirati prije svake upotrebe.

Odložite u otpad sve instrumente na kojima su prisutni znakovi oštećenja ili koji sadrže nečitljive oznake.

Čuvajte komplet instrumenata na čistom mjestu.

7. Upute za upotrebu

Komplet instrumenata HAART 201 namijenjen je kao pomoć pri ugradnji proizvoda HAART 200 za aortnu anuloplastiku. Pogledajte Upute za upotrebu proizvoda HAART 200 za aortnu anuloplastiku.

8. Izjava o točnosti komponenti za određivanje veličine i mjerne kugle

Komponente za određivanje veličine služe za vizualizaciju i odabir ispravne veličine proizvoda na temelju duljina slobodnih rubova listića aortnog zaliska. Promjeri su točni do $\pm 0,254$ mm (0,010 inča) navedene veličine.

Mjerna kugla namijenjena je samo kao smjernica za vizualnu pomoć pri procjeni efektivne visine listića i geometrijske duljine listića nakon popravka listića. Skale na mjernoj kugli točne su do $\pm 0,2$ mm (0,008 inča) između susjednih oznaka.

9. Čišćenje i sterilizacija prije upotrebe

Upozorenje: komplet instrumenata HAART 201 isporučuje se NESTERILAN i mora se temeljito očistiti i sterilizirati prije upotrebe.

9.1. Upute za čišćenje

Dršku je potrebno izvaditi iz komponente za određivanje veličine ili mjerne kugle prije čišćenja.

Napomena: ako će se prijenos instrumenata do mjesta obrade vjerojatno odgoditi, stavite instrumente u spremnik s poklopcem u kojem se nalazi odgovarajući deterdžent (npr. enzimski deterdžent Enzol ili ekvivalentan deterdžent) radi odgode sušenja.

Unutar najviše 2 sata nakon upotrebe uklonite prljavštinu tako da isperete instrumente pod hladnom tekućom vodom iz slavine (od 25 °C do 30 °C) i namačite ih 1 minutu u enzimskom deterdžentu (npr. enzimski deterdžent Enzol) koji ste pripremili tako da ste dodali 15 g proizvoda u 1 litru

vode. Uronite instrumente u spremnik s odgovarajućim sredstvom za čišćenje (npr. Enzol) koje ste pripremili tako da ste dodali 15 g proizvoda u 1 litru vode iz slavine (od 15 °C do 30 °C) i namačite ih najmanje dvije (2) minute. Upotrijebite četku s čekinjama i čistite navoje komponenti za određivanje veličine i mjerne kugle 15 – 20 sekundi da biste uklonili svu prljavštinu.

Isperte instrumente pod tekućom vodom iz slavine (od 20 °C do 35 °C) dok vidljivo ne uklonite sve tragove otopine za čišćenje. Vizualno pregledajte instrumente radi uočavanja bilo kakve preostale prljavštine i ponovite postupak po potrebi. Osušite instrumente suhom krpom i pređite na korak čišćenja.

Očistite instrumente u automatiziranom uređaju za pranje tako da upotrijebite sljedeće parametre:

Parametri za automatizirano čišćenje

Korak obrade	Vrijeme (mm:ss)	Temperatura (C)	Sredstvo za čišćenje
Enzimsko pranje	04:00	Vruća voda iz slavine	2X enzimski koncentrat Steris Prolystica za namakanje i čišćenje 3 ml po litri
Pranje	02:00	60	Ultrakoncentrirani neutralni deterdžent Steris Prolystica 0,7 ml po litri
Ispiranje	02:00	70	N/P
Sušenje	15:00	Niska	N/P

Vizualno pregledajte svaki instrument radi uočavanja preostale prljavštine i vlage. U slučaju ostataka prljavštine ponovite postupak čišćenja. Ako su instrumenti vlažni, za sušenje upotrijebite filtrirani komprimirani zrak ili krpu koja ne ostavlja vlakna.

Upozorenje: ultrazvučno čišćenje ne smije se provoditi na komponentama za određivanje veličine jer može doći do oštećenja polimernog materijala i oznaka.

Korisnik je odgovoran za kvalifikaciju bilo kakvog odstupanja od preporučene metode čišćenja.

9.2. Upute za sterilizaciju

Drške je potrebno izvaditi iz komponente za određivanje veličine ili mjerne kugle prije čišćenja i sterilizacije.

Četiri komponente za određivanje veličine, mjernu kuglu i drške potrebno je staviti u pliticu za instrumente radi sterilizacije parom. Preporučuje se sljedeći ciklus sterilizacije:

Temperatura: 132 °C (270 °F)

Vrijeme zadržavanja: 4 minute

Ciklus: predvakuum

Vrijeme sušenja: najmanje 20 minuta

Korisnik je odgovoran za kvalifikaciju bilo kakvih odstupanja od preporučene metode sterilizacije.

Društvo Corcym potvrđuje da se ciklus sterilizacije opisan u nastavku rutinski provodi u bolnicama u Europi i da je potvrđen za mnoge slične sustave komponenti za određivanje veličine srčanih zalistaka i za kirurške instrumente.

Predvakuum: ciklus

Temperatura: 134 °C (274 °F)

Vrijeme zadržavanja: 3 minute

Vrijeme sušenja: 20 minuta

Komponente iz kompleta instrumenata HAART 201 ne predstavljaju nikakav značajan izazov u pogledu sterilizacije kada se provodi ovaj naširoko valjani postupak. Materijali instrumenata otporni su na temperature do 137 °C.

9.3. Ponovna upotreba

Društvo Corcym provelo je najmanje 50 ciklusa sterilizacije i upotrebe kompleta instrumenata HAART 201 te nisu uočeni nikakvi znakovi trošenja.

Oprez: komponente za određivanje veličine, mjerna kugla i drška namijenjeni su za višekratnu upotrebu pod uvjetom da se pregledaju prije svake upotrebe radi uočavanja znakova oštećenja. Prije svake upotrebe potrebno je vizualno pregledati komponente za određivanje veličine i mjernu kuglu radi uočavanja znakova oštećenja polimernih materijala, pukotina i znakova strukturnog oštećenja ili nečitljivih oznaka. Prije svake upotrebe i nakon savijanja dršku je potrebno pregledati radi uočavanja vidljivih pukotina ili znakova strukturnog oštećenja. Zamijenite bilo koji instrument na kojem su prisutna ta oštećenja jer možda neće ispravno funkcionirati i mogao bi uzrokovati ozljedu bolesnika.

Izjava o odricanju jamstava

Iako su proizvod HAART 200 za aortnu anuloplastiku i komplet instrumenata HAART 201, dalje u tekstu „proizvod”, proizvedeni u strogo kontroliranim uvjetima, društvo Corcym nema kontrolu nad uvjetima u kojima se taj proizvod upotrebljava. Stoga se društvo Corcym

i njegova povezana društva (zajedno: „Corcym”) odriču svih jamstava u pogledu proizvoda, izričitih i podrazumijevanih, uključujući, između ostaloga, bilo koje podrazumijevano jamstvo u pogledu tržišnog potencijala ili prikladnosti za određenu svrhu. Društvo Corcym nije odgovorno prema nijednoj osobi ili subjektu ni za kakve medicinske troškove ili bilo kakvu izravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja je uzrokovana bilo kakvom upotrebom, oštećenjem, nedostatkom ili neispravnim funkcioniranjem proizvoda, neovisno o tome temelji li se potraživanje za naknadu takve štete na jamstvu, ugovoru, deliktu ili nečem drugom. Nijedna osoba nema nikakvu ovlast obvezati društvo Corcym na bilo kakvu izjavu ili jamstvo u pogledu proizvoda.

Prethodno navedena izuzeća i ograničenja nisu namijenjena da budu u suprotnosti i ne tumače se kao da su u suprotnosti s obveznim odredbama mjerodavnog prava. Ako bilo koji nadležni sud smatra da je bilo koji dio ili uvjet ove Izjave o odricanju jamstva i ograničenju odgovornosti nezakonit, neprovediv ili u suprotnosti s mjerodavnim pravom, to neće utjecati na valjanost preostalog dijela Izjave o odricanju jamstva i ograničenju odgovornosti, a sva prava i obveze tumače se i provode kao da ova Izjava o odricanju jamstva i ograničenju odgovornosti ne sadrži taj dio ili uvjet koji se smatra nevaljanim.

Patenti

Patenti: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Návod k použití - Souprava nástrojů HAART 201

Obsah

1. Symboly značení na nástrojích.....	24
2. Indikace	24
3. Popis	24
4. Varování	25
5. Bezpečnostní opatření	26
6. Způsob dodání	26
7. Pokyny k použití	27
8. Prohlášení k přesnosti měřicí pomůcky a měřicí koule	27
9. Čištění a sterilizace před použitím	27
Odmítnutí záruk	29
Patenty	30
Obrázky	137

1. Symboly značení na nástrojích



Výrobce



Nesterilní



Kód šarže



Katalogové číslo



Autorizovaný zástupce pro Evropu



Produkt splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.



Prostudujte si návod k použití

2. Indikace

Souprava nástrojů HAART 201 je určena k použití jako pomůcka při implantaci zařízení k aortální anuloplastice HAART 200.

3. Popis

Souprava nástrojů HAART 201 sestává ze čtyř (4) měřících pomůcek, jedné (1) měřicí koule a dvou (2) rukojetí dodávaných v nerezovém nosiči (obrázek 1 na straně 137). Souprava nástrojů slouží k výběru vhodného zařízení k aortální anuloplastice HAART 200 pro daného pacienta a jako pomůcka vyhodnocení správného

kontaktu cípů po dokončení celkové rekonstrukce aortální chlopně. Souprava nástrojů HAART 201 je opakovaně použitelná. Je ji však nutné před každým použitím vyčistit a vysterilizovat autoklávou (párou). Podrobné informace o použití a sterilizaci příslušenství naleznete v částech níže.

3.1 Rukojeti

Rukojeť je vyrobena z nerezové oceli ASTM A276 a vyčištěná a pasivovaná dle specifikace ASTM F86. Rukojeť lze také našroubovat do měřících pomůcek, měřící koule a držáku a ulehčit si tak polohování během zákroku (obrázek 2 na straně 137). Nerezovou rukojeť lze ohnout v zúžené části a zavést tak měřící pomůcky, měřící kouli a zařízení do operačního pole požadovaným způsobem. Rukojeť má velice podobnou konstrukci a výrobu jako rukojeti dodávané s náhradními protézami srdečních chlopní a je určena k podobnému použití.

3.2 Měřící pomůcky

Měřící pomůcky se vyrábí z polyfenylsulfonu. Každou kuličkou prochází v její ose otvor (obrázek 3 na straně 138). Horní část otvoru je opatřena závitem a lze k ní připojit rukojeť nástroje.

Měřící pomůcky jsou na rovníku a v 15° tečkovaných oblastech v odstupu 180° označené laserem. Značky pomáhají uživateli při hodnocení délky volného okraje cípu. Velikost odpovídajícího zařízení HAART 200 je výrazně uvedena na horním povrchu každé měřící pomůcky.

3.3 Měřící koule

Měřící koule je vyrobena z polyfenylsulfonu a její osou prochází otvor. Horní část otvoru je opatřena závitem a lze k ní připojit rukojeť nástroje.

Po dokončení rekonstrukce cípů lze pomocí měřící koule dodávané jako součást soupravy nástrojů HAART 201 vyhodnotit efektivní výšku a geometrickou výšku cípu. Měřící koule má na svém povrchu vyznačené dvě různé vertikální škály (obrázek 4 na straně 139). Jedna škála začíná u vrcholu koule a slouží k odhadu efektivní výšky cípu chlopně. Po úspěšné rekonstrukci by měla být efektivní výška cípu přibližně 8 až 10 mm. Pomocí druhé škály lze v případě potřeby vyhodnotit geometrické výšky cípu, postup slouží k dalšímu vyhodnocení velikosti a symetrie cípu po jeho celkové rekonstrukci.

4. Varování

- Nepoužívejte anuloplastické měřící pomůcky od jiných výrobců. Jiné anuloplastické měřící pomůcky neurčují vhodnou velikost zařízení k aortální anuloplastice HAART 200.

- Stanovení správné velikosti zařízení k anuloplastice je důležitým prvkem pro úspěšnou rekonstrukci chlopně. Významně menší velikost chlopně může vést k její stenóze nebo dehiscenci prstence. Nadměrná velikost může mít za následek regurgitaci chlopně. Velikost zařízení k aortální anuloplastice HAART 200 se volí pomocí měřících pomůcek dle zamýšleného použití zařízení. K výběru správné velikosti zařízení používejte výhradně měřící pomůcky HAART v soupravě nástrojů HAART 201.
- K připojení držáku zařízení, měřících pomůcek a měřící koule používejte výhradně rukojeť HAART.
- Měřící pomůcky, měřící koule a rukojeť se dodávají NESTERILNÍ. Před každým použitím je nutné je vyčistit a sterilizovat.
- Toto zařízení smí používat pouze chirurgové, kteří absolvovali školení v technikách implantace zařízení HAART a technik měření velikosti.
- Souprava nástrojů HAART 201 není určena k použití v kombinaci s jinými zařízeními než zařízení k aortální anuloplastice HAART 200.
- Měřící pomůcky ani měřící kouli HAART 201 není vhodné čistit ultrazvukem, jelikož polymerový materiál a značky mohou prasknout.

5. Bezpečnostní opatření

Před každým použitím je měřící pomůcky a měřící kouli nutné vizuálně zkontrolovat, jestli nejsou polymerové materiály popraskané, natržené, nevykazují známky strukturálního oslabení nebo jiné nečitelné známky.

Rukojeť je nutné před použitím a po ohnutí zkontrolovat, jestli není prasklá nebo nevykazuje známky strukturálního oslabení. Nástroje s jakoukoli výše uvedenou vadou je nutné vyměnit, jelikož nemusí fungovat správně a mohly by způsobit poranění pacienta.

6. Způsob dodání

Souprava nástrojů HAART 201 se dodává NESTERILNÍ v nerezovém nosiči. Nástroje jsou při dodání čisté, ale NESTERILNÍ.

Po převzetí soupravy nástrojů odstraňte všechny balící materiály a pečlivě zkontrolujte všechny nástroje, jestli při přepravě nedošlo k jejich poškození. Nástroje je nutné před každým použitím vizuálně zkontrolovat, vyčistit a sterilizovat.

Veškeré nástroje nesoucí známky poškození nebo nástroje s nečitelnými značkami zlikvidujte.

Soupravu nástrojů skladujte v čistém prostředí.

7. Pokyny k použití

Souprava nástrojů HAART 201 je určena k použití jako pomůcka při implantaci zařízení k aortální anuloplastice HAART 200. Prostudujte si Pokyny k použití zařízení k aortální anuloplastice HAART 200.

8. Prohlášení k přesnosti měřicí pomůcky a měřicí koule

Měřicí pomůcky slouží jako vizuální škály k výběru vhodné velikosti zařízení na základě délek volného okraje cípu aortální chlopně. Průměry mají přesnost $\pm 0,010$ palce (0,254 mm) specifikované velikosti.

Měřicí koule slouží pouze jako referenční a vizuální pomůcka k vyhodnocení efektivní výšky cípu a geometrické délky cípu po jeho rekonstrukci. Škály na měřicí kouli mají přesnost $\pm 0,008$ palce ($\pm 0,2$ mm) mezi sousedními značkami.

9. Čištění a sterilizace před použitím

Varování: Souprava nástrojů HAART 201 se dodává NESTERILNÍ, před použitím je nutné ji pečlivě vyčistit a sterilizovat.

9.1 Pokyny k čištění

Před čištěním odpojte rukojeť od měřicí pomůcky či měřicí koule.

Poznámka: Pokud je pravděpodobné, že přenesení nástrojů do místa zpracování proběhne opožděně, vložte nástroje do zakryté nádoby s vhodným čistícím prostředkem (např. Enzol Enzymatic Detergent nebo ekvivalent), aby se sušení oddálilo.

Maximálně do 2 hodin po použití odstraňte hrubé nečistoty opláchnutím tekoucí studenou (25 až 30 °C) vodou z vodovodního kohoutku a namočte je na 1 minutu do enzymatického čistícího prostředku (např. Enzol Enzymatic Detergent) připraveného v koncentraci 15 g na jeden litr vody. Ponořte nástroje do nádoby s vhodným čistícím prostředkem (např. Enzol) připraveného v koncentraci 15 g na jeden litr vody z kohoutku (15 až 30 °C) po dobu minimálně dvou (2) minut. Pomocí kartáčku se štětinami čistěte oblast se závitem na měřících pomůčkách a měřících koulích po dobu 15 až 20 sekund, abyste zajistili odstranění jakékoliv přítomné nečistoty.

Opláchněte tekoucí vodou z vodovodního kohoutku (20 až 35 °C), dokud neodstraníte všechny viditelné stopy čistícího roztoku. Vizuálně zkontrolujte, zda nejsou přítomny zbývající nečistoty, a v případě potřeby proces zopakujte. Vysušte pomocí měkké tkaniny a přeneste k následujícímu kroku čištění.

Nástroj vyčistěte v automatické myčce s použitím následujících parametrů:

Parametry automatického čištění

Krok procesu	Čas (mm:ss)	Teplota (C)	Čistící prostředek
Enzymatická lázeň	04:00	Horká voda z kohoutku	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/l
Lázeň	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/l
Opláchnutí	02:00	70	Neuplatňuje se
Sušení	15:00	Nízká	Neuplatňuje se

Vizuálně zkontrolujte každý nástroj na zbývající nečistotu a vlhkost. Pokud na něm zbývá nečistota, zopakujte postup čištění. Jsou-li nástroje mokré, použijte k sušení filtrovaný stlačený vzduch nebo utěrku bez vláken.

Varování: Měřicí pomůcky není vhodné čistit ultrazvukem, jelikož polymerový materiál a značky mohou prasknout.

Uživatel odpovídá za kvalifikaci veškerých odchylek od doporučené metody čištění.

9.2 Pokyny ke sterilizaci

Před čištěním a sterilizací odpojte rukojeti od měřicí pomůcky či měřicí koule.

Vložte čtyři měřicí pomůcky, jednu měřicí kouli a rukojeti do nosiče na nástroje určeného k parní sterilizaci.

Doporučujeme následující sterilizační cyklus:

Teplota: 132°C (270°F)

Délka: 4 minuty

Cyklus: Prevakuový

Doba sušení: minimálně 20 minut

Uživatel odpovídá za kvalifikaci veškerých odchylek od doporučené metody sterilizace.

Společnost Corcym potvrzuje, že níže popsany sterilizační cyklus se rutinně používá v evropských nemocnicích a byl validován pro řadu podobných systémů pro měření srdečních chlopní a chirurgických nástrojů.

Teplota: 132°C (274°F)

Délka: 4 minuty

Cyklus: Prevakuový

Doba sušení: minimálně 20 minut

Sterilizace součástí soupravy nástrojů HAART 201 s využitím rozsáhle validovaného procesu nepředstavuje žádný větší problém. Materiály nástrojů vydrží teploty až do 137 °C.

9.3 Opakované použití

Společnost Corcym podrobila soupravu nástrojů HAART 201 minimálně 50 cyklům sterilizace a použití. Nebyly pozorovány žádné známky opotřebení.

Upozornění: Měřicí pomůcky, měřící koule a rukojeť jsou určeny k opakovanému použití. Před každým použitím je však nutné je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené. Před každým použitím je měřicí pomůcky a měřící kouli nutné vizuálně zkontrolovat, jestli nejsou polymerové materiály popraskané, natržené, nevykazují známky strukturálního oslabení nebo jiné nečitelné známky. Rukojeť je nutné před použitím a po ohnutí zkontrolovat, jestli není prasklá nebo nevykazuje známky strukturálního oslabení. Nástroje s jakoukoli výše uvedenou vadou je nutné vyměnit, jelikož nemusí fungovat správně a mohly by způsobit poranění pacienta.

Odmítnutí záruk

I když bylo zařízení k aortální anuloplastice HAART 200 a souprava nástrojů HAART 201, v dalším textu označované jako „produkt“, vyrobené za pečlivě kontrolovaných podmínek, společnost Corcym nemůže ovlivnit podmínky, za kterých bude produkt použit. Společnost Corcym a její dceřiné společnosti (spolu „Corcym“) tudíž odmítá jakékoli záruky, vyjádřené i implikované, týkající se produktu, včetně mimo jiné jakékoli implikované záruky prodejnosti či vhodnosti pro určitý účel. Společnost Corcym neponese vůči žádné osobě či subjektu odpovědnost za jakékoli zdravotní náklady či přímé, náhodné nebo následné škody způsobené použitím, vadou, selháním či poruchou produktu, bez ohledu na to, jestli je reklamace takových škod provedena na základě záruky, smlouvy, občanskoprávní odpovědnosti či jinak. Žádný subjekt nemá oprávnění společnost Corcym zavázat k jakýmkoli povinnostem či zárukám vztahujícím se k tomuto produktu.

Výjimky a omezení výše uvedeného nejsou zamýšlené a nelze je považovat za porušení povinností vyplývajících z platných zákonů. Pokud je jakákoli část nebo podmínky tohoto Odmítnutí záruk nebo Omezení zodpovědnosti považována jakýmkoli soudem v kompetentní jurisdikci za nezákonnou, nevynutitelnou nebo v rozporu s platnými zákony, platnost zbývajících částí tohoto Odmítnutí záruk a Omezení zodpovědnosti nebude narušena. Veškerá

práva a povinnosti budou definovány a vymáhány, jako kdyby Odmítnutí záruk a Omezení zodpovědnosti neobsahovali danou část nebo podmínku považovanou za neplatnou.

Patenty

Patenty: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Brugsanvisning - HAART 201 Instrument Set

Indholdsfortegnelse

1. Instrumentets mærkningssymboler	31
2. Indikationer	31
3. Beskrivelse	31
4. Advarsler	32
5. Forholdsregler	33
6. Levering	33
7. Brugsanvisning	34
8. Nøjagtighedserklæring for størrelsesmål og målekugle	34
9. Rengøring og sterilisering inden brug	34
Ansvarsfraskrivelse for garantier	36
Patents	37
Figurer	137

1. Instrumentets mærkningssymboler



Producent



Usterilt



Lotnummer



Katalognummer



Autoriseret europæisk rep.



Produktet overholder kravene i direktiv 93/42/EØF
for medicinsk udstyr



Læs brugsanvisning

2. Indikationer

HAART 201-instrumentsættet er beregnet til at blive brugt som et hjælpemiddel ved implantering af HAART 200 aortisk annuloplastikanordning.

3. Beskrivelse

HAART 201-instrumentsættet består af fire (4) størrelsesmålere, én (1) målekugle og to (2) håndtag i en bakke af rustfrit stål (figur 1 på side 137). Instrumentsættet bruges til at vælge den korrekte størrelse på HAART 200 aortisk annuloplastikanordning for en given patient og gøre det lettere at vurdere fligens tilpasning efter udførelsen af den generelle operation af aortaklappen.

HAART 201-instrumentsættet er genanvendeligt, men det skal renses og steriliseres ved hjælp af autoklave (damp) inden hver enkelt brug. Nedenstående afsnit indeholder detaljerede oplysninger om brug og sterilisering af udstyr.

3.1 Håndtag

Håndtaget er fremstillet af rustfrit stål (ASTM A276) og renses og passiveres i henhold til ASTM-specifikation F86. Håndtaget kan føres ind i størrelsesmålerne, målekuglen og holderen, så anordningen kan anbringes under indgrebet (figur 2 på side 137). Håndtaget i rustfrit stål kan foldes i det smalle udsnit, så størrelsesmålerne, målekuglen og anordningen klargøres på den ønskede måde til operationsstuen. Håndtagets design og fremstilling minder meget om de håndtag, der følger med reserve-hjerteklapprotoser, og skal bruges på samme måde.

3.2 Størrelsesmålere

Størrelsesmålerne er fremstillet af polyfenylensulfon. Alle kugler har et hul igennem langs akse (figur 3 på side 138). Toppen af hullet er formet således, at instrumenthåndtaget kan fastgøres.

Størrelsesmålerne er lasermærket med en linje omkring midten og 15° brede stiplede sektioner, som vender 180° fra hinanden, så brugeren lettere kan vurdere længden af fligens frie kant. Størrelsen på den tilsvarende HAART 200-anordning er fremhævet på den øvre del af overfladen på hver størrelsesmåler.

3.3 Målekugle

Målekuglen er fremstillet af polyfenylensulfon og har et hul igennem langs akse. Toppen af hullet er formet således, at instrumenthåndtaget kan fastgøres.

Efter fligoperationen kan fligenes effektive højde og geometriske højde vurderes ved hjælp af målekuglen, som følger med i HAART 201-instrumentsættet. Målekuglen har to forskellige vertikale skalaer, som er afmærket på overfladen (figur 4 på side 139). Den ene skala starter på kuglens toppunkt og skal bruges til at fastslå hjerteklapfligens effektive højde. En vellykket operation kræver, at fligens effektive højde er mellem 8 og 10 mm. Den anden skala kan bruges til at vurdere fligenes geometriske højde, når det behøves, så fligens størrelse og symmetri kan evalueres yderligere efter den samlede hjerteklapoperation.

4. Advarsler

- Brug ikke andre fabrikanters annuloplastik-størrelsesmålere. Andre annuloplastik-størrelsesmålere kan muligvis ikke angive den korrekte størrelse til HAART 200 aortisk annuloplastikanordning.

- Det er vigtigt at vælge den korrekte størrelse på annuloplastikanordningen, hvis operationen af hjerteklappen skal lykkes. Hvis anordningen er for lille, kan det medføre klapstenose eller fremfald af ringen. Hvis anordningen er for stor, kan det medføre klapinsufficiens. Størrelsen på HAART 200 aortisk annuloplastikanordning vælges ved hjælp af størrelsesmålerne og ud fra det, som anordningen skal bruges til. Brug kun de HAART-størrelsesmålere, som følger med HAART 201-instrumentsættet, til at vælge den korrekte størrelse på anordningen.
- Brug kun HAART-håndtaget til anordningens holder, størrelsesmålere og målekugle.
- Størrelsesmålerne, målekuglen og håndtaget, der følger med, er USTERILE og skal rengøres og steriliseres inden hver anvendelse.
- Denne anordning må kun bruges af kirurger, som er uddannet i implantering af HAART-anordninger og teknikker til valg af størrelse.
- HAART 201-instrumentsættet er ikke beregnet til brug sammen med andre anordninger end HAART 200 aortisk annuloplastikanordning.
- Der må ikke anvendes ultralydsrensning på HAART 201-størrelsesmålerne og -målekuglen, da det kan skade polymermaterialet og markeringerne.

5. Forholdsregler

Størrelsesmålerne og kuglemåleren skal inspiceres grundigt for revner i polymermaterialerne, tegn på svækkelse eller utydelige mærker inden hver enkelt brug.

Håndtaget bør inspiceres for synlige revner eller tegn på svækkelse inden hver enkelt brug og efter foldning. Udskift instrumenter med synlige fejl, da de muligvis ikke fungerer korrekt og kan forvolde skader på patienten.

6. Levering

HAART 201-instrumentsættet leveres IKKE STERILT i en bakke af rustfrit stål. Instrumenterne leveres rene, men IKKE STERILE.

Ved modtagelsen af instrumentsættet skal alle emballeringsmaterialer fjernes, og alle instrumenter skal undersøges nøje for skader som følge af leveringen. Instrumenterne skal kontrolleres visuelt, renses og steriliseres inden hver enkelt brug.

Kassér instrumenter med tegn på skader eller utydelige markeringer.

Opbevar instrumentsættet i rene omgivelser.

7. Brugsanvisning

HAART 201-instrumentsættet er beregnet til at blive brugt som et hjælpemiddel ved implantering af HAART 200 aortisk annuloplastikanordning. Se brugsanvisningen for HAART 200 aortisk annuloplastikanordning.

8. Nøjagtighedserklæring for størrelsesmåler og målekugle

Størrelsesmålerne er en visuel målestok til at vælge den korrekte størrelse på anordningen ud fra længderne på aortaklapfligenes frie kant. Størrelsesdiametrene er nøjagtige ned til $\pm 0,254$ mm af den angivne størrelse.

Målekuglen skal kun bruges som reference og visuelt hjælpemiddel til at fastslå fligens effektive højde og geometriske længde efter operation af fligene. Skalaerne på målekuglen er nøjagtige ned til $\pm 0,2$ mm mellem tilstødende markeringer.

9. Rengøring og sterilisering inden brug

Advarsel: HAART 201-instrumentsættet leveres USTERILT og skal renses og steriliseres grundigt inden brug.

9.1 Rengøringsanvisninger

Håndtaget skal fjernes fra størrelsesmåleren eller målekuglen inden rengøringen.

Bemærk: Hvis der er risiko for, at transporten af instrumenterne til behandlingsområdet bliver forsinket, skal instrumenterne anbringes i en tildækket beholder med et velegnet rengøringsmiddel (f.eks. Enzol enzymatisk rengøringsmiddel eller lignende) for at forsinke tørring.

Fjern groft smuds indenfor maksimalt 2 timer efter brug med en skylning i koldt (25° til 30° C) rindende postevand, og læg instrumenterne i blød i 1 minut i et enzymatisk rengøringsmiddel (f.eks. Enzol enzymatisk rengøringsmiddel) klargjort med 15 gram pr. liter vand. Læg instrumenterne ned i en beholder med et velegnet rengøringsmiddel (f.eks. Enzol) klargjort med 15 gram til 1 liter postevand (15° til 30° C) i mindst to (2) minutter. Rengør med en blød børste gevindområdet på størrelsesmålerne og målekuglerne i 15 til 20 sekunder for at sikre, at alt fastsiddende smuds fjernes.

Skyl under rindende postevand (20° til 35° C), indtil der ikke mere ses spor af rengøringsopløsningen. Se efter, om der er smudsrester, og gentag om nødvendigt processen. Tør instrumenterne med en blød klud, og før dem til rengøringstrinet.

Rengør instrumentet i en automatisk vaskemaskine med følgende parametre:

Parametre for automatisk rengøring

Behandlingstrin	Tid (mm:ss)	Temp (C)	Rengøringsmiddel
Enzymatisk vask	04:00	Varmt postevand	Steris Prolystica 2 X koncentrat Enzymatisk Iblødlægning og rengøringsmiddel 3 ml/liter
Vask	02:00	60	Steris Prolystica Ultrakoncentrat Neutralt rengøringsmiddel 0,7 ml/liter
Skyl	02:00	70	Ikke relevant
Tør	15:00	Lav	Ikke relevant

Se efter, om der er smudsrester og fugt på hvert instrument. Gentag rengøringsprocessen, hvis der er smudsrester. Anvend filtreret trykluft eller en fnugfri klud til tørring, hvis instrumenterne er våde.

Advarsel: Ultralydsrensning bør ikke bruges på størrelsesmålerne, da det kan skade polymermaterialet og markeringerne.

Brugeren er ansvarlig for kvalificeringen af enhver afvigelse fra den anbefalede rengøringsmetode.

9.2 Steriliseringsvejledning

Håndtagene skal fjernes fra størrelsesmåleren eller målekuglen inden rengøring og sterilisering.

De fire størrelsesmålere, den enkelte målekugle og håndtagene skal anbringes i instrumentbakken med henblik på dampsterilisering. Følgende steriliseringsprogram anbefales:

Temperatur: 132 °C (270 °F)

Hviletid: 4 minutter

Cyklus: Prævakuum

Tørretid: Minimum 20 minutter

Brugeren er ansvarlig for kvalificeringen af enhver afvigelse fra den anbefalede steriliseringsmetode.

Corcym anerkender, at den steriliseringscyklus, der er beskrevet nedenfor, rutinemæssigt anvendes på europæiske hospitaler og er blevet valideret for mange lignende størrelsesmålere til hjerteklapper og kirurgiske instrumenter.

Prævakuum: cyklus

Temperatur: 134 °C (274 °F)

Hviletid: 3 minutter

Tørretid: 20 minutter

Delene i HAART 201-instrumentsættet er ikke forbundet med væsentlige udfordringer ved sterilisering ved hjælp af denne bredt validerede proces. Instrumentmaterialerne kan modstå temperaturer på op til 137 °C.

9.3 Genbrug

Corcym har som minimum udført 50 steriliserings- og brugscyklusser for HAART 201-instrumentsættet uden tegn på slid.

Forsigtig: Størrelsesmålerne, målekuglen og håndtaget er beregnet til at blive brugt flere gange, forudsat at de kontrolleres inden hver enkelt brug, så eventuelle skader opdages. Størrelsesmålerne og kuglemåleren skal inspiceres grundigt for revner i polymermaterialerne, tegn på svækkelse eller utydelige mærker inden hver enkelt brug. Håndtaget bør inspiceres for synlige revner eller tegn på svækkelse inden hver enkelt brug og efter foldning. Udskift instrumenter med synlige fejl, da de muligvis ikke fungerer korrekt og kan forvolde skader på patienten.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

Although Selvom HAART 200 aortisk annuloplastikanordning og HAART 201-instrumentsættet (herefter kaldet "produktet") er fremstillet under nøje kontrollerede forhold, har Corcym ingen kontrol over, hvilke forhold dette produkt benyttes under. Corcym og dets affilierede (samlet kaldet "Corcym") fraskriver sig derfor alle garantier (både udtrykkelige og antydende) i forbindelse med produktet, herunder, men ikke begrænset til, enhver antydet garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Corcym er ikke ansvarlig over for nogen person eller enhed for eventuelle medicinske udgifter eller direkte, indirekte eller følgende skader som følge af enhver brug, fejl mangel eller defekt i forbindelse med produktet, uanset om et krav for sådanne skader er baseret på garanti, kontrakt, skadevoldende handling eller andet. Ingen personer har beføjelser til at binde Corcym til nogen som helst repræsentation eller garanti i forbindelse med produktet.

De udelukkelse og begrænsninger, som er nævnt ovenfor, har ikke til formål at være, og bør ikke betragtes som værende, i strid med lovpligtige krav i den gældende lovgivning. Hvis nogen del af eller

vilkårene i denne Ansvarsfraskrivelse for garanti og Ansvarsbegrænsning ifølge en vilkårlig retsmyndighed eller kompetent jurisdiktion betragtes som ulovlig, umulig at håndhæve eller i strid med gældende lovgivning, har det ingen betydning for gyldigheden af den resterende del af Ansvarsfraskrivelsen og Ansvarsbegrænsningen, og alle rettigheder og forpligtelser skal betragtes og håndhæves som om, at Ansvarsfraskrivelsen og Ansvarsbegrænsningen ikke betegnede den bestemte del eller betingelse som værende ugyldig.

Patents

Patents: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP207355.



Instructies voor gebruik - HAART 201-instrumentset

Inhoudsopgave

1. Symbolen op het etiket	38
2. Indicaties	38
3. Beschrijving	38
4. Waarschuwingen	40
6. Levering	41
7. Instructies voor gebruik	41
8. Verklaring nauwkeurigheid sjabloon en meetbol	41
9. Reiniging en sterilisatie voorafgaand aan gebruik	41
Vrijwaring van garantieverplichtingen	43
Octrooien	44
Afbeeldingen	137

1. Symbolen op het etiket



Fabrikant



Niet-steriel



Partijcode



Catalogusnummer



Geautoriseerde Europ. verteg.



Product voldoet aan de eisen van de richtlijn
medische hulpmiddelen 93/42/EEG



Raadpleeg instructies voor gebruik

2. Indicaties

De HAART 201-instrumentset is bedoeld om te worden gebruikt bij het inbrengen van het HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat.

3. Beschrijving

De HAART 201-instrumentset bestaat uit vier (4) sjablonen, een (1) meetbol en twee (2) handgrepen in een roestvrijstalen tray (afbeelding 1 op pagina 137). De instrumentset wordt gebruikt om een HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat met de juiste grootte voor een bepaalde patiënt te kiezen en te helpen bij het beoordelen

van de bladcoaptatie nadat de reparatie van de aortaklep is voltooid. De HAART 201-instrumentset kan opnieuw worden gebruikt. De set moet voor elk gebruik echter worden gereinigd en gesteriliseerd in een autoclaaf (stoom). Het gebruiken en steriliseren van accessoires wordt gedetailleerd beschreven in de volgende paragrafen.

3.1 Handgreep

De handgreep is gemaakt van ASTM A276 roestvrij staal en gereinigd en gepassiveerd volgens ASTM-specificatie F86. De handgreep kan in de sjablonen, meetbol en houder worden gedraaid om het positioneren tijdens de operatie te vergemakkelijken (afbeelding 2 op pagina 137). De roestvrijstalen handgreep kan worden gebogen in het versmalde gedeelte om de sjablonen, meetbol en het implantaat op de gewenste manier op de locatie van de ingreep te brengen. De handgreep lijkt qua ontwerp en fabricage sterk op handgrepen die worden geleverd bij vervangende hartklepprothesen en dient op een gelijkaardige manier te worden gebruikt.

3.2 Sjablonen

De sjablonen zijn gemaakt van polyfenylsulfon. Elke bol is langs de as voorzien van een doorlopend gat (afbeelding 3 op pagina 138). Het bovenste deel van het gat heeft een schroefdraad voor de handgreep van het instrument.

De sjablonen zijn met behulp van een laser gemarkeerd met een streep ter hoogte van de equator en 15° brede gestippelde gebieden die 180° uit elkaar liggen om de gebruiker te helpen bij het bepalen van de lengte van het blad zonder rand. De grootte bij het bijbehorende HAART 200-implantaat is duidelijk aangegeven op het bovenste oppervlak van elke sjabloon.

3.3 Meetbol

De meetbol is gemaakt van polyfenylsulfon en heeft een doorlopend gat langs zijn as. Het bovenste deel van het gat heeft een schroefdraad voor de handgreep van het instrument.

Na het repareren van het blad kan de effectieve hoogte en de geometrische bladhoogte worden bepaald met de meetbol die deel uitmaakt van de HAART 201-instrumentset. De meetbol is voorzien van twee verschillende verticale schalen die op het oppervlak zijn aangebracht (afbeelding 4 op pagina 139). De ene schaal ontspringt bij de apex van de bol en is bedoeld voor het schatten van de effectieve hoogte van het klepblad. Voor een succesvolle reparatie moet de effectieve

hoogte van het blad ongeveer 8 tot 10 mm bedragen. De tweede schaal kan worden gebruikt om desgewenst de geometrische hoogte van een blad te bepalen, zodat de bladgrootte en de symmetrie na het repareren van de klep kunnen worden geëvalueerd.

4. Waarschuwingen

- Gebruik geen annuloplastiek-sjablonen van een andere fabrikant. Andere annuloplastiek-sjablonen geven mogelijk niet de juiste grootte van het HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat aan.
- De juiste groottebepaling van het annuloplastiekimplantaat is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle klepreparatie. Het kiezen van een (veel te) klein implantaat kan tot kleptenose of ringdehiscentie leiden. Een te groot implantaat kan tot klepterugstroming leiden. De grootte van het HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat wordt gekozen met behulp van sjablonen, afgestemd op de ontwerpintentie van het implantaat. Gebruik voor het kiezen van de juiste grootte implantaat alleen de HAART-sjablonen die worden geleverd bij de HAART 201-instrumentset.
- Gebruik alleen de HAART-handgreep in combinatie met de implantaathouder, de sjablonen en de meetbol.
- De sjablonen, meetbol en handgreep worden NIET-STERIEL geleverd en moeten voorafgaand aan elk gebruik worden gereinigd en gesteriliseerd.
- Dit implantaat mag alleen worden gebruikt door chirurgen die zijn geschoold in het inbrengen van het HAART-implantaat en het bepalen van implantaatgrootten.
- De HAART 201-instrumentset is niet bedoeld om te worden gebruikt met andere implantaten dan het HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat.
- Bij de HAART 201-sjablonen en meetbol mag geen gebruik worden gemaakt van ultrasone reiniging aangezien hierdoor craqueluren van de polymeer en de markeringen kan optreden.

5. Voorzorgsmaatregelen

Voorafgaand aan elk gebruik moeten de sjablonen en de meetbol visueel worden geïnspecteerd op het craqueluren van het polymeer, barsten, tekenen van structurele zwakte of onleesbare markeringen.

De handgreep moet voorafgaand aan elk gebruik en na het buigen worden geïnspecteerd op zichtbare barsten en tekenen van structurele zwakte. Vervang elk instrument dat deze gebreken vertoont, aangezien het mogelijk niet correct functioneert en de patiënt zou kunnen verwonden.

6. Levering

De HAART 201-instrumentset wordt NIET-STERIEL geleverd in een roestvrijstalen tray. De instrumenten worden schoon maar NIET-STERIEL geleverd.

Verwijder na ontvangst van de instrumentset al het verpakkingsmateriaal en kijk alle instrumenten zorgvuldig na op tekenen van transportschade. De instrumenten moeten vóór elk gebruik visueel worden geïnspecteerd, gereinigd en gesteriliseerd.

Werp instrumenten weg die sporen van schade of onleesbare markeringen vertonen.

Bewaar de instrumentset in een schone omgeving.

7. Instructies voor gebruik

De HAART 201-instrumentset is bedoeld om te worden gebruikt bij het inbrengen van het HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat. Zie de 'Instructies voor gebruik' voor het HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat.

8. Verklaring nauwkeurigheid sjabloon en meetbol

Sjablonen dienen als een visuele maat voor het kiezen van de juiste implantaatgrootte, gebaseerd op de lengten van de aortaklep zonder rand. De grootte diameters zijn nauwkeurig tot op ongeveer 0,254 mm van de vermelde grootte.

De meetbol is alleen als referentiemiddel en visuele hulp bedoeld om de effectieve bladhoogte en de geometrische lengte van het blad te bepalen na het repareren van het blad. De schalen op de meetbol zijn nauwkeurig tot op 0,2 mm tussen twee naast elkaar gelegen markeringen.

9. Reiniging en sterilisatie voorafgaand aan gebruik

Waarschuwing: de HAART 201-instrumentset wordt NIET-STERIEL geleverd en moet voorafgaand aan het gebruik grondig worden gereinigd en gesteriliseerd.

9.1 Reinigingsinstructies

De handgreep moet vóór het reinigen worden verwijderd van de sjabloon en meetbol.

Opmerking: als het vervoer van de instrumenten naar het verwerkingsgebied waarschijnlijk vertraging oploopt, dient u de instrumenten in een afgedekte bak te plaatsen met een gepast reinigingsmiddel (bij. Enzol Enzymatic Detergent of een equivalent) om de droging te vertragen.

Maximaal 2 uur na gebruik dient u de grove verontreiniging te verwijderen door middel van spoelen met koud water (25 °C tot 30 °C) onder een lopende kraan en 1

minuut weken in een enzymreinigingsmiddel (bijv. Enzol Enzymatic Detergent) bereid met 15 g per 1 liter water. Dompel instrumenten onder in een bak met een gepast reinigingsmiddel (bijv. Enzol) bereid met 15 g per 1 liter kraanwater (15 °C tot 30 °C) gedurende minimaal twee (2) minuten. Maak het schroefdraadgedeelte van de sjablonen en meetbollen schoon met een borstel gedurende 15 tot 20 seconden om er zeker van te zijn dat eventuele vervuiling wordt verwijderd.

Spoel af onder lopend kraanwater (20 °C tot 35 °C) tot u geen sporen van de reinigungsoplossing meer ziet. Inspecteer visueel op eventuele overgebleven vervuiling en herhaal het proces indien nodig. Droog af met een zachte doek en ga door naar de reinigungsstap.

Reinig het instrument in een wasautomaat met behulp van de volgende parameters:

Parameters voor automatische reiniging

Processtap	Tijd (mm:ss)	Temperatuur (C)	Reinigingsmiddel
Enzymatisch wassen	04:00	Heet kraanwater	Steris Prolystica 2X concentraat Enzymatisch Voorweken en reinigungsmiddel 3 ml/liter
Wassen	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-concentraat Neutraal wasmiddel 0,7 ml/liter
Spoelen	02:00	70	N.v.t.
Drogen	15:00	Laag	N.v.t.

Inspecteer elk instrument visueel op overgebleven vervuiling en vocht. Als er nog vervuiling is overgebleven, herhaalt u het reinigungsproces. Als de instrumenten nat zijn, gebruikt u perslicht of een niet-pluizende doek om ze te drogen.

Waarschuwing: De sjablonen mogen niet ultrasoon worden gereinigd omdat dit tot het craquelieren van het polymeer en de markeringen kan leiden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de kwalificatie van elke afwijking van de aanbevolen reinigungsmethode.

9.2 Sterilisatie-instructies

De handgreep moet voorafgaand aan het reinigen en steriliseren worden verwijderd van de sjabloon of meetbol.

De vier sjablonen, de enkele meetbol en de handgrepen moeten in de instrumenttray voor stoomsterilisatie worden geplaatst. De volgende sterilisatiecyclus wordt aanbevolen:

Temperatuur: 132 °C (270 °F)

Wachttijd: 4 minuten

Cyclus: Pre-vacuüm

Droogtijd: minimaal 20 minuten

De gebruiker is verantwoordelijk voor de kwalificatie van elke afwijking van de aanbevolen sterilisatiemethode.

Corcym erkent dat de hieronder beschreven sterilisatiecyclus standaard wordt gebruikt door Europese ziekenhuizen en gevalideerd is voor veel vergelijkbare hartklepsystemen en chirurgische instrumenten.

Pre-vacuüm: cyclus

Temperatuur: 134 °C (274 °F)

Wachttijd: 3 minuten

Droogtijd: 20 minuten

De onderdelen van de HAART 201-instrumentenset vormen geen significant probleem voor de sterilisatie met behulp van dit algemeen gevalideerde proces. De materialen van het instrument zijn bestand tegen temperaturen tot 137 °C.

9.3 Hergebruik

Corcym heeft minimaal 50 sterilisatie- en gebruikscycli uitgevoerd op de HAART 201-instrumentset zonder dat er sporen van slijtage optraden.

Pas op: De sjablonen, meetbol en handgreep kunnen worden hergebruikt indien ze vóór elk gebruik worden geïnspecteerd op beschadigingen. De sjablonen en de meetbol moeten vóór elk gebruik visueel worden geïnspecteerd op het craquelieren van het polymeer, barsten, tekenen van structurele zwakte of onleesbare markeringen. De handgreep moet voorafgaand aan elk gebruik en na het buigen worden geïnspecteerd op zichtbare barsten en tekenen van structurele zwakte. Vervang elk instrument dat deze gebreken vertoont, aangezien het mogelijk niet correct functioneert en de patiënt zou kunnen verwonden.

Vrijwaring van garantieverplichtingen

Het HAART 200-aorta-annuloplastie implantaat en de HAART 201-instrumentset (hierna kortweg 'product' genoemd), zijn vervaardigd onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden. Corcym heeft geen invloed op de omstandigheden waarin dit product wordt gebruikt. Corcym en zijn filialen (samen 'Corcym'

genoemd) zij daarom gevrijwaard van alle garanties, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot het product, waaronder (maar niet beperkt tot) enige veronderstelde garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Corcym is niet aansprakelijk tegenover personen of entiteiten voor medische onkosten of directe, incidentele of gevolgschade als gevolg van gebruik, defect, storing of slechte werking van het product, gebaseerd op een garantie, contract, onrechtmatige daad of anderszins. Geen persoon heeft de bevoegdheid om Corcym te binden aan enige vertegenwoordiging of garantie met betrekking tot het product.

De hierboven vermelde uitsluitingen en beperkingen zijn niet bedoeld om, en mogen niet worden uitgelegd als, strijdig te zijn met bepalingen van de vigerende wetgeving. Indien een deel of een voorwaarde in deze Vrijwaring van garantie en Beperking van aansprakelijkheid door een hof met jurisdictie wordt beoordeeld als zijnde onwettig, niet te handhaven of in strijd met de vigerende wetgeving, blijft de geldigheid van het resterende deel van deze Vrijwaring van garantie en Beperking van aansprakelijkheid overeind, en alle rechten en verplichtingen dienen te worden uitgelegd en afgedwongen alsof deze Vrijwaring van garantie en Beperking van aansprakelijkheid geen specifiek ongeldig deel of specifieke ongeldige voorwaarde bevat.

Octrooien

Octrooien: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Käyttöohje - HAART 201-instrumenttisarja

Sisällysluettelo

1. Instrumentin merkinnöissä käytetyt symbolit	45
2. Käyttöaiheet.....	45
3. Kuvaus	45
4. Varoitukset	46
6. Toimitustapa	47
7. Käyttöön liittyviä ohjeita	48
8. Sovituspallojen ja mittapallon tarkkuusvakuutus.....	48
9. Puhdistus ja sterilointi ennen käyttöä	48
Takuiden vastuuvapautuslauseke.....	50
Patentit	51
Kuvat	137

1. Instrumentin merkinnöissä käytetyt symbolit



Valmistaja



Ei-steriili



Eräkoodi



Luettelonumero



Valtuutettu edustaja Euroopassa



Tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset



Katso käyttöohjetta

2. Käyttöaiheet

HAART 201 -instrumenttisarja on tarkoitettu käytettäväksi apuvälineenä HAART 200 -aortta-annuloplastiarenkaan asennuksessa.

3. Kuvaus

HAART 201 -instrumenttisarja sisältää neljä (4) sovituspalloa, yhden (1) mittapallon ja kaksi (2) jatkovartta, jotka on pakattu ruostumattomalle terästarjottimelle (kuva 1 sivulla 137). Instrumenttisarjaa käytetään oikeankokoisen HAART 200 aortta-annuloplastiarenkaan valitsemiseen kullekin potilaalle sekä purjeiden koaptaation arviointiin aorttaläpän korjaukseen jälkeen.

HAART 201-instrumenttisarja on kestäkäyttöinen. Se on kuitenkin puhdistettava ja steriloitava autoklaavissa (höyryllä) ennen jokaista käyttökertaa. Tarkempia tietoja lisävarusteiden käytöstä ja steriloinnista on seuraavassa.

3.1 Jatkovarsi

Jatkovarsi on koneistettu ruostumattomasta ASTM A276 teräksestä ja puhdistettu ja passivoitu ASTM-vaatimuksen F86 mukaisesti. Jatkovarren voi kiinnittää sovituspalloihin, mittapalloon ja renkaan pidikkeeseen helpottamaan renkaan asettelua toimenpiteen aikana (kuva 2 sivulla 137). Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa jatkovarressa on kapeampi kohta, josta sitä voi taivuttaa sovituspallojen, mittapallon ja renkaan viemiseksi leikkauskohtaan halutussa asennossa. Jatkovarren rakenne ja valmistustapa ovat hyvin samankaltaiset kuin proteettisten sydänläppien kanssa toimitettujen jatkovarsien, ja sitä on tarkoitus käyttää samaan tapaan.

3.2 Sovituspallo

Sovituspallo on koneistettu polyfenyylisulfonista. Jokaisessa pallossa on sen akselin läpäisevä reikä (kuva 3 sivulla 138). Reiän yläosassa on kiertet instrumenttien jatkovartta varten.

Sovituspalloissa on lasermerkitty viiva pallon leveimmässä kohdassa ja 15° levyiset pisteillä merkityt alueet 180° välein. Merkinnät auttavat purjeen vapaan reunan pituuden arvioinnissa. Vastaavan HAART 200 -laitteen koko on merkitty selvästi kunkin sovituspallon yläpintaan.

3.3 Mittapallo

Mittapallo on koneistettu polyfenyylisulfonista ja siinä on pallon akselin läpäisevä reikä. Reiän yläosassa on kiertet instrumenttien jatkovartta varten.

Purjeiden korjauksen jälkeen tehollisen korkeuden ja purjeen geometrisen pituuden voi mitata HAART 201 instrumenttisarjan mittapallolla. Mittapallossa on kaksi erilaista pystysuuntaista asteikkoa, jotka on merkitty pallon pintaan (kuva 4 sivulla 139). Yksi asteikko alkaa pallon apeksista, ja se on tarkoitettu läpän purjeen tehollisen korkeuden arviointiin. Onnistunut korjaus edellyttää, että purjeen tehollinen korkeus on noin 8–10 mm. Toisella asteikolla voi tarvittaessa mitata purjeen geometrisia pituuksia ja arvioida siten purjeen kokoa ja symmetriaa tarkemmin läpän korjauksen jälkeen.

4. Varoitukset

- Muiden valmistajien annuloplastiarenkaiden sovitusvälineitä ei saa käyttää. Muilla annuloplastiarenkaiden

sovitusvälineillä saatu koko ei välttämättä ole oikea HAART 200 -aortta-annuloplastiarenkaan koko.

- Oikeankokoisen annuloplastiarenkaan valinta on läpän korjauksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Huomattavan alikokoisen renkaan valitseminen voi aiheuttaa läpän stenoosia tai renkaan irtautumisen. Ylikokoinen rengas voi aiheuttaa läppävuotoa. HAART 200 -aortta-annuloplastiarenkaan koko valitaan renkaan suunniteltua käyttötarkoitusta vastaavien sovituspallojen avulla. Käytä renkaan koon valitsemiseen ainoastaan HAART 201 instrumenttisarjaan kuuluvia HAART-sovituspalloja.
- Käytä renkaan pidikkeen, sovituspallojen ja mittapallon kanssa ainoastaan HAART-jatkovartta.
- Sovituspallot, mittapallo ja jatkovarsi toimitetaan EI-STERIILEINÄ ja ne on puhdistettava ja steriloitava ennen jokaista käyttökertaa.
- Tuotetta saavat käyttää ainoastaan kirurgit, jotka ovat saaneet koulutuksen, johon sisältyy HAART-tuotteen asennustekniikka ja oikean koon valitseminen.
- HAART 201 -instrumenttisarjaa ei ole tarkoitettu muiden tuotteiden kuin HAART 200 -aortta-annuloplastiarenkaan kanssa käytettäväksi.
- HAART 201 -sovituspalloja tai -mittapalloa ei saa puhdistaa ultraäänellä, sillä se voi naarmuttaa polymeerimateriaalia ja merkintöjä.

5. Varotoimet

Sovituspallot ja mittapallo on tarkastettava silmämääräisesti polymeerimateriaalin naarmujen, murtumien tai rakenteellisten heikkouksien sekä lukukelvottomien merkintöjen varalta ennen jokaista käyttökertaa.

Jatkovarsi on tarkastettava näkyvien murtumien tai rakenteellisten vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttökertaa sekä aina taivuttamisen jälkeen. Vaihda kaikki instrumentit, joissa ilmenee edellä mainittuja vikoja, sillä ne eivät välttämättä toimi enää kunnolla ja voivat aiheuttaa vammoja potilaalle.

6. Toimitustapa

HAART 201 -instrumenttisarja toimitetaan EI-STERIILINÄ ja pakattuna ruostumattomalle terästarjottimelle. Instrumentit toimitetaan puhtaina, mutta EI-STERIILEINÄ.

Kun olet vastaanottanut instrumenttisarjan, poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkasta kaikki instrumentit huolellisesti kuljetuksen aikana syntyneiden vaurioiden varalta. Ennen jokaista käyttökertaa instrumentit on tarkastettava silmämääräisesti, puhdistettava ja steriloitava.

Hävitä kaikki instrumentit, joissa on merkkejä vaurioista tai joiden merkinnät ovat lukukelvottomia.

Säilytä instrumenttisarja puhtaassa tilassa.

7. Käyttöön liittyviä ohjeita

HAART 201 -instrumenttisarja on tarkoitettu käytettäväksi apuvälineenä HAART 200 -aortta-annuloplastiarenkaan asennuksessa. Tutustu HAART 200 -aortta-annuloplastiarenkaan käyttöohjeisiin.

8. Sovituspallojen ja mittapallon tarkkuusvakuutus

Sovituspallo toimivat visuaalisena mittavälineenä valittaessa oikeaa renkaan kokoa aorttaläpän purjeen vapaan reunan pituuden perusteella. Koon halkaisijoiden tarkkuus määritellystä koosta on $\pm 0,254$ mm.

Mittapallo on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi ja visuaaliseksi apuvälineeksi purjeen tehollisen korkeuden ja purjeen geometrisen pituuden arviointiin purjeiden korjauksen jälkeen. Mittapallon asteikkojen tarkkuus kahden vierekkäisen merkin välillä on $\pm 0,2$ mm.

9. Puhdistus ja sterilointi ennen käyttöä

Varoitus: HAART 201 -instrumenttisarja toimitetaan EI-STERIILINÄ ja se on puhdistettava perusteellisesti ja steriloitava ennen jokaista käyttökertaa.

9.1 Puhdistusohjeet

Jatkovarsi on irrotettava sovituspallosta tai mittapallosta ennen puhdistamista.

Huomautus: Jos instrumenttien siirtäminen prosessointialueelle todennäköisesti viivästyy, aseta instrumentit kuivumisen estämiseksi kannelliseen astiaan, jossa on asianmukaista puhdistusainetta (esim. Enzol Enzymatic -puhdistusainetta tai vastaavaa).

Poista enintään kahden tunnin kuluttua käytöstä enimmät liat kylmällä (25 °C – 30 °C) vedellä. Huuhtelee juoksevalla vesijohtovedellä ja liota 1 minuutin ajan entsyymipuhdistusaineessa (esim. Enzol Enzymatic puhdistusaineessa), jonka laimennussuhde on 15 grammaa yhtä (1) vesilitraa kohden. Upota instrumentit asianmukaista puhdistusainetta (esim. Enzolia), jonka laimennussuhde on 15 grammaa yhtä (1) vesilitraa (15 °C – 30 °C) kohden, sisältävään astiaan vähintään kahden (2) minuutin ajaksi. Puhdista sovituspallojen ja mittapallojen kierteytyvää aluetta harjalla 15–20 sekunnin ajan, jotta pinttynyt lika irtoaa.

Huuhtelee juoksevalla vesijohtovedellä (20 °C – 35 °C), kunnes kaikki puhdistusaineen jäämät ovat hävinneet.

Tarkasta silmämääräisesti, ettei likaa ole jäänyt ja toista prosessi tarvittaessa. Kuivaa pehmeällä liinalla ja siirrä puhdistusvaiheeseen.

Puhdista instrumentti automaattipesurissa noudattamalla seuraavia parametreja:

Automaattisen puhdistuksen parametrit

Prosessin vaihe	Aika (min:s)	Lämpötila (°C)	Puhdistusaine
Entsytymaattinen pesu	04:00	Kuuma vesijohtovesi	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/litra
Pesu	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/litra
Huuhtelu	02:00	70	Ei mitään
Kuivaus	15:00	Matala	Ei mitään

Tarkasta silmämääräisesti, ettei yhteenkään instrumenttiin olen jäänyt likaa ja kosteutta. Jos likaa on jäänyt, toista puhdistusprosessi. Jos instrumentit ovat märkiä, kuivaa ne suodatetulla paineilmalla tai nukkaantumattomalla liinalla.

Varoitus: Sovituspalloja ei saa puhdistaa ultraäänellä, sillä se voi naarmuttaa polymeerimateriaalia ja merkintöjä.

Käyttäjä on vastuussa minkä tahansa suositellusta puhdistusmenetelmästä poikkeavan menetelmän soveltuvuuden varmistamisesta.

9.2 Sterilointiohjeet

Jatkovarret on irrotettava sovituspallosta tai mittapallosta ennen puhdistamista ja sterilointia.

Neljä sovituspalloa, yksi mittapallo ja jatkovarsi on asettava instrumenttitarjottimelle höyrysterilointia varten. Suoriteltu sterilointisykli on seuraavanlainen:

- Lämpötila: 132 °C (270 °F)
- Käsittelyaika: 4 minuuttia
- Sykli: esivakuumi
- Kuivausaika: vähintään 20 minuuttia

Käyttäjä on vastuussa minkä tahansa suositellusta sterilointimenetelmästä poikkeavan menetelmän soveltuvuuden varmistamisesta.

Corcym myöntää, että alla kuvattua sterilointijaksoa käytetään Euroopan sairaaloissa rutiininomaisesti ja

että se on validoitu monissa vastaavissa sydänläpän sovituspallojärjestelmissä ja kirurgisissa instrumenteissa.

Esivakuumi: sykli

Lämpötila: 134 °C (274 °F)

Käsittelyaika: 3 minuuttia

Kuivausaika: 20 minuuttia

HAART 201 -instrumenttisarjan osat eivät aiheuta merkittävää haastetta steriloinnille tämän laajasti validoidun prosessin avulla. Instrumentin materiaalit kestävät jopa 137 °C:n lämpötilaa.

9.3 Uudelleenkäyttö

Corcym on suorittanut HAART 201 -instrumenttisarjalle vähintään 50 sterilointi- ja käyttöjaksoa, eikä kulumisen merkkejä ole tässä ajassa havaittu.

Varotoimi: Sovituspallot, mittapallo ja jatkovarsi on tarkoitettu kestokäyttöisiksi, mutta tämä edellyttää, että ne tarkastetaan ennen jokaista käyttökertaa vaurioiden varalta. Sovituspallot ja mittapallo on tarkastettava silmämääräisesti polymeerimateriaalin naarmujen, murtumien tai rakenteellisten heikkouksien sekä lukukelvottomien merkintöjen varalta ennen jokaista käyttökertaa. Jatkovarsi on tarkastettava näkyvien murtumien tai rakenteellisten vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttökertaa sekä aina taivuttamisen jälkeen. Vaihda jokainen instrumentti, jossa ilmenee edellä mainittuja vikoja, sillä se ei välttämättä toimi enää kunnolla ja voi aiheuttaa vammoja potilaalle.

Takuiden vastuuvapautuslauseke

HAART 200 -aorta-annuloplastiarengas ja HAART 201 instrumenttisarja, jäljempänä ”tuote”, on valmistettu tarkoin kontrolloiduissa olosuhteissa, mutta Corcym ei voi kontrolloida tuotteen käyttöolosuhteita. Corcym ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”Corcym”) sanoutuvat irti kaikista tuotetta koskevista suorista ja epäsuorista takuista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat takuut, jotka koskevat kaupankäynnin kohteeksi soveltuvuutta tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Corcym ei vastaa yhdenkään yksilön tai yhteisön hoitokustannuksista tai mistään suorista, epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista, jotka ovat seurausta mistään tuotteen käytöstä, viasta, ongelmasta tai toimintahäiriöstä, riippumatta siitä, haetaanko korvauksia takuun, sopimuksen, vahingonkorvausvastuun tai muun syyn nojalla. Kukaan henkilö ei ole oikeutettu Corcym mihinkään edustukseen tai takuuseen tämän tuotteen osalta.

Edellä annettuja vastuunrajoituksia ja rajoituksia ei ole tarkoitettu voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten vastaisiksi, eikä niitä myöskään tule sellaisina pitää. Mikäli yksikään tämän Takuiden vastuuvapautuslausekkeen ja Vastuunrajoituksen osa tai ehto havaitaan toimivaltaisen oikeusistuimen toimesta lainvastaiseksi, toimeenpanokelvottomaksi tai sovellettavan lainsäädännön kanssa ristiriitaiseksi, tämä ei vaikuta Takuiden vastuuvapautuslausekkeen tai Vastuunrajoituksen jäljelle jäävän osan sitovuuteen, ja kaikkia oikeuksia ja velvollisuuksia tulkitaan ja toteutetaan aivan kuin tämä Takuiden vastuuvapautuslauseke ja Vastuunrajoitus eivät sisältäisikään pätemättömäksi katsottua osaa tai ehtoa.

Patentit

Patentit: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Mode d'emploi - Ensemble d'instruments HAART 201

Table des matières

1. Symboles d'étiquetage des instruments.....	52
2. Indications	52
3. Description	52
4. Avertissements	54
5. Précautions	54
6. Présentation	54
7. Instructions d'utilisation	55
8. Précision des calibreurs et de la bille de mesure	55
9. Nettoyage et stérilisation avant utilisation	55
Exclusion de garanties	57
Brevets	58
Figures.....	137

1. Symboles d'étiquetage des instruments



Fabricant



Non stérile



Code de lot



Numéro de catalogue



Représentant européen autorisé



Le produit est conforme aux exigences de
la directive 93/42/CEE relative aux appareils
médicaux



Consulter le mode d'emploi

2. Indications

L'ensemble d'instruments HAART 201 est destiné à être utilisé comme une aide à l'implantation du dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200.

3. Description

L'ensemble d'instruments HAART 201 comprend quatre (4) calibreurs, une (1) bille de mesure, et deux (2) poignées contenus dans un bac en acier inoxydable (Figure 1, page 137). L'ensemble d'instruments est utilisé pour sélectionner le dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200 adapté à un patient donné et pour

permettre l'évaluation de la coaptation des feuillets à la fin de la réparation totale de la valve aortique. L'ensemble d'instruments HAART 201 est réutilisable. Il doit toutefois être nettoyé et stérilisé en autoclave (vapeur) avant chaque utilisation. Voir les sections ci-dessous pour des informations détaillées sur l'utilisation et la stérilisation des accessoires.

3.1 Poignée

La poignée est en acier inoxydable ASTM A276, et nettoyée et passivée conformément à la spécification ASTM F86. La poignée peut être vissée dans les calibreurs, la bille de mesure et le support pour faciliter le positionnement pendant l'intervention (Figure 2, page 137). La poignée en acier inoxydable peut être pliée dans sa partie rétrécie afin de présenter les calibreurs, la bille de mesure et le dispositif sur le site opératoire de la façon souhaitée. La poignée est de conception et de fabrication similaire aux poignées fournies avec les prothèses valvulaires cardiaques de rechange et doit être utilisée de façon similaire.

3.2 Calibreurs

Les calibreurs sont en polyphénylsulfone. Chaque bille comporte un trou débouchant le long de son axe (Figure 3, page 138). Le haut du trou débouchant est fileté pour recevoir la poignée de l'instrument.

Une ligne au niveau de l'équateur et des régions pointillées de 15° de large, positionnées à 180° l'une de l'autre, sont marquées au laser sur les calibreurs afin d'aider l'utilisateur à évaluer la longueur du bord libre des feuillets. La taille du dispositif HAART 200 correspondant est clairement indiquée sur la surface supérieure de chaque calibreur.

3.3 Bille de mesure

La bille de mesure est en polyphénylsulfone et comporte un trou débouchant le long de son axe. Le haut du trou débouchant est fileté pour recevoir la poignée de l'instrument.

À la fin de la réparation des feuillets, la hauteur effective et la hauteur géométrique des feuillets peuvent être estimées à l'aide de la bille de mesure fournie avec l'ensemble d'instruments HAART 201. La surface de la bille de mesure comporte deux échelles verticales différentes marquées (Figure 4, page 139). Une échelle part du sommet de la bille et est destinée à estimer la hauteur effective du feuillet valvulaire. Pour la réussite de la réparation, la hauteur effective du feuillet doit être d'environ 8 à 10 mm. La seconde échelle peut être utilisée pour estimer les hauteurs géométriques des feuillets, le

cas échéant, pour une évaluation supplémentaire de la taille et de la symétrie des feuillets après la réparation valvulaire complète.

4. Avertissements

- Ne pas utiliser de calibreurs pour annuloplastie d'autres fabricants. Des calibreurs pour annuloplastie d'autres fabricants n'indiqueront pas forcément la bonne taille de dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200.
- La bonne détermination de la taille du dispositif d'annuloplastie est un élément important dans la réussite d'une réparation valvulaire. Un dispositif trop petit pourrait entraîner une sténose valvulaire ou une déhiscence de l'anneau. Un dispositif trop grand pourrait provoquer une régurgitation de la valve. La taille du dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200 est sélectionnée à l'aide des calibreurs conformément à l'utilisation prévue du dispositif. Utiliser uniquement les calibreurs HAART fournis dans l'ensemble d'instruments HAART 201 pour sélectionner un dispositif de taille adaptée.
- Utiliser uniquement la poignée HAART pour raccorder le support du dispositif, les calibreurs et la bille de mesure.
- Les calibreurs, la bille de mesure et la poignée sont fournis NON STÉRILES et doivent être nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation.
- Ce dispositif ne peut être utilisé que par des chirurgiens ayant reçu une formation en implantation de dispositifs et en techniques de calibrage HAART.
- L'ensemble d'instruments HAART 201 ne doit pas être utilisé avec des dispositifs autres que le dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200.
- Les calibreurs ou la bille de mesure HAART 201 ne doivent pas être nettoyés par ultrasons sous peine de fissurer les marquages et le matériau polymère.

5. Précautions

Les calibreurs et la bille de mesure doivent être examinés avant chaque utilisation pour déceler d'éventuelles craquelures du matériau polymère, des fissures, des signes de faiblesse structurelle ou des marquages illisibles.

La poignée doit être examinée avant chaque utilisation et après avoir été pliée pour déceler d'éventuelles craquelures ou signes de faiblesse structurelle. Remplacer tout instrument qui montre de tels signes car il pourrait ne pas fonctionner correctement et entraîner des blessures pour le patient.

6. Présentation

L'ensemble d'instruments HAART 201 est fourni NON STÉRILE dans un bac en acier inoxydable. Les

instruments sont propres mais NON STÉRILES.

Lors de la réception initiale de l'ensemble d'instruments, les retirer du matériel d'emballage et vérifier que les instruments n'ont pas été endommagés lors du transport. Les instruments doivent être visuellement inspectés, nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation.

Mettre au rebut tous les instruments endommagés ou dont les marquages sont illisibles.

Conserver l'ensemble d'instruments dans un environnement propre.

7. Instructions d'utilisation

L'ensemble d'instruments HAART 201 est destiné à être utilisé comme une aide à l'implantation du dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200. Voir les instructions d'utilisation du dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200.

8. Précision des calibreurs et de la bille de mesure

Les calibreurs servent de repère visuel pour sélectionner un dispositif de taille appropriée en fonction des longueurs du bord libre des feuillets de la valve aortique. Les diamètres des tailles sont précis à $\pm 0,254$ mm de la taille spécifiée.

La bille de mesure est uniquement une référence et une aide visuelle pour évaluer la hauteur effective et la longueur géométrique des feuillets après la réparation des feuillets. Les échelles sur la bille de mesure sont précises à $\pm 0,2$ mm près entre les marques adjacentes.

9. Nettoyage et stérilisation avant utilisation

Avertissement: l'ensemble d'instruments HAART 201 est fourni NON STÉRILE et doit être soigneusement nettoyé et stérilisé avant chaque utilisation.

9.1 Instructions de nettoyage

La poignée doit être retirée du calibreur ou de la bille de mesure avant le nettoyage.

Remarque : si le transport des instruments vers la zone de traitement doit être retardé, les placer dans un conteneur fermé contenant un détergent adapté (p. ex. détergent enzymatique Enzol ou équivalent) afin de retarder le séchage.

Dans un délai maximal de 2 heures suivant l'utilisation, éliminer le plus de souillure possible en rinçant à l'eau froide du robinet (25 à 30 °C) puis faire tremper 1 minute dans 15 g de détergent enzymatique (p. ex. détergent enzymatique Enzol) dilué dans 1 litre d'eau. Plonger les instruments

dans un conteneur rempli de 15 g d'un nettoyant adapté (p. ex. Enzol) dilué dans 1 litre d'eau du robinet (15 à 30 °C) pendant au moins deux (2) minutes. À l'aide d'une brosse, nettoyer la zone filetée des calibreurs et des billes de mesure pendant 15 à 20 secondes afin d'éliminer toute trace de souillure incrustée.

Rincer à l'eau du robinet (20 à 35 °C) jusqu'à ne plus voir aucune trace de la solution nettoyante. Inspecter visuellement pour détecter des restes éventuels de souillure et répéter le processus le cas échéant. Sécher avec un chiffon doux et passer à l'étape du nettoyage.

Nettoyer l'instrument dans un appareil de lavage automatique en appliquant les paramètres suivants :

Paramètres de nettoyage automatique

Étape du processus	Durée (mm:ss)	Température (°C)	Nettoyant
Nettoyage enzymatique	04:00	Eau du robinet chaude	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/litre
Nettoyage	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/litre
Rinçage	02:00	70	S/O
Séchage	15:00	Basse	S/O

Inspecter visuellement chaque instrument pour détecter des restes éventuels de souillure et d'humidité. Si l'instrument est toujours souillé, répéter le processus de nettoyage. Si l'instrument est humide, utiliser de l'air comprimé ou un chiffon non pelucheux pour le sécher.

Avertissement: les calibreurs ne doivent pas être nettoyés par ultrasons sous peine de fissurer les marquages et le matériau polymère.

L'utilisateur est responsable de la qualification de tout écart par rapport à la méthode de nettoyage recommandée.

9.2 Instructions de stérilisation

Les poignées doivent être retirées du calibreur ou de la bille de mesure avant le nettoyage et la stérilisation.

Les quatre calibreurs, la bille de mesure et les poignées doivent être placés dans le bac d'instruments pour une stérilisation à la vapeur. Le cycle de stérilisation suivant est recommandé :

Température: 132 °C (270 °F)

Temps d'arrêt: 4 minutes

Cycle: pré-vide

Temps de séchage: 20 minutes minimum

L'utilisateur est responsable de la qualification de tout écart par rapport à la méthode de stérilisation recommandée.

Corcym reconnaît que le cycle de stérilisation décrit ci-dessous est couramment utilisé par les hôpitaux européens et a été validé pour de nombreux systèmes de calibrage de valves cardiaques et instruments chirurgicaux similaires.

Pré-vide: cycle

Température: 134 °C (274 °F)

Temps d'arrêt: 3 minutes

Temps de séchage: 20 minutes

Les composants de l'ensemble d'instruments HAART 201 ne présentent pas de problème particulier pour la stérilisation à l'aide de ce procédé largement validé. Les matériaux des instruments peuvent résister à des températures allant jusqu'à 137 °C.

9.3 Réutilisation

Corcym a effectué au moins 50 cycles de stérilisation et d'utilisation sur l'ensemble d'instruments HAART 201 sans qu'aucun signe d'usure ne soit observé.

Attention: les calibreurs, la bille de mesure et la poignée peuvent être réutilisés à condition qu'ils soient examinés avant chaque utilisation afin de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Les calibreurs et la bille de mesure doivent être examinés avant chaque utilisation pour détecter d'éventuelles craquelures du matériau polymère, des fissures, des signes de faiblesse structurelle ou des marquages illisibles. La poignée doit être examinée avant chaque utilisation et après avoir été pliée pour détecter d'éventuelles craquelures ou signes de faiblesse structurelle. Remplacer tout instrument qui montre de tels signes car il pourrait ne pas fonctionner correctement et entraîner des blessures pour le patient.

Exclusion de garanties

Bien que le dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200 et l'ensemble d'instruments HAART 201, ci-après désignés comme le « produit », aient été fabriqués dans des conditions strictement contrôlées, Corcym n'a aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles ce produit est utilisé. Corcym et ses sociétés affiliées (collectivement, « Corcym ») déclinent toute garantie, explicite ou implicite, à l'égard du produit, notamment, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou

d'adaptation à un usage particulier. Corcym ne sera pas tenu responsable vis-à-vis de toute personne ou entité pour toute dépense médicale ou tout dommage direct, accessoire ou consécutif découlant de l'utilisation, du défaut, de la défaillance ou du dysfonctionnement du produit, que la demande de réparation soit basée sur une garantie ou qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre. Corcym ne fait aucune déclaration ni de donner aucune garantie à l'égard de ce produit.

Les exclusions et limitations décrites ci-avant ne peuvent en aucun cas aller à l'encontre des obligations prévues par la loi applicable, et ne doivent pas être interprétées en ce sens. Si toute partie ou disposition de cette Exclusion de garantie et Limitation de responsabilité est jugée par tout tribunal compétent comme étant illégale, inapplicable ou en conflit avec la loi applicable, la validité des autres dispositions de l'Exclusion de garantie et de la Limitation de responsabilité ne sera pas affectée, et tous les droits et obligations seront interprétés et appliqués comme si l'Exclusion de garantie et la Limitation de responsabilité ne contenaient pas la partie ou la disposition réputée invalide.

Brevets

Brevets: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Gebrauchsanweisung - Aorten anuloplastie-Instrumentensatz HAART 201

Inhaltsverzeichnis

1. Symbole auf der Instrumentenkennzeichnung	59
2. Indikationen	59
3. Beschreibung	59
4. Warnungen	61
6. Lieferform	62
7. Anwendungsanleitung	62
8. Erklärung zur Genauigkeit von Sizern und Messkugel	62
9. Reinigung und Sterilisation vor Gebrauch	62
Gewährleistungserklärung	64
Patents	65
Abbildungen.....	137

1. Symbole auf der Instrumentenkennzeichnung



Hersteller



Unsteril



Chargencode



Katalog-Nr.



Autorisierte EU-Vertretung



Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie
93/42/EWG für medizinische Produkte



Siehe Gebrauchsanweisung

2. Indikationen

Der Instrumentensatz HAART 201 ist als Hilfsmittel für das Einsetzen des Aorten anuloplastie-Implantats HAART 200 vorgesehen.

3. Beschreibung

The HAART 201 Instrument Set consists of four (4) Sizers, Der Instrumentensatz HAART 201 besteht aus vier (4) Sizern, einer (1) Messkugel und zwei (2) Griffen, die in einem Edelstahlkasten geliefert werden (Abbildung 1 auf Seite 137). Der Instrumentensatz ist dafür vorgesehen, die richtige Größe des Aorten anuloplastie-Implantats HAART

200 für einen vorgegebenen Patienten zu bestimmen und die Bewertung der Taschenkoaptation nach Fertigstellung der Gesamtreparatur der Aortenklappe zu unterstützen. Der Instrumentensatz HAART 201 ist wiederverwendbar. Er muss jedoch vor jedem Gebrauch durch Dampfsterilisation gereinigt und sterilisiert werden. Siehe die folgenden Abschnitte für genaue Informationen zur Verwendung des Zubehörs und zur Sterilisation.

3.1 Griff

Der Griff besteht aus ASTM A276-Edelstahl und wurde gemäß ASTM-Spezifikation F86 gereinigt und passiviert. Der Griff kann in die Sizer, die Messkugel und die Haltevorrichtung geschraubt werden, um die Platzierung während des Eingriffs zu vereinfachen (Abbildung 2 auf Seite 137). Der Edelstahlgriff lässt sich im dünnen Abschnitt biegen, um die Sizer, die Messkugel und das Implantat auf die gewünschte Weise vor die Eingriffsstelle zu halten. Der Griff ähnelt in erheblichem Maße der Konstruktion und Fertigung von Griffen, die beim Ersatz von Herzklappenprothesen verwendet werden und wird in gleicher Weise verwendet.

3.2 Sizer

Die Sizer sind aus Polyphenylsulfon gefertigt. Jede Kugel hat eine durchgängige Öffnung, die entlang der Achse verläuft (Abbildung 3 auf Seite 138). Die durchgängige Öffnung ist oben mit einem Gewinde versehen, in das der Instrumentengriff geschraubt wird.

Die Sizer verfügen über eine mittels Laser angebrachte Markierungslinie am Äquator und 15° breite punktierte Bereiche, die um 180° versetzt angeordnet sind, um dem Anwender bei der Messung der Länge der freien Taschenseiten zu unterstützen. Die Größe des richtigen HAART 200-Implantats ist oben auf den Sizern deutlich angegeben.

3.3 Messkugel

Die Messkugel besteht aus Polyphenylsulfon und hat eine durchgängige Öffnung, die entlang der Achse verläuft. Die durchgängige Öffnung ist oben mit einem Gewinde versehen, in das der Instrumentengriff geschraubt wird.

Nach Fertigstellung der Taschenreparatur kann die effektive Höhe und geometrische Taschenhöhe mithilfe der Messkugel bestimmt werden, die im Lieferumfang des Instrumentensatzes HAART 201 enthalten ist. Die Messkugel ist mit zwei vertikalen Skalen versehen, die mit Laser auf die Oberfläche eingraviert wurden (Abbildung 4 auf Seite 139). Eine der Skalen entspringt dem Apex der Kugel und ist für die Schätzung der effektiven Höhe der

Klappentasche vorgesehen. Für eine erfolgreiche Reparatur sollte die effektive Höhe der Tasche 8 bis 10 mm betragen. Mit der zweiten Skala kann die geometrische Taschenhöhe bestimmt werden, und, falls gewünscht, die Taschengröße und Symmetrie nach der Gesamtklappenreparatur weiter untersucht werden.

4. Warnungen

- Verwenden Sie keine Anuloplastie-Sizer anderer Hersteller. Mit anderen Anuloplastie-Sizern kann unter Umständen nicht die richtige Größe des HAART 200 Aorten anuloplastie-Implantats bestimmt werden.
- Die richtige Bemessung des Anuloplastie-Implantats ist von erheblicher Bedeutung für eine erfolgreiche Klappenreparatur. Eine zu kleine Größe kann zu Klappenstenose oder Ringdehiszenz führen. Eine zu große Größe kann zu Klappenregurgitation führen. Die Größe des Aorten anuloplastie-Implantats HAART 200 wird mithilfe von Sizern gewählt, die mit dem Konstruktionszweck des Implantats konsistent sind. Verwenden Sie nur HAART-Sizer, die im Instrumentensatz HAART 201 enthalten sind, um die richtige Implantatgröße zu bestimmen.
- Verwenden Sie nur den HAART-Griff für die Implantat-Haltevorrichtung, den Sizer und die Messkugel.
- Die Sizer, die Messkugel und der Griff werden UNSTERIL geliefert und müssen vor jedem Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.
- Nur Chirurgen, die in HAART-Techniken zum Einsetzen von Implantaten und Messverfahren geschult sind, dürfen dieses Implantat verwenden.
- Der Instrumentensatz HAART 201 ist nicht für die Verwendung mit anderen Implantaten, sondern nur mit dem Aorten anuloplastie-Implantat-HAART 200 vorgesehen.
- HAART 201-Sizer und die Messkugel sollten nicht mit Ultraschall gereinigt werden, da dies zu Rissen im Polymermaterial und den Markierungen führen könnte.

5. Vorsichtsmaßnahmen

Die Sizer und die Messkugel sind vor Gebrauch visuell auf Haarrisse des Polymermaterials, auf weitere Risse und Hinweise auf strukturelle Schwäche oder unlesbare Markierungen zu untersuchen.

Der Griff ist vor jedem Gebrauch und nach dem Biegen auf sichtbare Risse oder Anzeichen auf strukturelle Schwäche zu untersuchen. Ersetzen Sie Instrumente, die diese Fehler aufweisen, da sie nicht einwandfrei funktionieren und Verletzungen des Patienten verursachen könnten.

6. Lieferform

Der Instrumentensatz HAART 201 wird UNSTERIL in einem Edelstahlkasten geliefert. Die Instrumente werden sauber, aber UNSTERIL geliefert.

Entfernen Sie nach Erhalt des Instrumentensatzes alle Verpackungsmaterialien und untersuchen Sie die Instrumente sorgfältig auf Transportschäden. Die Instrumente müssen vor jedem Gebrauch visuell überprüft, gereinigt und sterilisiert werden.

Entsorgen Sie Instrumente, die Anzeichen von Beschädigung oder unleserliche Markierungen aufweisen.

Bewahren Sie das Instrument in einer sauberen Umgebung auf.

7. Anwendungsanleitung

Der Instrumentensatz HAART 201 ist als Hilfsmittel für das Einsetzen des Aortenanuloplastie-Implantats HAART 200 vorgesehen. Siehe die Anwendungsanleitung zum Aortenanuloplastie-Implantat HAART 200.

8. Erklärung zur Genauigkeit von Sizer und Messkugel

Sizer dienen als visuelle Messhilfe für die Wahl einer geeigneten Implantatgröße. Hierfür wird die Länge der freien Taschenseiten der Aortenklappe herangezogen. Größendurchmesser entsprechen bis auf $\pm 0,254$ mm der angegebenen Größe.

Die Messkugel dient bei der Bestimmung der effektiven Höhe der Taschen und der geometrischen Taschenlängen nach einer Taschenreparatur nur als Referenz und visuelle Hilfe. Die Skalen auf der Messkugel sind bis auf $\pm 0,2$ mm zwischen benachbarten Markierungen genau.

9. Reinigung und Sterilisation vor Gebrauch

Warnung: Der Instrumentensatz HAART 201 wird UNSTERIL geliefert und muss vor Gebrauch gründlich gereinigt und sterilisiert werden.

9.1 Reinigungsanweisungen

Der Griff sollte vor der Reinigung vom Sizer bzw. der Messkugel entfernt werden.

Hinweis: Wenn absehbar ist, dass sich der Transport der Instrumente zum Verarbeitungsbereich verzögern wird, müssen die Instrumente in einen abgedeckten Behälter mit geeignetem Reinigungsmittel (z. B. Enzol-Enzymreiniger oder Ähnlichem) gelegt werden, um das Trocknen zu verzögern.

Entfernen Sie Schmutzreste maximal 2 Stunden nach Gebrauch unter fließendem kaltem (25 bis 30 °C) Wasser und tauchen Sie sie 1 Minute lang in Enzymreiniger ein (z. B. Enzol-Enzymreiniger), der mit 15 g pro Liter Wasser hergestellt wurde. Tauchen Sie die Geräte mindestens zwei (2) Minuten in einen Behälter mit einer geeigneten Reinigungslösung (z. B. Enzol), die mit 15 g pro Liter Wasser Leitungswasser (15 bis 30 °C) hergestellt wurde. Reinigen Sie den Gewindebereich der Sizer und der Messkugeln 15 bis 20 Sekunden lang, um die Entfernung von Schmutzresten sicherzustellen.

Spülen Sie ihn unter fließendem Leitungswasser (20 bis 35 °C), bis keine Spuren der Reinigungslösung mehr sichtbar sind. Führen Sie eine Sichtprüfung auf Schmutzreste durch und wiederholen Sie den Vorgang ggf. Verwenden Sie zum Trocknen ein weiches Tuch und transportieren Sie das Implantat zum Reinigungsschritt.

Reinigen Sie das Instrument mit folgenden Parametern in einem automatischen Waschgerät:

Parameter für die automatische Reinigung

Prozess-schritt	Zeit (mm:ss)	Temp (C)	Reinigungsmittel
Enzymatische Waschung	04:00	Heißes Leitungswasser	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/Liter
Waschen	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/Liter
Spülen	02:00	70	n. z.
Trocknen	15:00	Niedrig	n. z.

Untersuchen Sie jedes Instrument per Sichtprüfung auf Schmutz- und Feuchtigkeitsreste. Wiederholen Sie die Reinigung, wenn noch Schmutzreste vorhanden sind. Trocknen Sie etwaige nasse Instrumente mit Druckluft oder einem fusselfreien Tuch.

Warnung: Sizer sollten nicht mit Ultraschall gereinigt werden, da dies zu Rissen im Polymermaterial und den Markierungen führen könnte.

Der Anwender ist bei Abweichungen von der empfohlenen Reinigungsmethode für deren Eignung verantwortlich.

9.2 Sterilisationsanweisungen

Die Griffe sind vor der Reinigung und Sterilisation vom Sizer bzw. der Messkugel abzunehmen.

Die vier Sizer, die einzelne Messkugel und der Griff müssen für die Dampfsterilisation in den Instrumentenkasten gelegt werden. Empfohlener Sterilisationszyklus:

Temperatur: 132 °C (270 °F)

Sterilisationsdauer: 4 Minuten

Zyklus: Vorvakuum

Trocknungszeit: Mindestens 20 Minuten

Der Anwender ist bei Abweichungen von der empfohlenen Sterilisationsmethode für deren Eignung verantwortlich.

Corcym erkennt an, dass der unten beschriebene Sterilisationszyklus in europäischen Krankenhäusern routinemäßig angewendet wird und für viele ähnliche Herzklappen-Sizer-Systeme und chirurgische Instrumente validiert wurde.

Vorvakuum: Zyklus

Temperatur: 134 °C (274 °F)

Sterilisationsdauer: 3 Minuten

Trocknungszeit: 20 Minuten

Die Komponenten des Instrumentensatzes HAART 201 stellen für die Sterilisation nach diesem weitgehend validierten Verfahren keine wesentliche Herausforderung dar. Die Materialien der Instrumente können Temperaturen bis zu 137 °C standhalten.

9.3 Wiederverwendung

Corcym hat den Instrumentensatz HAART 201 mindestens 50 Sterilisations- und Verwendungszyklen unterzogen, ohne dass sich Anzeichen für Verschleiß zeigten.

Vorsicht: Die Sizer, die Messkugel und der Griff können mehrmals eingesetzt werden, solange sie vor Gebrauch auf Anzeichen für Schäden untersucht werden. Die Sizer und die Messkugel sind vor Gebrauch visuell auf Haarrisse des Polymermaterials, auf weitere Risse und Hinweise auf strukturelle Schwäche oder unlesbare Markierungen zu untersuchen. Der Griff ist vor jedem Gebrauch und nach dem Biegen auf sichtbare Risse oder Anzeichen auf strukturelle Schwäche zu untersuchen. Ersetzen Sie Instrumente, die diese Fehler aufweisen, da sie nicht einwandfrei funktionieren und Verletzungen des Patienten verursachen könnten.

Gewährleistungserklärung

Obwohl das Aortenanuloplastie-Implantat HAART 200 und der Instrumentensatz HAART 201, nachfolgend

als das Produkt bezeichnet, unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen hergestellt wurden, liegen die Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, nicht in der Hand von Corcym. Daher übernehmen Corcym und seine Töchter (gemeinsam „Corcym“) keinerlei implizite und ausdrückliche Haftung für u. a. die Marktgängigkeit oder Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck. Corcym haftet gegenüber Personen oder Entitäten nicht für medizinische Auslagen oder direkte, versehentliche oder Folgeschäden durch Verwendung, Defekte, Versagen oder Fehlfunktion des Produkts, unabhängig davon, ob derartige Ansprüche auf Gewährleistung, auf vertragsrechtlichen Ansprüchen, auf unerlaubter Handlung oder anderem beruhen. Niemand hat die Befugnis, Corcym an eine Bestimmung oder Garantie in Bezug auf das Produkt zu binden.

Die genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen sind nicht dazu vorgesehen, gegen geltendes Recht zu verstoßen und dürfen nicht so ausgelegt werden. Sollten Bedingungen dieser Gewährleistungserklärung und die Haftungsbegrenzung gemäß lokalem Recht unwirksam, illegal oder in Konflikt mit der Gesetzgebung sein, ist die Gültigkeit der anderen Teile der Gewährleistungserklärung und Haftungsbegrenzung nicht betroffen, und alle Rechte und Pflichten müssen gemäß der Gewährleistungserklärung und der Haftungsbegrenzung so ausgelegt und durchgesetzt werden, als wäre der bestimmte Teil oder die Bedingung nicht enthalten.

Patents

Patents: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Οδηγίες χρήσης - Σετ οργάνων HAART 201

Πίνακας περιεχομένων

1. Σύμβολα σήμανσης οργάνου	66
2. Ενδείξεις	66
3. Περιγραφή	66
4. Προειδοποιήσεις	68
5. Προφυλάξεις	69
6. Τρόπος διάθεσης	69
7. Οδηγίες χρήσης.....	69
8. Δήλωση ακρίβειας για τον οδηγό μεγέθους και τη σφαίρα διαμετρήματος	69
9. Καθαρισμός και αποστείρωση πριν από τη χρήση...70	
Αποποίηση εγγυήσεων	72
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας	73
Εικόνες	137

1. Σύμβολα σήμανσης οργάνου



Κατασκευαστής



Μη αποστειρωμένο



Κωδικός παρτίδας



Αριθμός καταλόγου



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
στην Ευρώπη



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων



Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες
χρήσης

2. Ενδείξεις

Το σετ οργάνων HAART 201 προορίζεται για χρήση
ως βοήθημα στην εμφύτευση της συσκευής αορτικής
δακτυλιοπλαστικής HAART 200.

3. Περιγραφή

Το σετ οργάνων HAART 201 αποτελείται από τέσσερις
(4) οδηγούς μεγέθους, μία (1) σφαίρα διαμετρήματος και
δύο (2) λαβές και παρέχεται σε δίσκο από ανοξείδωτο
ατσάλι (Εικόνα 1 στη σελίδα 137). Το σετ οργάνων
χρησιμοποιείται για την επιλογή του κατάλληλου
μεγέθους συσκευής αορτικής δακτυλιοπλαστικής

HAART 200 για τον εκάστοτε ασθενή και ως βοήθημα για την αξιολόγηση της σύγκλεισης των γλωχίνων με την ολοκλήρωση της συνολικής επιδιόρθωσης της αορτικής βαλβίδας. Το σετ οργάνων HAART 201 είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Ωστόσο, πρέπει να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο (ατμό) πριν από κάθε χρήση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποστείρωση των παρελκομένων, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

3.1 Λαβή

Η λαβή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου ASTM A276 και έχει καθαριστεί και αδρανοποιηθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή F86 της ASTM. Η λαβή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στους οδηγούς μεγέθους, στη σφαίρα διαμετρήματος και στη βάση στήριξης για ευκολότερη τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (Εικόνα 2 στη σελίδα 137). Η λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι μπορεί να καμφθεί στο στενότερο τμήμα της, έτσι ώστε οι οδηγοί μεγέθους, η σφαίρα διαμετρήματος και η συσκευή να προσπελάσουν το χειρουργικό πεδίο με τον επιθυμητό τρόπο. Η σχεδίαση και ο τρόπος κατασκευής της λαβής είναι παρόμοια με τις λαβές που παρέχονται με τις προσθέσεις αντικατάστασης καρδιακών βαλβίδων και η λαβή προορίζεται για παρόμοια χρήση.

3.2 Οδηγοί μεγέθους

Οι οδηγοί μεγέθους είναι κατασκευασμένοι από πολυφαινυλσουλφόνη. Κάθε σφαίρα έχει μια διαμπερή οπή κατά μήκος του άξονά της (Εικόνα 3 στη σελίδα 138). Το επάνω άκρο της διαμπερούς οπής είναι σπειροειδές και αποτελεί την υποδοχή της λαβής του οργάνου.

Οι οδηγοί μεγέθους έχουν μια χαραγμένη με λείζερ γραμμή στο επίπεδο του ισημερινού και διάστικτες περιοχές πλάτους 15°, σε απόσταση 180° μεταξύ τους, οι οποίες βοηθούν τον χρήστη κατά την εκτίμηση του μήκους του ελεύθερου άκρου των γλωχίνων. Το μέγεθος της αντίστοιχης συσκευής HAART 200 διακρίνεται καθαρά στην επάνω επιφάνεια κάθε οδηγού μεγέθους.

3.3 Σφαίρα διαμετρήματος

Η σφαίρα διαμετρήματος είναι κατασκευασμένη από πολυφαινυλσουλφόνη και έχει μια διαμπερή οπή κατά μήκος του άξονά της. Το επάνω άκρο της διαμπερούς οπής είναι σπειροειδές και αποτελεί την υποδοχή της λαβής του οργάνου.

Αφού ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση των γλωχίνων, πρέπει να γίνει εκτίμηση του ωφέλιμου ύψους των γλωχίνων και του γεωμετρικού ύψους αυτών χρησιμοποιώντας τη σφαίρα διαμετρήματος που παρέχεται στο σετ

οργάνων HAART 201. Η σφαίρα διαμετρήματος έχει δύο διαφορετικές κάθετες κλίμακες χαραγμένες στην επιφάνειά της (Εικόνα 4 στη σελίδα 139). Η μία κλίμακα ξεκινά από την κορυφή της σφαίρας και προορίζεται για την εκτίμηση του ωφέλιμου ύψους της γλωχίνας της βαλβίδας. Για μια επιτυχή επιδιόρθωση, το ωφέλιμο ύψος των γλωχίνων πρέπει να είναι περίπου 8 έως 10 mm. Η δεύτερη κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του γεωμετρικού ύψους των γλωχίνων, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την περαιτέρω αξιολόγηση του μεγέθους και της συμμετρίας των γλωχίνων μετά τη συνολική επιδιόρθωση της βαλβίδας.

4. Προειδοποιήσεις

- Μην χρησιμοποιείτε οδηγούς μεγέθους δακτυλιοπλαστικής άλλων κατασκευαστών. Οι οδηγοί μεγέθους άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην υποδείξουν το κατάλληλο μέγεθος συσκευής αορτικής δακτυλιοπλαστικής HAART 200.
- Η επιλογή του σωστού μεγέθους της συσκευής δακτυλιοπλαστικής αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή επιδιόρθωση βαλβίδας. Η χρήση πολύ μικρότερου μεγέθους μπορεί να οδηγήσει σε στένωση της βαλβίδας ή διάνοιξη του δακτυλίου. Η χρήση μεγαλύτερου μεγέθους μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση της βαλβίδας. Το μέγεθος της συσκευής αορτικής δακτυλιοπλαστικής HAART 200 επιλέγεται με χρήση οδηγών μεγέθους σύμφωνα με τη σχεδίαση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε μόνο τους οδηγούς μεγέθους HAART που περιλαμβάνονται στο σετ οργάνων HAART 201 για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη λαβή HAART για τη σύνδεση με τη βάση στήριξης της συσκευής, τους οδηγούς μεγέθους και τη σφαίρα διαμετρήματος.
- Οι οδηγοί μεγέθους, η σφαίρα διαμετρήματος και η λαβή παρέχονται ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ και πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται πριν από κάθε χρήση.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από χειρουργούς εκπαιδευμένους στις τεχνικές εμφύτευσης συσκευών HAART και εκτίμησης μεγέθους.
- Το σετ οργάνων HAART 201 δεν προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με άλλες συσκευές εκτός της συσκευής αορτικής δακτυλιοπλαστικής HAART 200.
- Οι οδηγοί μεγέθους και η σφαίρα διαμετρήματος του συστήματος HAART 201 δεν πρέπει να καθαρίζονται με υπερήχους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των πολυμερών υλικών και των ενδείξεων.

5. Προφυλάξεις

Οι οδηγοί μεγέθους και η σφαίρα διαμετρήματος πρέπει να ελέγχονται οπτικά για τυχόν διάβρωση των πολυμερών υλικών, ρωγμές και σημεία δομικής αδυναμίας ή μη αναγνωρίσιμες ενδείξεις πριν από κάθε χρήση.

Η λαβή πρέπει να ελέγχεται για ορατές ρωγμές ή σημεία δομικής αδυναμίας πριν από κάθε χρήση και έπειτα από κάθε κάμψη. Αντικαταστήστε τα όργανα που παρουσιάζουν τα παραπάνω ελαττώματα, καθώς ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και να προκαλέσουν τραυματισμό του ασθενούς.

6. Τρόπος διάθεσης

Το σετ οργάνων HAART 201 παρέχεται ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ σε δίσκο από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα όργανα παρέχονται καθαρά, αλλά ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.

Μετά την παραλαβή του σετ οργάνων, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και εξετάστε προσεκτικά όλα τα όργανα για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά την αποστολή. Τα όργανα πρέπει να ελέγχονται οπτικά, να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται πριν από κάθε χρήση.

Απορρίψτε τα όργανα που εμφανίζουν σημάδια ζημιάς ή δυσανάγνωστες ενδείξεις.

Φυλάσσετε το σετ οργάνων σε καθαρό περιβάλλον.

7. Οδηγίες χρήσης

Το σετ οργάνων HAART 201 προορίζεται για χρήση ως βοήθημα στην εμφύτευση της συσκευής αορτικής δακτυλιοπλαστικής HAART 200. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης της συσκευής αορτικής δακτυλιοπλαστικής HAART 200.

8. Δήλωση ακρίβειας για τον οδηγό μεγέθους και τη σφαίρα διαμετρήματος

Οι οδηγοί μεγέθους λειτουργούν ως ένα εργαλείο οπτικής μέτρησης για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους συσκευής με βάση το μήκος των ελεύθερων άκρων των γλωχίνων της αορτικής βαλβίδας. Οι διάμετροι των μεγεθών παρουσιάζουν ακρίβεια της τάξης των $\pm 0,254$ mm ως προς το καθοριζόμενο μέγεθος.

Η σφαίρα διαμετρήματος προορίζεται μόνο ως εργαλείο αναφοράς και οπτικό βοήθημα για την εκτίμηση του ωφέλιμου ύψους και του γεωμετρικού μήκους των γλωχίνων μετά την επιδιόρθωση της βαλβίδας. Οι κλίμακες στη σφαίρα διαμετρήματος παρουσιάζουν ακρίβεια της τάξης των $\pm 0,2$ mm μεταξύ παρακείμενων ενδείξεων.

9. Καθαρισμός και αποστείρωση πριν από τη χρήση

Προειδοποίηση: Το σετ οργάνων HAART 201 παρέχεται ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ και πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά και να αποστειρώνεται πριν από τη χρήση.

9.1 Οδηγίες καθαρισμού

Η λαβή πρέπει να αφαιρεθεί από τον οδηγό μεγέθους και τη σφαίρα διαμετρήματος πριν τον καθαρισμό.

Σημείωση: Εάν η μεταφορά των οργάνων στο σημείο επεξεργασίας πρόκειται να καθυστερήσει, τοποθετήστε τα όργανα σε ένα καλυμμένο δοχείο με κατάλληλο απορρυπαντικό (π.χ. Enzol Enzymatic Detergent ή αντίστοιχο).

Το αργότερο 2 ώρες μετά τη χρήση, απομακρύνετε τους εμφανείς ρύπους ξεπλένοντας με κρύο τρεχούμενο νερό βρύσης (25 έως 30 °C) και βυθίστε για 1 λεπτό σε ενζυμικό απορρυπαντικό (π.χ. Enzol Enzymatic Detergent) σε αναλογία 15 g ανά 1 λίτρο (επιβεβαιωμένη προσπέλαση). Βυθίστε τα όργανα σε δοχείο με κατάλληλο απορρυπαντικό (π.χ. Enzol), παρασκευασμένο σε αναλογία 15 g προς 1 λίτρο νερού βρύσης (15 έως 30 °C) για τουλάχιστον δύο (2) λεπτά. Χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με φυσική τρίχα, καθαρίστε το σπειροειδές τμήμα των οδηγών μεγέθους και της σφαίρας διαμετρήματος για 15 έως 20 δευτερόλεπτα ώστε να απομακρυνθούν οι συσσωρευμένοι ρύποι.

Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό βρύσης (20° έως 35 °C) μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα εμφανή ίχνη καθαριστικού διαλύματος. Ελέγξτε οπτικά για τυχόν υπολείμματα βρωμιάς και επαναλάβετε τη διαδικασία εφόσον απαιτείται. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για τη μεταφορά του οργάνου στο σημείο καθαρισμού.

Καθαρίστε το όργανο σε αυτόματο πλυντήριο ιατρικών εργαλείων με τις ακόλουθες παραμέτρους:

Παράμετροι αυτόματου καθαρισμού

Βήμα διαδικασίας	Χρόνος (mm:ss)	Θερμοκρασία (C)	αθαρυστικό
Ενζυμική πλύση	04:00	Ζεστό νερό βρύσης	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/λίτρο
Πλύση	2:00 πμ	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/λίτρο
Ξέπλυμα	2:00 πμ	70	Δ/Ε
Στέγνωμα	3:00 μμ	Χαμηλή	Δ/Ε

Ελέγξτε οπτικά κάθε όργανο για τυχόν υπολείμματα βρωμιάς και υγρασίας. Εάν υπάρχουν υπολείμματα βρωμιάς, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού. Εάν τα όργανα είναι βρεγμένα, χρησιμοποιήστε φιλτραρισμένο πεπιεσμένο αέρα ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι για να τα στεγνώσετε.

Προειδοποίηση: Οι οδηγοί μεγέθους δεν πρέπει να καθαρίζονται με υπερήχους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των πολυμερών υλικών και των ενδείξεων.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα οποιασδήποτε άλλης μεθόδου καθαρισμού πέραν της συνιστώμενης.

9.2 Οδηγίες αποστείρωσης

Οι λαβές πρέπει να αφαιρεθούν από τον οδηγό μεγέθους και τη σφαίρα διαμετρήματος πριν τον καθαρισμό και την αποστείρωση.

Οι τέσσερις οδηγοί μεγέθους, η σφαίρα διαμετρήματος και οι λαβές πρέπει να τοποθετούνται στον δίσκο οργάνων προκειμένου να αποστειρωθούν με ατμό. Συνιστάται ο ακόλουθος κύκλος αποστείρωσης:

Θερμοκρασία: 132 °C (270 °F)

Χρόνος παραμονής: 4 λεπτά

Κύκλος: Προ-κενό

Χρόνος στεγνώματος: 20 λεπτά τουλάχιστον

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα οποιασδήποτε άλλης μεθόδου αποστείρωσης πέραν της συνιστώμενης.

Η Corcym αναγνωρίζει ότι ο κύκλος αποστείρωσης που περιγράφεται παρακάτω χρησιμοποιείται συστηματικά από τα ευρωπαϊκά νοσοκομεία και έχει επικυρωθεί για πολλά παρόμοια συστήματα μέτρησης καρδιακών βαλβίδων και χειρουργικά εργαλεία.

Προ-κενό: κύκλος

Θερμοκρασία: 134°C (274 °F)

Χρόνος παραμονής: 3 λεπτά

Χρόνος στεγνώματος: 20 λεπτά

Τα στοιχεία του σετ οργάνων HAART 201 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αποστείρωση όταν χρησιμοποιείται αυτή η ευρέως επικυρωμένη διαδικασία. Τα υλικά του οργάνου μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως 137°C.

9.3 Επαναχρησιμοποίηση

Η Corcym έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 κύκλους αποστείρωσης και χρήσης στο σετ οργάνων HAART 201 χωρίς να παρατηρηθούν σημεία φθοράς.

Προσοχή: Οι οδηγοί μεγέθους, η σφαίρα διαμετρήματος και η λαβή προορίζονται για πολλαπλές χρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ελέγχονται πριν από κάθε χρήση για τυχόν σημεία φθοράς. Οι οδηγοί μεγέθους και η σφαίρα διαμετρήματος πρέπει να ελέγχονται οπτικά για τυχόν διάβρωση των πολυμερών υλικών, ρωγμές και σημεία δομικής αδυναμίας ή μη αναγνωρίσιμες ενδείξεις πριν από κάθε χρήση. Η λαβή πρέπει να ελέγχεται για ορατές ρωγμές ή σημεία δομικής αδυναμίας πριν από κάθε χρήση και έπειτα από κάθε κάμψη. Αντικαταστήστε τα όργανα που παρουσιάζουν τα παραπάνω ελαττώματα, καθώς ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και να προκαλέσουν τραυματισμό του ασθενούς.

Αποποίηση εγγυήσεων

Η συσκευή αορτικής δακτυλιοπλαστικής HAART 200 και το σετ οργάνων HAART 201, εφεξής αναφερόμενα ως «προϊόν», έχουν κατασκευαστεί υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Εντούτοις, η Corcym δεν ελέγχει τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Για τον λόγο αυτό, η Corcym και οι θυγατρικές της (συλλογικά αναφερόμενες ως «Corcym»), αποποιείται κάθε εγγύησης, ρητής και σιωπηρής, σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Corcym δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι φυσικών ή νομικών προσώπων για τυχόν ιατρικές δαπάνες ή άμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες, οι οποίες προκαλούνται από χρήση, ελάττωμα, βλάβη ή δυσλειτουργία του προϊόντος, ανεξάρτητα

από το εάν το αίτημα για αποζημίωση για τις βλάβες αυτές βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλη αιτία. Κανένα πρόσωπο δεν εξουσιοδοτείται να δεσμεύσει την Corcym ως προς οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή εγγύηση αναφορικά με το προϊόν.

Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται παραπάνω δεν αποσκοπούν στην παραβίαση υποχρεωτικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά τέτοιο τρόπο. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή όρος της παρούσας αποποίησης εγγύησης ή του περιορισμού ευθύνης θεωρηθεί ότι είναι παράνομος, μη εφαρμόσιμος ή ότι αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, η εγκυρότητα του υπολειπόμενου μέρους της αποποίησης εγγύησης και του περιορισμού ευθύνης δεν επηρεάζεται και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται όπως θα ίσχυε εάν το συγκεκριμένο μέρος ή οι συγκεκριμένοι όροι δεν περιλαμβάνονταν στην αποποίηση εγγύησης ή στον περιορισμό ευθύνης.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Használati utasítás - HAART 201 műszerkészlet

Tartalomjegyzék

1. A műszer címkéjén feltüntetett szimbólumok.....	74
2. Javallatok	74
3. Leírás	74
4. Figyelmeztetések	76
5. Óvintézkedések	76
6. Kiszerezés	76
7. Használati útmutató	77
8. Méretező és mérőgömb pontossági nyilatkozat	77
9. Használat előtti tisztítás és sterilizálás	77
Jótállási nyilatkozatok	79
Szabadalmak	80
Ábrák	137

1. A műszer címkéjén feltüntetett szimbólumok



Gyártó



Nem steril



Tételkód



Katalógusszám



Meghatalmazott európai képviselő



A termék megfelel az orvostechnikai eszközökre
vonatkózó 93/42/EGK irányelv követelményeinek



Olvassa el a használati utasítást

2. Javallatok

A HAART 201 műszerkészlet segédeszközként való használatra szolgál a HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköz beültetése során.

3. Leírás

A HAART 201 műszerkészlet négy (4) méretezőből, egy (1) mérőgömbből és két (2) fogantyúból áll, amelyek egy rozsdamentes acél tálcában vannak elhelyezve (1. ábra a 137. oldalon). A műszerkészletet az adott betegnek megfelelő méretű HAART 200

aortabillentyű anuloplasztikai eszköz kiválasztására és az aortabillentyű teljes helyreállításának befejezése után a vitorlák koaptációjának értékelésére való. A HAART 201 műszerkészlet újrafelhasználható, azonban minden használat előtt meg kell tisztítani és autoklávban (gőzzel) sterilizálni kell. A tartozékok használatára és sterilizálására vonatkozó részletes információkért olvassa el az alábbi szakaszokat.

3.1 Fogantyú

A fogantyú ASTM A276 rozsdamentes acélból készül, és az ASTM F86 specifikáció szerint van megtisztítva és passziválva. A fogantyú az eljárás során a pozicionálás megkönnyítése érdekében a méretezőkbe, a mérőgömbbe és a tartóba csavarható (2. ábra a 137. oldalon). A rozsdamentes acél fogantyú a szűkített részen meghajlítható, hogy a méretezőket, a mérőgömböt és az eszközt a kívánt módon lehessen a műtési területre helyezni. A fogantyú kialakítása és gyártása nagyon hasonló a szívbillentyűprotézisekhez mellékelt fogantyúkéhoz, és hasonló módon való használatra szolgál.

3.2 Méretezők

A méretezők polifenilszulfonból készülnek. Minden gömbön van egy a tengely mentén áthaladó nyílás (3. ábra a 138. oldalon). Az áthaladó nyílás tetején egy menet található a műszer fogantyújának.

A méretezők lézerrel vannak megjelölve egy vonallal a középvonalnál, valamint 15° széles, egymástól 180° -os távolságban elhelyezkedő pöttyözött területekkel, hogy segítsék a felhasználót a vitorla szabad szél hosszának megítélésében. A megfelelő HAART 200 eszköz mérete jól láthatóan fel van tüntetve minden egyes méretező felső felületén.

3.3 Mérőgömb

A mérőgömb polifenilszulfonból készül, és található rajta egy a tengelye mentén áthaladó nyílás. Az áthaladó nyílás tetején egy menet található a műszer fogantyújának.

A vitorla-helyreállítás befejezése után a tényleges magasság és a vitorla geometriai magassága a HAART 201 műszerkészletben található mérőgömb segítségével állapítható meg. A mérőgömb felületén két különböző vertikális skála van feltüntetve (4. ábra a 139. oldalon). Az egyik skála a gömb csúcsától indul, és a billentyűvitorla tényleges magasságának becslésére szolgál. A sikeres helyreállításhoz a vitorla tényleges magasságának körülbelül 8-10 mm-nek kell lennie. A második skála használható a vitorla geometriai magasságának

megállapítására, és amennyiben szükséges, a vitorla méretének és szimmetriájának további értékelésére a teljes billentyű-helyreállítást követően.

4. Figyelmeztetések

- Ne használja más gyártók anuloplasztikai méretezőit. Más anuloplasztikai méretezők nem biztos, hogy jelzik a HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköz megfelelő méretét.
- Az anuloplasztikai eszköz helyes méretezése a sikeres billentyű-helyreállítás fontos eleme. A jelentős alulméretezés billentyű szűkületet vagy gyűrű dehiszcenciát eredményezhet. A túlméretezés billentyű regurgitációt okozhat. A HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköz méretének kiválasztása az eszköz tervezett céljának megfelelő méretezők segítségével történik. A megfelelő eszközméret kiválasztásához csak a HAART 201 műszerkészlethez mellékelt HAART méretezőket használja.
- Az eszköztartóhoz, a méretezőkhöz és a mérőgömbhöz való csatlakozáshoz csak a HAART fogantyút használja.
- A méretezők, a mérőgömb és a fogantyú NEM STERIL, és minden használat előtt meg kell őket tisztítani és sterilizálni kell őket.
- Az eszközt kizárólag olyan sebészek alkalmazhatják, akik képzésben részesültek HAART eszközök beültetésére és méretezési technikáira vonatkozóan.
- A HAART 201 műszerkészlet nem használható a HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköztől eltérő eszközökkel.
- Ultrahangos tisztítás nem alkalmazható a HAART 201 méretezőkön vagy a mérőgömbön, mivel ez a polimer anyag és a jelölések repedezését okozhatja.

5. Óvintézkedések

Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a méretezőket és a mérőgömböt a polimer anyagok repedezettsége, repedések, szerkezeti gyengeségre utaló jelek vagy olvashatatlan jelölések szempontjából.

A fogantyút minden használat előtt és hajlítás után ellenőrizni kell a látható repedések vagy a szerkezeti gyengeségre utaló jelek szempontjából. Cserélje ki az ilyen hibákat mutató műszereket, mivel előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően, és sérülést okozhatnak a betegnek.

6. Kiszerezés

A HAART 201 műszerkészletet NEM STERILEN, egy rozsdamentes acél tálcán szállítjuk. A műszerek tiszták, de NEM STERILEK.

A műszerkészlet első átvételekor távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és gondosan vizsgáljon meg minden műszert szállítási sérülésekre utaló jelek szempontjából. A műszereket minden használat előtt ellenőrizni kell szemrevételezéssel, meg kell őket tisztítani és sterilizálni kell őket.

Dobjon ki minden olyan műszert, amelyen sérülés jelei vagy olvashatatlan jelölések vannak.

Tárolja a műszerkészletet tiszta környezetben.

7. Használati útmutató

A HAART 201 műszerkészlet segédeszközként való használatra szolgál a HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköz beültetése során. Lásd a HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköz használati útmutatóját.

8. Méretező és mérőgömb pontossági nyilatkozat

A méretezők vizuális mérőeszközként szolgálnak a megfelelő eszközméret kiválasztásához az aortabillentyű vitorlájának szabad szél hossza alapján. A méretátmérők a megadott mérethez képest $\pm 0,010$ hüvelyk (0,254 mm) pontosságúak.

A mérőgömb csak referenciaként és vizuális segédeszközként szolgál a vitorla tényleges magasságának és a vitorla geometriai hosszának megállapításához a vitorla helyreállítását követően. A mérőgömb beosztásai $\pm 0,008$ hüvelyk (0,2 mm) pontosságúak az egymás melletti jelzések között.

9. Használat előtti tisztítás és sterilizálás

Figyelem: A HAART 201 műszerkészlet NEM STERIL, és használat előtt alaposan meg kell tisztítani és sterilizálni kell.

9.1 Tisztítási utasítások

A fogantyút tisztítás előtt el kell távolítani a méretezőről vagy a mérőgömről.

Megjegyzés: Ha a műszereknek a feldolgozási területre történő szállítása valószínűleg késik, a száradás késleltetése érdekében helyezze a műszereket megfelelő mosószerrel (pl. Enzol Enzymatic Detergent vagy azzal egyenértékű szerrel) együtt egy lefedett tartályba.

A használatot követő legfeljebb 2 órán belül távolítsa el a durva szennyeződések hideg (25 °C - 30 °C) csapvizet öblítéssel, majd áztassa 1 percig enzimes mosószerben (pl. Enzol Enzymatic Detergent), amelyet úgy kell elkészíteni, hogy 15 gramm terméket adjunk 1 liter vízhez. Merítse a műszereket legalább két (2)

percre egy tartálynyi megfelelő tisztítószerbe (pl. Enzol), amelyet úgy kell elkészíteni, hogy 15 gramm terméket adunk 1 liter (15 °C - 30 °C-os) csapvízhez. Egy sörtés kefe segítségével 15 - 20 másodpercig tisztítsa meg a méretezők és a mérőgömbök menetes területét, hogy biztosítsa a lerakódott szennyeződések eltávolítását.

Öblítse le folyó csapvízzel (20 °C - 35 °C), amíg a tisztítóoldat minden nyomát szemmel láthatóan el nem távolítja. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nem maradt-e szennyeződés, és szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Szárítsa meg egy puha ruhával, és vigye át a tisztítási lépéshez.

Tisztítsa meg a műszert egy automatizált mosóban a következő paraméterek alkalmazásával:

Automatizált tisztítási paraméterek

Folyamat-lépés	Idő (pp:mm)	Hőm. (C)	Tisztítószer
Enzimátikus mosás	04:00	Forró csapvíz	Steris Prolystica 2X koncentrátum Enzimátikus Előáztató és tisztítószer 3 ml/liter
Mosás	02:00	60	Steris Prolystica Ultrakonzentrátum Semleges mosogatószer 0,7 ml/liter
Öblítés	02:00	70	n.a.
Szárítás	15:00	Alacsony	n.a.

Szemrevételezéssel ellenőrizze az egyes műszereket a visszamaradt szennyeződés és nedvesség szempontjából. Ha maradt szennyeződés, ismételje meg a tisztítási folyamatot. Ha a műszerek nedvesek, szűrt sűrített levegővel vagy szőszmentes törölkendővel szárítsa meg őket.

Figyelem: Ultrahangos tisztítás nem alkalmazható a méretezőkön, mivel az a polimer anyag és a jelölések repedezését okozhatja.

Az ajánlott tisztítási módtól való eltérés minősítéséért a felhasználó felelős.

9.2 Sterilizálási utasítások

A fogantyúkat tisztítás és sterilizálás előtt el kell távolítani a méretezőről vagy a mérőgömből.

A négy méretezőt, az egyetlen mérőgömböt és a fogantyúkat a műszertálcába kell helyezni a gőzsterilizáláshoz. A következő sterilizálási ciklus ajánlott:

Hőmérséklet: 132 °C (270 °F)

Tartózkodási idő: 4 perc

Ciklus: Elővákuum

Szárítási idő: minimum 20 perc

Az ajánlott sterilizálási módtól való eltérés minősítéséért a felhasználó felelős.

A Corcym tudomásul veszi, hogy az alábbiakban ismertetett sterilizálási ciklust az európai kórházak rutinszerűen alkalmazzák, és azt számos hasonló szívbillentyű méretező rendszer és sebészeti műszer esetében validálták.

Elővákuum: ciklus

Hőmérséklet: 134 °C (274 °F)

Tartózkodási idő: 3 perc

Szárítási idő: 20 perc

A HAART 201 műszerkészlet összetevői nem jelentenek jelentős kihívást a sterilizálás során ezzel a széles körben validált eljárás alkalmazásával. A műszer anyagai akár 137 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.

9.3 Újrafelhasználás

A Corcym legalább 50 sterilizálási és használati ciklust hajtott végre a HAART 201 műszerkészleten anélkül, hogy kopás jeleit észlelte volna.

Vigyázat: A méretezők, a mérőgömb és a fogantyú többszöri használatra szolgál, amennyiben minden használat előtt megvizsgálják őket, hogy nincs-e rajtuk sérülésre utaló jel. Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a méretezőket és a mérőgömböt a polimer anyagok repedezettsége, repedések, szerkezeti gyengeségre utaló jelek vagy olvashatatlan jelölések szempontjából. A fogantyút minden használat előtt és hajlítás után ellenőrizni kell a látható repedések vagy a szerkezeti gyengeségre utaló jelek szempontjából. Cserélje ki az ilyen hibákat mutató műszereket, mivel előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően, és sérülést okozhatnak a betegnek.

Jótállási nyilatkozatok

Jóllehet, hogy a HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköz és a HAART 201 műszerkészlet, a továbbiakban „termék” gondosan ellenőrzött körülmények között készült, a Corcym nem tudja ellenőrizni a termék használatának körülményeit. A Corcym és leányvállalatai (együttesen: „Corcym”) ezért kizárnak minden kifejezett és vélelmezett

garanciát a termékkel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, a forgalmazhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciát. A Corcym nem tartozik felelősséggel semmilyen személy vagy szervezet felé semmilyen orvosi költségért vagy bármilyen közvetlen, esetleges vagy következményes kárért, amelyet a termék használata, hibája, meghibásodása vagy működési zavara okozott, függetlenül attól, hogy az ilyen kárigény garancián, szerződésen, szabálysértésen vagy más jogcímen alapul-e. Senki sem jogosult arra, hogy a Corcymot a termékkel kapcsolatban bármilyen képviselőre vagy garanciára kötelezze.

A fentiekben meghatározott kizárások és korlátozások nem arra irányulnak és nem értelmezhetők úgy, hogy ellentétesek legyenek az alkalmazandó jog kötelező rendelkezéseivel. Ha a jelen jótállási és felelősségkorlátozási nyilatkozat valamely részét vagy feltételét valamely illetékes bíróság jogellenesnek, végrehajthatatlannak vagy az alkalmazandó joggal ellentétesnek ítéli, a jótállási és felelősségkorlátozási nyilatkozat fennmaradó részének érvényességét ez nem érinti, és minden jogot és kötelezettséget úgy kell értelmezni és érvényesíteni, mintha a jelen jótállási és felelősségkorlátozási nyilatkozat nem tartalmazná az érvénytelennek ítélt részt vagy feltételt.

Szabadalmak

Szabadalmak: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Istruzioni per l'uso - Set di strumenti HAART 201

Indice

1. Simboli riportati sull'etichetta degli strumenti.....	81
2. Indicazioni	81
3. Descrizione	81
4. Avvertenze	83
5. Precauzioni	83
6. Confezione	84
7. Modalità di impiego.....	84
8. Valutazione dell'accuratezza dei misuratori e del calibro sferico	84
9. Pulizia e sterilizzazione prima dell'utilizzo	84
Esclusione di garanzie	86
Brevetti	87
Figure	137

1. Simboli riportati sull'etichetta degli strumenti



Produttore



Non sterile



Codice lotto



Numero di catalogo



Rapp. autorizzato per l'Europa



Il prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
relativa ai dispositivi medicali



Consultare le Istruzioni per l'uso

2. Indicazioni

Il set di strumenti HAART 201 è progettato per l'uso quale ausilio per l'impianto del dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200.

3. Descrizione

Il set di strumenti HAART 201 include quattro (4) misuratori, un (1) calibro sferico e due (2) impugnature contenuti in un vassoio in acciaio inossidabile (Figura 1 a pagina 137). Il set di strumenti viene utilizzato per la scelta della misura corretta del dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200 in base al paziente e per la valutazione della coaptazione dei lembi al termine

della riparazione completa della valvola aortica. Il set di strumenti HAART 201 è riutilizzabile, purché venga pulito e sterilizzato mediante autoclave (a vapore) prima di ogni utilizzo. Per ulteriori informazioni sull'uso e la sterilizzazione degli accessori, consultare le seguenti istruzioni.

3.1 Impugnatura

L'impugnatura è realizzata in acciaio inossidabile ASTM A276 ed è stata pulita e passivata in conformità alla norma ASTM F86. Può essere avvitata nei misuratori, nel calibro sferico e nel supporto per facilitare il posizionamento del dispositivo durante la procedura (Figura 2 a pagina 137). L'impugnatura in acciaio inossidabile può essere piegata nella parte più stretta per introdurre i misuratori, il calibro sferico e il dispositivo nel sito chirurgico nel modo desiderato. Per forma e materiale l'impugnatura è molto simile alle impugnature fornite con le protesi per la sostituzione delle valvole cardiache ed è progettata per essere utilizzata nello stesso modo.

3.2 Misuratori

I misuratori sono realizzati in polifenilsulfone. Ogni sfera è provvista di un foro passante lungo il proprio asse (Figura 3 a pagina 138). La parte superiore del foro passante è filettata per consentire l'avvitamento dell'impugnatura.

Sulla linea equatoriale dei misuratori sono presenti una linea marcata al laser e alcune aree tratteggiate con angolo di 15° orientate tra loro a 180°, quale supporto per la valutazione della lunghezza del margine libero dei lembi. La dimensione del dispositivo HAART 200 corrispondente è marcata in modo ben visibile nella parte superiore di ciascun misuratore.

3.3 Calibro sferico

Il calibro sferico è realizzato in polifenilsulfone ed è provvisto di un foro passante lungo il proprio asse. La parte superiore del foro passante è filettata per consentire l'avvitamento dell'impugnatura.

Al termine della riparazione dei lembi, è possibile valutare l'altezza utile e l'altezza geometrica dei lembi mediante il calibro sferico incluso nel set di strumenti HAART 201. Sul calibro sferico sono presenti due diverse scale verticali marcate (Figura 4 a pagina 139). Una scala inizia in corrispondenza dell'apice della sfera e consente di misurare l'altezza utile del lembo valvolare. Per ottenere una riparazione corretta, l'altezza utile dei lembi deve essere compresa all'incirca tra 8 e 10 mm. La seconda scala può essere utilizzata per valutare le altezze geometriche dei lembi, secondo necessità, per

un'ulteriore verifica delle dimensioni e della simmetria dei lembi, al termine della riparazione valvolare completa.

4. Avvertenze

- Non utilizzare misuratori per anuloplastica di altri produttori. I misuratori per anuloplastica di altri produttori potrebbero non indicare la corretta misura del dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200.
- La scelta della misura corretta del dispositivo per anuloplastica è fondamentale per il successo della riparazione valvolare. Un sottodimensionamento significativo può causare stenosi valvolare o deiscenza dell'anello. Un sovradimensionamento può causare rigurgito valvolare. I misuratori forniti per la scelta della misura del dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200 sono appropriati alla destinazione d'uso del dispositivo. Per la scelta della misura del dispositivo corretta, utilizzare esclusivamente i misuratori HAART inclusi nel set di strumenti HAART 201.
- Nel supporto del dispositivo, nei misuratori e nel calibro sferico deve essere avvitata esclusivamente l'impugnatura HAART.
- I misuratori, il calibro sferico e l'impugnatura sono forniti NON STERILI e devono essere puliti e sterilizzati prima di ogni utilizzo.
- L'utilizzo di questo dispositivo è riservato esclusivamente a chirurghi adeguatamente addestrati per l'impianto di dispositivi HAART e le tecniche di misurazione.
- Il set di strumenti HAART 201 è esclusivamente progettato per l'uso con il dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200.
- Non sterilizzare i misuratori o il calibro sferico HAART 201 mediante ultrasuoni, in quanto tale metodo potrebbe causare la screpolatura dei materiali polimerici e delle marcature.

5. Precauzioni

Sottoporre a ispezione visiva i misuratori e il calibro sferico per rilevare eventuali screpolature dei materiali polimerici, incrinature, segni di debolezza strutturale o marcature non leggibili.

L'impugnatura deve essere sottoposta a ispezione visiva prima di ciascun utilizzo e dopo la piegatura per rilevare eventuali incrinature o segni di debolezza strutturale. In presenza di questi danni, sostituire lo strumento in quanto potrebbe non funzionare correttamente e causare lesioni al paziente.

6. Confezione

Il set di strumenti HAART 201 è fornito NON STERILE in un vassoio in acciaio inossidabile. Gli strumenti sono forniti puliti ma NON STERILI.

All'arrivo del set di strumenti, rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed esaminare attentamente tutti gli strumenti per rilevare eventuali danni verificatisi durante la spedizione. Prima di ogni utilizzo gli strumenti devono essere sottoposti a ispezione visiva, puliti e sterilizzati.

Gettare qualsiasi strumento che presenti segni di danno o marcature illeggibili.

Conservare il set di strumenti in un ambiente pulito.

7. Modalità di impiego

Il set di strumenti HAART 201 è progettato per l'uso quale ausilio per l'impianto del dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200. Vedere le Modalità di impiego per l'uso del dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200.

8. Valutazione dell'accuratezza dei misuratori e del calibro sferico

I misuratori fungono da indicatori visivi per la scelta della misura appropriata del dispositivo, in base alle lunghezze dei margini liberi dei lembi della valvola aortica. I diametri dei misuratori hanno un'accuratezza pari a $\pm 0,254$ mm rispetto alla misura corrispondente.

Il calibro sferico è destinato all'uso solo come riferimento e ausilio visivo per la valutazione dell'altezza utile e della lunghezza geometrica dei lembi dopo la riparazione. Le marcature sulle scale del calibro sferico hanno un'accuratezza pari a $\pm 0,2$ mm.

9. Pulizia e sterilizzazione prima dell'utilizzo

Avvertenza: il set di strumenti HAART 201 è fornito NON STERILE e deve essere attentamente pulito e sterilizzato prima dell'uso.

9.1 Istruzioni per la pulizia

Prima della pulizia, l'impugnatura deve essere svitata dal misuratore o dal calibro sferico.

Nota: se si prevede un ritardo nel trasporto degli strumenti presso l'area del trattamento, posizionare gli strumenti in un contenitore coperto con un detergente appropriato (ad es. detergente enzimatico Enzol o equivalente) per ritardare l'asciugatura.

Entro un massimo di 2 ore dopo l'uso, rimuovere la sporcizia risciacquando con acqua fredda (25-30 °C) di rubinetto e immergere per 1 minuto in un detergente enzimatico (ad es. detergente enzimatico Enzol) preparato con 15 g di

prodotto in 1 litro di acqua. Immergere gli strumenti in un contenitore di un detergente appropriato (ad es. Enzol) preparato con 15 grammi di prodotto in 1 litro di acqua di rubinetto (a una temperatura compresa tra 15 e 30 °C) per almeno due (2) minuti. Utilizzando una spazzola, pulire l'area filettata dei misuratori e del calibro sferico per 15-20 secondi per rimuovere eventuale sporcizia.

Risciacquare in acqua di rubinetto corrente (20-35 °C) finché non si rimuovono tutte le tracce di soluzione detergente. Ispezionare visivamente il dispositivo per individuare eventuale sporcizia residua e ripetere il processo se necessario. Asciugare utilizzando un panno morbido e passare alla fase di pulizia.

Pulire lo strumento in un sistema di lavaggio automatico utilizzando i seguenti parametri:

Parametri di pulizia automatici

Fase di processo	Tempo (mm:ss)	Temp. (°C)	Detergente
Lavaggio enzimatico	04:00	Acqua calda di rubinetto	Steris Prolystica 2X Concentrato Enzimatico Prelavaggio e sistema di lavaggio 3 ml/litro
Lavaggio	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-concentrato Detergente neutro 0,7 ml/litro
Risciacquo	02:00	70	N/D
Asciugatura	15:00	Bassa	N/D

Ispezionare visivamente ogni strumento per individuare sporcizia residua e umidità. In caso di sporcizia residua, ripetere la procedura di pulizia. Se gli strumenti sono bagnati, utilizzare dell'aria compressa filtrata o un panno privo di filacce per asciugarli.

Avvertenza: non sterilizzare i misuratori o il calibro sferico mediante ultrasuoni, in quanto tale metodo potrebbe causare la screpolatura dei materiali polimerici e delle marcature.

L'operatore è responsabile della qualificazione di qualsiasi deviazione dal metodo di pulizia raccomandato.

9.2 Istruzioni per la sterilizzazione

Prima della pulizia e della sterilizzazione, le impugnature devono essere rimosse dal misuratore o dal calibro sferico.

Prima di eseguire la sterilizzazione mediante vapore, i quattro misuratori, il calibro sferico e le impugnature devono essere collocati nel vassoio per strumenti. Si raccomanda il seguente ciclo di sterilizzazione:

Temperatura: 132 °C (270 °F)

Tempo di sosta: 4 minuti

Ciclo: Pre-vuoto

Tempo di asciugatura: minimo 20 minuti

L'operatore è responsabile della qualificazione di qualsiasi deviazione dal metodo di sterilizzazione raccomandato.

Corcym è consapevole che il ciclo di sterilizzazione descritto di seguito è utilizzato di routine negli ospedali europei ed è stato validato per numerosi strumenti chirurgici e sistemi di misurazione delle valvole cardiache simili.

Pre-vuoto: Ciclo

Temperatura: 134 °C (274 °F)

Tempo di sosta: 3 minuti

Tempo di asciugatura: 20 minuti

I componenti del set di strumenti HAART 201 non pongono alcun problema significativo per la sterilizzazione utilizzando questo processo ampiamente validato. I materiali dello strumento possono resistere a temperature fino a 137 °C.

9.3 Riutilizzo

Corcym ha eseguito un minimo di 50 sterilizzazioni e, a seguito dei cicli utilizzati per il set di strumenti HAART 201, non sono stati evidenziati segni di usura.

Attenzione: i misuratori, il calibro sferico e l'impugnatura sono destinati a diversi impieghi, purché vengano ispezionati prima di ciascun utilizzo per rilevare la presenza di eventuali danni. Sottoporre a ispezione visiva i misuratori e il calibro sferico per rilevare screpolature dei materiali polimerici, incrinature, segni di debolezza strutturale o marcature non leggibili. L'impugnatura deve essere sottoposta a ispezione visiva prima di ciascun utilizzo e dopo la piegatura per rilevare eventuali incrinature o segni di debolezza strutturale. In presenza di questi danni, sostituire lo strumento, in quanto potrebbe non funzionare correttamente e causare lesioni al paziente.

Esclusione di garanzie

Sebbene il dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200 e il set di strumenti HAART 201, di seguito denominati "Prodotto", siano stati realizzati in condizioni rigorosamente controllate, Corcym non verifica le condizioni in cui il Prodotto viene utilizzato. Corcym e

relative affiliate (denominate collettivamente "Corcym"), declinano pertanto tutte le garanzie, sia espresse che implicite, relative al Prodotto, comprese, ma non limitate a, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a scopi particolari. Corcym non sarà considerata responsabile nei confronti di alcuna persona fisica o giuridica per eventuali spese mediche o danni, siano essi diretti, accidentali o indiretti, causati da difetti, guasti o malfunzionamento del Prodotto, anche se le rivendicazioni relative a tali danni si basano su garanzia, contratto, negligenza o altro. Nessun individuo è autorizzato a vincolare Corcym per alcun tipo di dichiarazione o garanzia relativa al Prodotto.

Le esclusioni e limitazioni di responsabilità sopra indicate non costituiscono, e non devono essere intese in termini di, violazione di disposizioni inderogabili di leggi in vigore. Nel caso in cui un qualsiasi termine o parte delle presente Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità venga giudicata da un tribunale competente come illegale, inapplicabile o in conflitto con la legge vigente, le altre parti dell'Esclusione di garanzie e della limitazione di responsabilità saranno ritenute comunque valide e tutti i diritti e gli obblighi saranno interpretati e applicati come se la parte o il termine ritenuti inapplicabili non fossero inclusi nell'Esclusione di garanzia e nella limitazione di responsabilità.

Brevetti

Brevetti: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Bruksanvisning - HAART 201-instrumentsett

Innholdsfortegnelse

1. Instrumentetikettsymboler	88
2. Indikasjoner	88
3. Beskrivelse	88
4. Advarsler	89
5. Forholdsregler	90
6. Leveringsform.....	90
7. Bruksanvisning	91
8. Nøyaktighetserklæring for måler og målesfære	91
9. Rengjøring og sterilisering før bruk	91
Ansvarsfraskrivelse for garantier	93
Patenter	94
Figurer	137

1. Instrumentetikettsymboler



Produsent



Ikke-steril



Batch-kode



Katalognummer



Autorisert europeisk representant



Produktet er i samsvar med kravene i direktivet
93/42/EØF for medisinsk utstyr



Se bruksanvisningen

2. Indikasjoner

HAART 201-instrumentsettet er beregnet på bruk som et hjelpemiddel ved implantering av HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet.

3. Beskrivelse

HAART 201-instrumentsettet består av fire (4) målere, én (1) målesfære og to (2) håndtak i et brett av rustfritt stål (figur 1 på side 137). Instrumentsettet brukes til å velge riktig størrelse på HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet for en gitt pasient og som en hjelp ved vurdering av

seilkoaptasjon etter fullført total reparasjon av aortaklaffen. HAART 201-instrumentsettet er gjenbruk bart. Det må imidlertid rengjøres og steriliseres ved hjelp av autoklav (damp) før hver gangs bruk. Se avsnittene nedenfor for detaljert informasjon om bruk av tilbehør og sterilisering.

3.1 Håndtak

Håndtaket er maskinert fra ASTM A276 rustfritt stål samt rensert og passivert i henhold til ASTM-spesifikasjonen F86. Håndtaket kan tres inn i målerne, målesfæren og holderen for å forenkle posisjonering under inngrepet (figur 2 på side 137). Håndtaket i rustfritt stål kan bøyes i den innsnevrede delen for å føre målerne, målesfæren og enheten frem i operasjonsstedet på ønsket måte. Håndtaket er i konstruksjon og fabrikkert svært likt håndtakene som følger med erstatningshjerteklaffproteser, og er beregnet på bruk på tilsvarende måte.

3.2 Målere

Målerne er maskinert fra polyfenylsulfon. Hver sfære har et gjennomgående hull langs aksene (figur 3 på side 138). Toppen av det gjennomgående hullet er gjenget for å ta imot instrumenthåndtaket.

Målerne er lasermerket med en linje ved ekvator og stiplede områder med 15° bredde orientert 180° fra hverandre, for å hjelpe brukeren med vurdering av seilets frikantlengde. Diameteren til den tilsvarende HAART 200-enheten er tydelig merket på målerens øvre overflate.

3.3 Målesfære

Målesfæren er maskinert fra polyfenylsulfon og har et gjennomgående hull langs aksene. Toppen av det gjennomgående hullet er gjenget for å ta imot instrumenthåndtaket.

Etter fullført seilreparasjon kan effektiv høyde og seilets geometriske høyde kontrolleres ved hjelp av målesfæren som følger med i HAART 201-instrumentsettet. Målesfæren har to forskjellige vertikale skalaer merket på overflaten (figur 4 på side 139). Den ene av skalaene starter på toppen av sfæren og er beregnet på estimering av den effektive høyden til klaffseilet. For en vellykket reparasjon må seilets effektive høyde være omtrent 8 til 10 mm. Den andre skalaen kan, når dette er ønskelig, anvendes til å kontrollere geometriske seilhøyder for nærmere vurdering av seilstørrelse og -symmetri etter den totale klaffereparasjonen.

4. Advarsler

- Ikke bruk annuloplastikkmalere fra andre produsenter. Andre annuloplastikkmalere vil kanskje ikke angi riktig størrelse på HAART 200 aortisk annuloplastikk enhet.

- Bestemmelse av riktig størrelse på annuloplastikkenheten er et viktig element i vellykket klaffereparasjon. Betydelig underdimensjonering kan føre til klaffstenose eller ringdehiscens. Overdimensjonering kan føre til klaffregurgitasjon. Størrelsen på HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet velges ved hjelp av målere som samsvarer med enhetens tiltenkte utforming. Bruk bare HAART-målerne som følger med i HAART 201-instrumentsettet, for å velge riktig enhetsstørrelse.
- Bruk bare HAART-håndtaket som kontaktdel med enhetsholderen, målerne og målesfæren.
- Målerne, målesfæren og håndtaket leveres IKKE-STERILE og må rengjøres og steriliseres før hver gangs bruk.
- Bare kirurger som har fått opplæring i HAART-enhetsimplantering og dimensjoneringsteknikker, skal bruke denne enheten.
- HAART 201-instrumentsettet er ikke beregnet på bruk med andre enheter enn HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet.
- Ultrasonisk rengjøring skal ikke brukes på HAART 201-målerne eller -målesfæren, da det kan føre til krakelering av polymermaterialet og merkene.

5. Forholdsregler

Målerne og målesfæren må inspiseres visuelt for krakelering av polymermaterialer, sprekker og tegn på strukturell svakhet eller uleselig merking før hver gangs bruk.

Håndtaket må inspiseres for synlige sprekker eller tegn på strukturell svakhet før hver gangs bruk og etter bøyning. Bytt ut alle instrumenter med disse feilene, da det er mulig at de ikke fungerer skikkelig og kan forårsake pasientskade.

6. Leveringsform

HAART 201-instrumentsettet leveres IKKE-STERILT i et brett av rustfritt stål. Instrumentene leveres rene, men IKKE-STERILE.

Ved første gangs mottak av instrumentsettet fjerner du alt emballasjemateriale og nøye undersøker alle instrumenter for tegn på transportskade. Instrumentene må inspiseres visuelt, rengjøres og steriliseres før hver gangs bruk.

Kasser alle instrumenter med tegn på skade eller uleselig merking.

Oppbevar instrumentsettet i et rent miljø.

7. Bruksanvisning

HAART 201-instrumentsettet er beregnet på bruk som et hjelpemiddel ved implantering av HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet. Se bruksanvisningen for HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet.

8. Nøyaktighetserklæring for måler og målesfære

Målerne tjener som en visuell måleenhet for valg av en passende enhetsstørrelse basert på aortaklaffens seilfriklengder. Størrelsesdiameterne er nøyaktige med $\pm 0,254$ mm i forhold til den angitte størrelsen.

Målesfæren er kun ment som en referanse og et visuelt hjelpemiddel for å vurdere effektiv seilhøyde og geometrisk seillengde etter seilreparasjon. Skalaene på målesfæren har en nøyaktighet på $\pm 0,2$ mm mellom tilstøtende merker.

9. Rengjøring og sterilisering før bruk

Advarsel: HAART 201-instrumentsettet leveres IKKE-STERILT og må rengjøres grundig samt steriliseres før bruk.

9.1 Rengjøringsinstrukser

Håndtaket må fjernes fra måleren eller målesfæren før rengjøring.

Merk: Hvis transporten av instrumentene til behandlingsområdet forsinkes, skal instrumentene plasseres i en lukket beholder med et egnet vaskemiddel (f.eks. Enzol Enzymatic Detergent eller tilsvarende) slik at de ikke tørker ut.

Fjern mesteparten av smusset ved hjelp av kaldt vann (25 °C til 30 °C) maks. to (2) timer etter bruk. Skyll under rennende springvann, og legg i bløt i ett (1) minutt i et enzymholdig vaskemiddel (f.eks. Enzol Enzymatic Detergent) klargjort i forholdet 15 g per 1 liter vann. Legg instrumentene i bløt i en beholder med et egnet rengjøringsmiddel (f.eks. Enzol) klargjort i forholdet 15 g per 1 liter springvann (15 °C til 30 °C) i minst to (2) minutter. Rengjør gjengeområdet på målerne og målesfærene med en børste i 15 til 20 sekunder for å fjerne sammenpresset smuss.

Skyll under rennende springvann (20 °C til 35 °C) til alle synlige rester av rengjøringsmiddelet er fjernet. Se etter gjenværende smuss, og gjenta prosessen om nødvendig. Tørk med en myk klut, og transporter til rengjøringstrinnet.

Rengjør instrumentet i en automatisert vaskemaskin ved hjelp av følgende parametre:

Automatiske rengjøringsparametre

Prosesstrinn	Tid (mm:ss)	Temp (C)	Rengjøringsmiddel
Enzymatisk vasking	04:00	Varmt springvann	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/liter
Vasking	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/liter
Skylling	02:00	70	-
Tørking	15:00	Lav	-

Inspiser hvert instrument for gjenværende smuss og fukt. Hvis det fremdeles finnes rester av smuss på instrumentet, gjentas prosessen. Hvis instrumentet er vått, tørk med trykkluft eller en lofri klut.

Advarsel: Ultrasonisk rengjøring skal ikke brukes på målerne da det kan føre til krakelering av polymermaterialet og merkene.

Brukeren er ansvarlig for kvalifisering av eventuelle avvik fra den anbefalte rengjøringsmetoden.

9.2 Steriliseringsinstrukser

Håndtakene må fjernes fra måleren eller målesfæren før rengjøring og sterilisering.

De fire målerne, målesfæren og håndtakene må plasseres i instrumentbrettet for dampsterilisering. Følgende steriliseringssyklus anbefales:

Temperatur: 132 °C (270 °F)

Eksponerings tid: 4 minutter

Syklus: Prevakuum

Tørketid: 20 minutter (minimum)

Brukeren er ansvarlig for kvalifisering av eventuelle avvik fra den anbefalte steriliseringsmetoden.

Corcym erkjenner at steriliseringssyklusen beskrevet nedenfor rutinemessig brukes av europeiske sykehus og har blitt validert for mange lignende størrelsesmålere for hjerteklaffer og kirurgiske instrumenter.

Prevakuum: syklus

Temperatur: 134 °C (274 °F)

Eksponerings tid: 3 minutter

Tørketid: 20 minutter

Komponentene i HAART 201-instrumentsettet utgjør ingen vesentlig utfordring for sterilisering ved bruk av denne vidt validerte prosessen. Instrumentmaterialene tåler temperaturer opptil 137 °C.

9.3 Gjenbruk

Corcym har utført minimum 50 steriliserings- og brukssykluser på HAART 201-instrumentsettet uten at noen tegn på slitasje har blir notert.

Forsiktig: Målerne, målesfæren og håndtaket er beregnet på flere brukere så lenge de inspiseres før hver gangs bruk for tegn på skade. Målerne og målesfæren må inspiseres visuelt for krakelering av polymermaterialer, sprekker og tegn på strukturell svakhet eller uleselig merking før hver gangs bruk. Håndtaket må inspiseres for synlige sprekker eller tegn på strukturell svakhet før hver gangs bruk og etter bøying. Bytt ut alle instrumenter med disse feilene, da det er mulig at de ikke fungerer skikkelig og kan forårsake pasientskade.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

Selv om HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet og HAART 201-instrumentsettet, heretter kalt «produktet», har blitt produsert under nøye kontrollerte forhold, har Corcym ingen kontroll over forholdene som produktet brukes under. Corcym og dets datterselskaper (samlet «Corcym») fraskriver seg derfor alle former for garantier, både eksplisitte og implisitte, med hensyn til produktet, inkludert, men ikke begrenset til, enhver implisitt garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Corcym skal ikke være ansvarlig overfor noen person eller enhet for eventuelle medisinske utgifter, direkte eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes bruk av, defekter ved, svikt eller feilfunksjon av produktet, uavhengig av om et krav for slike skader er basert på garanti, kontrakt, ikke-kontraktmessige forhold eller annet. Ingen person har noen myndighet til å binde Corcym til noen form for representasjon eller garanti med hensyn til produktet.

Unntakene og begrensningene som er angitt ovenfor, er ikke ment å, og skal ikke, tolkes slik at de kommer i strid med ufravikelige bestemmelser i gjeldende lov. Hvis en del eller noen av vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen og ansvarsbegrensningen erklæres av en domstol i en kompetent jurisdiksjon som ulovlige, ikke mulige å håndheve eller i strid med gjeldende lov, skal gyldigheten av den gjenværende delen av ansvarsfraskrivelsen og ansvarsbegrensningen ikke bli berørt, og alle rettigheter og forpliktelser skal tolkes og håndheves som om denne

ansvarsfraskrivelsen og ansvarsbegrensningen ikke inneholdt den bestemte delen eller det bestemte vilkåret som anses som ugyldig.

Patenter

Patenter: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Instrukcja użytkowania - zestaw instrumentów HAART 201

Spis treści

1. Symbole na etykietach instrumentów	95
2. Wskazania	95
3. Opis	95
4. Ostrzeżenia	97
6. Sposób dostarczania	97
7. Wskazówki dotyczące użytkowania.....	98
8. Oświadczenie dotyczące dokładności przymiaru i kuli przymiarowej	98
9. Czyszczenie i sterylizacja przed użyciem.....	98
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji	100
Patenty	101
Ryciny.....	137

1. Symbole na etykietach instrumentów



Producent



Niesterylne



Kod partii



Numer katalogowy



Autoryzowany przedstawiciel w Europie



Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/
EWG dotyczącej urządzeń medycznych



Patrz Instrukcja użytkowania

2. Wskazania

Zestaw instrumentów HAART 201 służy do ułatwienia wszczepiania urządzenia do annuloplastyki aortalnej HAART 200.

3. Opis

Zestaw instrumentów HAART 201 składa się z czterech (4) przymiarów, jednej (1) kuli przymiarowej oraz dwóch (2) rączek, dostarczanych na tacce ze stali nierdzewnej (ryc. 1 na stronie 137). Zestaw instrumentów jest przeznaczony do dobierania odpowiedniego rozmiaru urządzenia do annuloplastyki aortalnej HAART 200

dla danego pacjenta oraz do ułatwienia oceny stopnia koaptacji płatków po zakończeniu zabiegu naprawy zastawki aortalnej. Zestaw instrumentów HAART 201 służy do wielokrotnego użytku i musi być czyszczony i sterylizowany w autoklawie (parą) przed każdym użyciem. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania akcesoriów i sterylizacji zamieszczono w poniższych częściach.

3.1 Rączka

Rączka jest wyprodukowana ze stali nierdzewnej ASTM A276 i była czyszczona oraz pasywowana zgodnie ze specyfikacją ASTM F86. Rączkę można również włożyć do przymiarów, kuli przymiarowej i uchwytu w celu ułatwienia umiejscowienia podczas zabiegu (ryc. 2 na stronie 137). Rączkę ze stali nierdzewnej można zginać w jej wąskiej części w celu przyłożenia przymiarów, kuli przymiarowej i urządzenia w polu operacyjnym w wybrany sposób. Rączka ma bardzo podobną budowę i sposób produkcji do rączek dostarczanych z protezami zastawek serca i powinna być stosowana w podobny sposób.

3.2 Przymiary

Przymiary są wyprodukowane z polifenylosulfonu. Każda kula posiada kanał wzdłuż jej osi (ryc. 3 na stronie 138). Górna część kanału jest gwintowana w celu przymocowania rączki.

Przymiary posiadają laserowo naniesione linie na równiku i kropkowane obszary o szerokości 15°, odległe od siebie o 180°, w celu ułatwienia użytkownikowi oceny długości wolnego brzegu płatków. Średnica odpowiedniego urządzenia HAART 200 dla każdego przymiaru jest wyraźnie zaznaczona na górnej powierzchni.

3.3 Kula przymiarowa

Kula przymiarowa została wyprodukowana z polifenylosulfonu i posiada kanał wzdłuż jej osi. Górna część kanału jest gwintowana w celu przymocowania rączki.

Po zakończeniu naprawy płatków wysokość efektywną i wysokość geometryczną płatków można zmierzyć za pomocą kuli przymiarowej z zestawu instrumentów HAART 201. Kula przymiarowa posiada dwie różne skale pionowe na powierzchni (ryc. 4 na stronie 139). Jedna skala zaczyna się na górnym biegunie kuli i służy do określenia efektywnej wysokości płatków zastawki. Aby naprawa była skuteczna, efektywna wysokość płatków powinna wynosić od około 8 do 10 mm. Druga skala może być używana do zmierzenia wysokości płatków, gdy jest to wymagane, w celu dalszej oceny wymiarów płatków i ich symetryczności po wykonaniu naprawy zastawki.

4. Ostrzeżenia

- Nie należy używać przymiarów pierścieniowych innych producentów. Inne przymiary pierścieniowe mogą wskazywać nieprawidłowy rozmiar urządzenia do annuloplastyki aortalnej HAART 200.
- Dobieranie prawidłowego rozmiaru urządzenia do annuloplastyki jest ważną częścią skutecznej naprawy zastawki. Znaczne niedomierzenie może powodować zwężenie zastawki lub oderwanie się pierścienia. Dobranie zbyt dużego rozmiaru może prowadzić do niedomykalności zastawki. Rozmiar urządzenia do annuloplastyki aortalnej HAART 200 jest określany za pomocą przymiarów przystosowanych do konstrukcji urządzenia. W celu dobrania właściwego rozmiaru urządzenia należy używać wyłącznie przymiarów z zestawu instrumentów HAART 201.
- Rączkę HAART należy przytwierdzać wyłącznie do uchwytu urządzenia, przymiarów i kuli przymiarowej.
- Przymiary, kula przymiarowa i rączka są dostarczane jako NIESTERYLNE i muszą zostać oczyszczone i wysterylizowane przed każdym użyciem.
- Urządzenie powinno być stosowane wyłącznie przez kardiochirurgów, którzy przeszli przeszkolenie w zakresie technik wszczepiania i dobierania rozmiarów urządzenia HAART.
- Zestaw instrumentów HAART 201 nie jest przeznaczony do stosowania z urządzeniami innymi niż urządzenie do annuloplastyki aortalnej HAART 200.
- Nie należy stosować ultradźwiękowego oczyszczania przymiarów i kuli przymiarowej HAART 201, gdyż może to powodować uszkodzenia materiału polimerowego i oznakowań.

5. Środki ostrożności

Przymiary i kulę przymiarową należy obejrzeć przed każdym użyciem pod kątem występowania uszkodzeń materiału polimerowego, pęknięć, oznak osłabienia struktury lub nieczytelnych oznakowań.

Uchwyt należy sprawdzić przed każdym użyciem i po zginaniu pod kątem widocznych pęknięć oraz oznak osłabienia struktury. Należy wymienić instrumenty posiadające te wady, gdyż mogą one działać nieprawidłowo i spowodować obrażenia pacjenta.

6. Sposób dostarczania

Zestaw instrumentów HAART 201 jest dostarczany jako NIESTERYLNY w tacce ze stali nierdzewnej. Dostarczane instrumenty są czyste, ale NIESTERYLNE.

Przed pierwszym zastosowaniem zestawu instrumentów należy zdjąć wszystkie opakowania i dokładnie sprawdzić

wszystkie instrumenty pod kątem uszkodzeń podczas transportu. Instrumenty należy obejrzeć, oczyścić i wysterylizować przed każdym użyciem.

Należy wyrzucić każdy instrument posiadający uszkodzenia lub nieczytelne oznakowanie.

Instrumenty należy przechowywać w czystym otoczeniu.

7. Wskazówki dotyczące użytkowania

Zestaw instrumentów HAART 201 służy do ułatwienia wszczepiania urządzenia do annuloplastyki aortalnej HAART 200. Patrz Wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia do annuloplastyki aortalnej HAART 200.

8. Oświadczenie dotyczące dokładności przymiaru i kuli przymiarowej

Przymiary służą do wzrokowej oceny podczas dobierania odpowiedniego rozmiaru urządzenia w oparciu o długości wolnych brzegów płatków zastawki aortalnej. Średnica z dokładnością do $\pm 0,254$ mm dla określonego rozmiaru.

Kulę przymiarową należy traktować wyłącznie jako narzędzie referencyjne i wzrokową pomoc podczas oceny wysokości efektywnej płatka i geometrii płatka po operacji w obrębie płatka. Skale na kuli przymiarowej posiadają dokładność $\pm 0,2$ mm między sąsiadującymi oznakowaniami.

9. Czyszczenie i sterylizacja przed użyciem

Ostrzeżenie: Zestaw instrumentów HAART 201 jest dostarczany jako NIESTERYLNY i musi być dokładnie oczyszczony i wysterylizowany przed użyciem.

9.1 Instrukcje dotyczące czyszczenia

Należy wyjąć rączkę z przymiaru lub kuli przymiarowej przed czyszczeniem.

Uwaga: Jeżeli przenoszenie instrumentów do obszaru przetwarzania będzie opóźnione, należy położyć instrumenty w przykrytym pojemniku z odpowiednim detergentem (np. detergent enzymatyczny Enzol lub odpowiednik) w celu opóźnienia wysychania.

W ciągu maksymalnie 2 godzin po użyciu należy usunąć duże zabrudzenia za pomocą chłodnej (od 25°C do 30°C) bieżącej wody kranowej i namaczać przez 1 minutę w detergencie enzymatycznym (np. detergent enzymatyczny Enzol) rozpuszczonym w ilości 15 g na 1 litr wody. Należy zanurzyć instrumenty w pojemniku z odpowiednim środkiem czyszczącym (np. Enzol) w ilości 15 g na 1 litr wody kranowej (15° do 30°C) przez co najmniej dwie (2) minuty. Należy używać szczotki z włosa do czyszczenia obszaru z gwintowanego przymiarów i kul przymiarowych przez 15 do 20 sekund w celu usunięcia zabrudzeń.

Płukać w bieżącej wodzie z kranu (od 20°C do 35°C) aż do skutecznego usunięcia widocznego roztworu czyszczącego. Obejrzyć instrumenty pod kątem pozostałych zabrudzeń i powtórzyć proces, jeżeli jest to konieczne. Osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki i przenieść do czyszczenia.

Wyczyścić instrument w automatycznej myjce z zastosowaniem poniższych parametrów:

Parametry czyszczenia automatycznego

Etap procesu	Czas (mm:ss)	Temp (C)	Środek czyszczący
Czyszczenie enzymatyczne	04:00	Gorąca woda kranowa	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/litr
Mycie	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/litr
Płukanie	02:00	70	Nd.
Suszenie	15:00	Niska	Nd.

Należy obejrzeć każdy instrument pod kątem pozostałości brudu i wilgoci. W przypadku utrzymującego się zabrudzenia należy powtórzyć proces czyszczenia. Jeżeli instrumenty są mokre, należy użyć filtrowanego sprężonego powietrza lub niepozostawiającej włókien ściereczki w celu osuszenia.

Ostrzeżenie: Nie należy stosować ultradźwiękowego oczyszczania przymiarów, gdyż może to powodować uszkodzenia materiału polimerowego i oznakowań.

Użytkownik jest odpowiedzialny za jakiekolwiek odchylenia od zalecanej metody czyszczenia.

9.2 Instrukcje dotyczące sterylizacji

Należy wyjąć ręczki z przymiaru lub kuli przymiarowej przed sterylizacją.

W celu wykonania sterylizacji parowej należy umieścić na tacy dla instrumentów cztery przymiary, jedną kulę przymiarową i ręczki. Zaleca się poniższy cykl sterylizacji:

Temperatura: 132°C (270 °F)

Czas procesu sterylizacji: 4 minuty

Cykl: Próżnia wstępna

Czas suszenia: co najmniej 20 minut

Użytkownik jest odpowiedzialny za jakiekolwiek odchylenia od zalecanej metody sterylizacji.

Corcym przyznaje, że opisany poniżej cykl sterylizacji jest rutynowo stosowany przez europejskie szpitale i został zatwierdzony dla wielu podobnych systemów przymiaru do zastawek serca i narzędzi chirurgicznych.

Próżnia wstępna: cykl

Temperatura: 134°C (274 °F)

Czas procesu sterylizacji: 3 minuty

Czas suszenia: 20 minuty

Komponenty zestawu instrumentów HAART 201 nie stanowią znacznego wyzwania dla sterylizacji przy użyciu tego szeroko zatwierdzonego procesu. Materiały, z których wykonane są instrumenty w zestawie, są odporne na działanie temperatur do 137°C.

9.3 Powtórne użycie

Firma Corcym wykonała co najmniej 50 sterylizacji i cykli użytkowania zestawu instrumentów HAART 201, nie stwierdzając jakichkolwiek oznak zużycia.

Przestroga: Przymiary, kula przymiarowa oraz rączka są przeznaczone do wielokrotnego użytku pod warunkiem, że są sprawdzane przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń. Przymiary i kulę przymiarową należy obejrzeć przed każdym użyciem pod kątem występowania uszkodzeń materiału polimerowego, pęknięć, oznak osłabienia struktury lub nieczytelnych oznakowań. Uchwyt należy sprawdzić przed każdym użyciem i po zginaniu pod kątem widocznych pęknięć oraz oznak osłabienia struktury. Należy wymienić instrumenty posiadające te wady, gdyż mogą one działać nieprawidłowo i spowodować obrażenia ciała pacjenta.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Urządzenie do annuloplastyki aortalnej HAART 200 i zestaw instrumentów HAART 201, dalej określane jako „produkt”, zostały wyprodukowane w ściśle kontrolowanych warunkach. Jednak firma Corcym nie ma wpływu na warunki użytkowania produktu. Firma Corcym oraz podmioty z nią powiązane (nazywane łącznie „firma Corcym”), wyłącza wszystkie gwarancje, wyrażone i domniemane, dotyczące produktu, które obejmują m.in. jakiekolwiek domniemane gwarancje co do wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Firma Corcym nie będzie odpowiedzialna przed jakąkolwiek osobą lub podmiotem za jakiekolwiek wydatki medyczne lub jakiekolwiek bezpośrednio,

przypadkowe lub następne szkody z powodu nieprawidłowego działania produktu, bez względu na to, czy roszczenie zostanie wysunięte na podstawie gwarancji, umowy, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, czy też w inny sposób. Żadna osoba nie ma prawa do powiązania firmy Corcym z jakimkolwiek zapewnieniem lub gwarancją dotyczącą tego produktu.

Powyższe wykluczenia i ograniczenia nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako naruszenie bezwzględnie obowiązujących, odpowiednich przepisów prawa. Jeżeli jakakolwiek część lub zapis niniejszego wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności zostanie uznany przez jakikolwiek odpowiedni sąd za nielegalny, niemożliwy do wykonania lub będący w sprzeczności z odpowiednimi przepisami prawa, ważność pozostałej części wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności nie będzie naruszona, a wszystkie prawa i zobowiązania będą interpretowane i egzekwowane tak, jakby wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności nie zawierało danej części lub zapisu uznanego za wadliwy.

Patenty

Patenty: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Instrucțiuni de utilizare - Setul de instrumente HAART 201

Cuprins

1. Simboluri de etichetare pentru instrument.....	102
2. Indicații	102
3. Descriere	102
4. Avertismente	104
5. Măsuri de precauție	104
6. Modul de furnizare	104
7. Instrucțiuni de utilizare	105
8. Declarație privind precizia dispozitivului de dimensionare și a sferei Gage	105
9. Curățarea și sterilizarea înainte de utilizare	105
Exonerarea de răspundere	107
Brevete	108
Figuri.....	137

1. Simboluri de etichetare pentru instrument



Producător



Nesteril



Cod lot



Număr de catalog



Reprezentant european autorizat



Produsul respectă cerințele Directivei 93/42/CEE pentru dispozitive medicale



Consultați Instrucțiunile de utilizare

2. Indicații

Setul de instrumente HAART 201 este destinat utilizării ca ajutor la implantarea dispozitivului de anuloplastie aortică HAART 200.

3. Descriere

Setul de instrumente HAART 201 este format din patru (4) dispozitive de dimensionare, o (1) sferă Gage și două (2) mânere furnizate într-o tavă din oțel inoxidabil (Figura 1 de la pagina 137). Setul de instrumente este folosit pentru a selecta dimensiunea adecvată pentru dispozitivului de anuloplastie aortică HAART 200 pentru un anumit

pacient și pentru a ajuta la evaluarea coaptației septului după finalizarea procedurii generale de reparare a valvei aortice. Setul de instrumente HAART 201 este reutilizabil, însă el trebuie să fie curățat și sterilizat cu autoclavă (abur) înainte de fiecare utilizare. Consultați secțiunile de mai jos pentru informații detaliate privind utilizarea accesoriilor și sterilizarea.

3.1 Mâner

Mânerul este fabricat din oțel inoxidabil ASTM A276 și este curățat și pasivizat conform specificației ASTM F86. Mânerul poate fi filetat în dispozitivele de dimensionare, sfera Gage și suport, pentru a facilita poziționarea în timpul procedurii (Figura 2 de la pagina 137). Mânerul din oțel inoxidabil poate fi îndoit în secțiunea îngustă pentru a poziționa în modul dorit dispozitivele de dimensionare, sfera Gage și dispozitivul la locul intervenției chirurgicale. Mânerul este foarte similar ca design și fabricație cu mânerele furnizate cu protezele valvulare cardiacă de înlocuire și trebuie utilizat într-un mod similar.

3.2 Dispozitivele de dimensionare

Dispozitivele de dimensionare sunt prelucrate din polifenilsulfonă. Fiecare Sferă are o gaură prin axa sa (Figura 3 la pagina 138). Partea de sus a găurii este filetată și în ea va intra mânerul instrumentului.

Dispozitivele de dimensionare sunt marcate cu laser cu o linie la ecuator și 15° lățime în regiunile blocate, orientate la 180° între ele, pentru a ajuta utilizatorul să evalueze lungimea laturii fără margine a septului. Dimensiunea dispozitivului HAART 200 corespunzător este marcată vizibil pe suprafața superioară a fiecărui dispozitiv de dimensionare.

3.3 Sfera Gage

Sfera Gage este fabricată din polifenilsulfonă și are o gaură prin axa sa. Partea de sus a găurii este filetată și în ea va intra mânerul instrumentului.

După finalizarea reparării septului, înălțimea efectivă și înălțimea geometrică a septului pot fi evaluate utilizând sfera Gage furnizată în setul de instrumente HAART 201. Sfera Gage are două scări verticale diferite, marcate pe suprafață (Figura 4 de la pagina 139). O scară pleacă de la apexul sferei și este destinată estimării înălțimii verticale efective a septului valvei. Pentru o reparație reușită, înălțimea efectivă a prospectului trebuie să fie de aproximativ 8 până la 10 mm. A doua scară poate fi utilizată pentru a evalua înălțimile geometrice ale prospectului, dacă se dorește, pentru evaluarea ulterioară a dimensiunii și simetriei prospectului după repararea generală a valvei.

4. Avertismente

- Nu utilizați dispozitive de dimensionare de la alți producători de dispozitive de anuloplastie. Dispozitive de dimensionare de la alte dispozitive de anuloplastie este posibil nu pot indica corect dimensiunea dispozitivului de anuloplastie HAART 200.
- Dimensionarea corectă a dispozitivului de anuloplastie este un element important în realizarea unor proceduri reușite de reparare a valvei. Subdimensionarea semnificativă poate duce la stenoza valvei sau dehiscenta inelului. Supradimensionarea poate duce la regurgitarea valvei. Dimensiunea dispozitivului de anuloplastie aortică HAART 200 este selectată utilizând dispozitive de dimensionare, în conformitate cu destinația intenționată a dispozitivului. Utilizați numai dispozitivele de dimensionare HAART incluse în setul de instrumente HAART 201 atunci când selectați dimensiunea corespunzătoare a dispozitivului.
- Utilizați numai mânerul HAART pentru a interacționa cu suportul dispozitivului, cu dispozitivele de dimensionare și cu sfera Gage.
- Dispozitivele de dimensionare, sfera Gage și mânerul sunt furnizate NONSTERILE și trebuie să fie curățate și sterilizate înainte de fiecare utilizare.
- Numai chirurghii care au beneficiat de instruire în tehnicile de implantare și dimensionare a dispozitivului HAART trebuie să utilizeze acest dispozitiv.
- Setul de instrumente HAART 201 nu este destinat utilizării cu alte dispozitive decât dispozitivul de anuloplastie aortică HAART 200.
- Curățarea cu ultrasunete nu este indicată pentru dispozitivele de dimensionare și sfera Gage din HAART 201, deoarece poate provoca zgârirea materialului polimer și a marcajelor.

5. Măsurile de precauție

Înainte de fiecare utilizare, dispozitivele de dimensionare și sfera Gage și trebuie să fie inspectate vizual pentru a detecta mici fisuri în materialele din polimer, crăpături, semne de slăbiciune structurală sau marcaje ilizibile.

Mânerul trebuie inspectat pentru a detecta fisuri vizibile sau semnele de slăbiciune structurală înainte de fiecare utilizare și după îndoire. Înlocuiți instrumentele care prezintă aceste defecte, deoarece este posibil ca acestea să nu funcționeze corect și să provoace leziuni pacientului.

6. Modul de furnizare

Setul de instrumente HAART 201 este furnizat NESTERIL, într-o tavă din oțel inoxidabil. Instrumentele sunt furnizate curate, dar NESTERILE.

După primirea inițială a setului de instrumente, îndepărtați toate ambalajele și examinați cu atenție toate instrumentele, pentru a observa eventuale semne de deteriorare în cursul transportului. Instrumentele trebuie inspectate vizual, curățate și sterilizate înainte de fiecare utilizare.

Aruncați toate instrumentele care prezintă semne de deteriorare sau marcaje ilizibile.

Depozitați setul de instrumente într-un mediu curat.

7. Instrucțiuni de utilizare

Setul de instrumente HAART 201 este destinat utilizării ca ajutor la implantarea dispozitivului de anuloplastie aortică HAART 200. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru dispozitivul de anuloplastie aortică HAART 200.

8. Declarație privind precizia dispozitivului de dimensionare și a sferei Gage

Dispozitivele de dimensionare servesc ca un indicator vizual pentru alegerea unei dimensiuni corecte pentru dispozitiv, în funcție de lungimile marginilor libere ale septului valvei aortice. Diametrele au dimensiuni exacte, cu o eroare de $\pm 0,010$ inch (0,254 mm) față de dimensiunea specificată.

Sfera Gage este menită să fie doar un ajutor de referință și vizual pentru evaluarea înălțimii efective a septului și a lungimii geometrice a septului, după repararea sa. Scalele de pe Sfera Gage sunt precise, cu o eroare de la $\pm 0,008$ inch (0,2 mm) între marcaje adiacente.

9. Curățarea și sterilizarea înainte de utilizare

Avertizare: Setul de instrumente HAART 201 este furnizat NESTERIL și trebuie curățat și sterilizat temeinic înainte de utilizare.

9.1 Instrucțiuni de curățare

Mânerul trebuie scos din dispozitivul de dimensionare sau din sfera Gage înainte de curățare.

Notă: În cazul în care transportul instrumentelor în zona de procesare este probabil să fie întârziat, plasați instrumentele într-un recipient acoperit cu un detergent adecvat (de exemplu, detergent enzimatic Enzol sau un echivalent), pentru a întârzia uscarea.

Cu maximum 2 ore de la utilizare, îndepărtați murdăria brută cu apă rece (25° până la 30°C), clătiți cu apă de la robinet și înmuiați timp de 1 minut într-un detergent enzimatic (de exemplu, detergent enzimatic Enzol), preparat într-o soluție de cu 2 oz pe galon (12,47 g/l) de apă. Scufundați instrumentele într-un recipient cu un agent de curățare adecvat (de exemplu, Enzol) preparat

cu 2 oz per 1 galon (12,47 g/l) de apă de la robinet (15°–30°C), timp de cel puțin două (2) minute. Folosind o perie cu peri, curățați 15–20 de secunde suprafața filetată a dispozitivelor de dimensionare și a sferelor Gage, pentru a asigura îndepărtarea murdăriei.

Clătiți cu apă de la robinet (20°–35°C) până când toate urmele de soluție de curățare sunt eliminate. Inspectați vizual pentru orice murdărie rămasă și repetați procesul, dacă este necesar. Uscăți cu ajutorul unei cârpe moi și transportați în locația unde se efectuează curățarea.

Curățați instrumentul într-o mașină de spălat automată, folosind următorii parametri:

Parametri pentru curățarea automată

Etapă de proces	Timp (mm:ss)	Temp (C)	Agent de curățare
Soluție enzimatică	04:00	Apă caldă de la robinet	Steris Prolystica Concentrat 2X Enzimatic Pre-înmuiere și agent de curățare 3 ml/litru
Spălare	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-concentrat Detergent neutru 0,7 ml/litru
Clătire	02:00	70	N/A
Uscare	15:00	Scăzut	N/A

Inspectați vizual fiecare instrument pentru a vedea dacă mai există murdărie și umiditate. Dacă există murdărie, repetați procesul de curățare. Dacă instrumentele sunt umede, folosiți aer comprimat filtrat sau o ștergere cu o cârpă fără scame pentru uscare.

Avertizare: Nu folosiți curățarea cu ultrasunete pentru dispozitivele de dimensionare, deoarece poate provoca zgârierea materialului polimer și a marcajelor.

Utilizatorul este responsabil pentru orice abatere de la metoda de curățare recomandată.

9.2 Instrucțiuni de sterilizare

Mânerele trebuie scoase din dispozitivul de dimensionare sau din sfera Gage înainte de curățare și de sterilizare.

Cele patru dispozitive de dimensionare, o sferă unică Gage și mânerele trebuie plasate în tava instrumentului pentru sterilizare cu abur. Se recomandă următorul ciclu de sterilizare:

Temperatura: 132°C (270°F)

Timpul de scufundare: 4 minute

Ciclu: Pre-vidare

Timp de uscare: Minimum 20 de minute

Utilizatorul este responsabil pentru orice abatere de la metoda de sterilizare recomandată.

Corcym confirmă că ciclul de sterilizare descris mai jos este utilizat în mod obișnuit de spitalele europene și a fost validat pentru multe sisteme similare de dispozitive de dimensionare și instrumente chirurgicale pentru valvă cardiacă.

Pre-vidare: Ciclu

Temperatura: 134°C (274°F)

Timpul de scufundare: 3 minute

Timp de uscare: 20 minute

Componentele setului de instrumente HAART 201 nu pun probleme semnificative la sterilizare atunci când se folosește acest proces validat pe scară largă. Materialele instrumentului pot rezista la temperaturi de până la 137°C.

9.3 Reutilizarea

Corcym a efectuat un minim de 50 de cicluri de sterilizare și utilizare pentru setul de instrumente HAART 201, fără a se remarca niciun semn de uzură.

Atenționare: dispozitivele de dimensionare, sfera Gage și mânerul sunt destinate utilizărilor multiple, cât timp acestea sunt inspectate înainte de fiecare utilizare, pentru a detecta eventuale semne de deteriorare. Înainte de fiecare utilizare, dispozitivele de dimensionare și sfera Gage și trebuie să fie inspectate vizual pentru a detecta mici fisuri în materialele din polimer, crăpături, semne de slăbiciune structurală sau marcaje ilizibile. Mânerul trebuie inspectat pentru a detecta fisuri vizibile sau semnele de slăbiciune structurală înainte de fiecare utilizare și după îndoire. Înlocuiți instrumentele care prezintă aceste defecte, deoarece este posibil ca acestea să nu funcționeze corect și să provoace leziuni pacientului.

Exonerarea de răspundere

Deși dispozitivul de anuloplastie aortică HAART 200 și setul de instrumente HAART 201, denumit în continuare „produs”, au fost fabricate în condiții atent controlate, Corcym nu are niciun control asupra condițiilor în care este utilizat acest produs. Corcym și afiliații săi (denumiți în mod colectiv „Corcym”), declină, prin urmare, toate garanțiile, atât exprese, cât și implicite, cu privire la produs, inclusiv, dar fără a se limita la, orice garanție

implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop. Corcym nu va fi răspunzător față de nicio persoană sau entitate, pentru nicio cheltuială medicală sau pentru orice daune directe, accidentale sau indirecte cauzate de orice utilizare, defect, defecțiune sau defecțiune a produsului, indiferent dacă o cerere pentru astfel de daune se bazează pe garanție, contract, delict sau pe un alt motiv. Nicio persoană nu are autoritatea de a obliga Corcym să ofere orice fel de reprezentare sau garanție cu privire la produs.

Excluderile și limitările menționate mai sus nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca contravenind dispozițiilor obligatorii ale legislației aplicabile. În cazul în care orice parte sau termen din această exonerare de răspundere și limitare a răspunderii este considerată de către orice instanță de jurisdicție competentă ca fiind ilegală, inaplicabilă sau în conflict cu legea aplicabilă, valabilitatea părții rămase din Exonerarea de răspundere și limitarea răspunderii nu va fi afectată, iar toate drepturile și obligațiile vor fi interpretate și puse în aplicare ca și cum această exonerare de răspundere și limitare a răspunderii nu ar conține partea sau termenul respectiv determinat ca fiind nevalid.

Brevete

Brevete: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Návod na použitie – Súprava nástrojov HAART 201

Sadržaj

1. Symboly označovania nástrojov	109
2. Indikácie	109
3. Opis	109
4. Upozornenia	111
5. Preventívne opatrenia	111
6. Spôsob dodania	111
7. Pokyny na použitie	112
8. Vyhlásenie o presnosti mierky a guľového kalibra ..	112
9. Čistenie a sterilizácia pred použitím	112
Obmedzenie záruky	114
Patenty	115
Obrázky	137

1. Symboly označovania nástrojov



Výrobca



Nesterilné



Kód šarže



Katalógové číslo



Spplnomocnený zástupca pre Európu



Výrobok spĺňa požiadavky smernice 93/42/EHS
pre zdravotnícke pomôcky



Pozrite návod na použitie

2. Indikácie

Súprava nástrojov HAART 201 je určená na použitie ako pomôcka pri implantácii pomôcky na aortálnu anuloplastiku HAART 200.

3. Opis

Súprava nástrojov HAART 201 obsahuje štyri mierky (4), jeden (1) guľový kaliber a dve (2) rukoväti, a dodáva sa v puzdre z nehrdzavejúcej ocele (obrázok 1 na strane 137). Súprava nástrojov slúži na výber vhodnej veľkosti pomôcky na aortálnu anuloplastiku HAART 200 pre daného pacienta a ako pomôcka pri vyhodnotení správnej

koaptácie cípu po dokončení celkovej rekonštrukcie aortálnej chlopne. Súprava nástrojov HAART 201 je určená na opakované použitie. Pred každým použitím sa však musí vyčistiť a vysterylizovať v autokláve (parou). Podrobné informácie o používaní a sterilizácii príslušenstva nájdete v nasledujúcich odsekoch.

3.1 Rukoväť

Rukoväť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele ASTM A276 a vyčistená a pasivovaná podľa špecifikácie normy ASTM F86. Rukoväť sa môže naskrutkovať na mierky, guľový kaliber a držiak, čo uľahčuje umiestňovanie počas procedúry (obrázok 2 na strane 137). Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele sa dá v zúženej časti ohnúť, aby sa mierky, guľový kaliber a pomôcka dali zaviesť do miesta operácie želaným spôsobom. Tvar a výroba rukováti je veľmi podobná rukovätiam dodávaným s náhradnými protézami srdcových chlopní a rukoväť je určená na podobné použitie.

3.2 Mierky

Mierky sú vyrobené z polyfenylsulfónu. Každou guľôčkou prechádza po jej osi otvor (obrázok 3 na strane 138). V hornej časti otvoru je závit, ktorý slúži na zaskrutkovanie rukováti.

Mierky majú po obvode na rovníku líniu laserových značiek, ktorá je rozdelená na 15° oblasti. Tieto oblasti, orientované oproti sebe v uhle 180°, sú striedavo bodkované, aby pomáhali vyhodnotiť dĺžku voľného okraja cípu. Veľkosť príslušnej pomôcky HAART 200 je dobre viditeľná na hornom povrchu každej mierky.

3.3 Guľový kaliber

Guľový kaliber je vyrobený z polyfenylsulfónu a po jeho osi prechádza otvor. V hornej časti otvoru je závit, ktorý slúži na zaskrutkovanie rukováti.

Po dokončení rekonštrukcie cípu možno efektívnu výšku a geometrickú výšku cípu vyhodnotiť použitím guľového kalibra, ktorý je súčasťou súpravy nástrojov HAART 201. Na guľovom kalibre sú na jeho povrchu vyznačené dve rôzne vertikálne stupnice (obrázok 4 na strane 139). Jedna stupnica začína na vrchole gule a je určená na odhad efektívnej výšky cípu chlopne. Pri úspešnej rekonštrukcii by mala byť efektívna výška cípu približne 8 až 10 mm. Druhá stupnica sa v prípade potreby môže použiť na vyhodnotenie geometrickej výšky cípu pri ďalšom vyhodnotení veľkosti cípu a symetrie po celkovej rekonštrukcii chlopne.

4. Upozornenia

- Nepoužívajte anuloplastické mierky od iných výrobcov. Iné anuloplastické mierky nemusia indikovať vhodnú veľkosť pomôcky na aortálnu anuloplastiku HAART 200.
- Určenie správnej veľkosti pomôcky na anuloplastiku je dôležitým prvkom pri úspešnej rekonštrukcii chlopne. Signifikantne menšia veľkosť môže spôsobiť stenózu chlopne alebo dehiscenciu prstenca. Nadmerná veľkosť môže spôsobiť regurgitáciu chlopne. Veľkosť pomôcky na aortálnu anuloplastiku HAART 200 sa určuje použitím mierok podľa účelu určenia pomôcky. Na výber správnej veľkosti pomôcky používajte výhradne mierky HAART zo súpravy nástrojov HAART 201.
- Na pripojenie držiaka pomôcky, mierok a guľového kalibra používajte výhradne rukoväť HAART.
- Mierky, guľový kaliber a rukoväť sa dodávajú NESTERILNÉ, preto sa pred každým použitím musia vyčistiť a vysterilizovať.
- Túto pomôcku smú používať iba chirurgovia, ktorí absolvovali vhodné školenie zamerané na implantáciu pomôcky HAART a techniky merania veľkosti.
- Súprava nástrojov HAART 201 nie je určená na použitie s inými pomôckami okrem pomôcky na aortálnu anuloplastiku HAART 200.
- Mierky ani guľový kaliber HAART 201 sa nesmú čistiť ultrazvukom, pretože polymérový materiál by mohol prasknúť a mohli by sa poškodiť označenia na pomôckach.

5. Preventívne opatrenia

Pred každým použitím treba mierky a guľový kaliber vizuálne skontrolovať, či na nich nie sú praskliny polymérových materiálov, nalomenia alebo znaky oslabenia štruktúry, prípadne, či ostali značky mierok a stupníc čitateľné.

Rukoväť treba pred každým použitím a po ohnutí vizuálne skontrolovať, či na nej nie sú praskliny alebo znaky oslabenia štruktúry. Nástroje, na ktorých by sa vyskytla niektorá z týchto porúch, ihneď vymeňte, pretože nemusia fungovať správne a mohli by spôsobiť poranenie pacienta.

6. Spôsob dodania

Súprava nástrojov HAART 201 sa dodáva NESTERILNÁ v puzdre z nehrdzavejúcej ocele. Nástroje sa dodávajú čisté, ale NESTERILNÉ.

Po doručení súpravy nástrojov odstráňte všetky obalové materiály a starostlivo skontrolujte všetky nástroje, či sa

pri preprave nepoškodili. Nástroje treba pred každým použitím vizuálne skontrolovať, vyčistiť a vysterilizovať.

Všetky nástroje, na ktorých sú znaky poškodenia alebo poškodené označenia, zlikvidujte.

Súpravu nástrojov skladujte v čistom prostredí.

7. Pokyny na použitie

Súprava nástrojov HAART 201 je určená na použitie ako pomôcka pri implantácii pomôcky na aortálnu anuloplastiku HAART 200. Pozrite si pokyny na použitie pre pomôcku na aortálnu anuloplastiku HAART 200.

8. Vyhlásenie o presnosti mierky a guľového kalibra

Mierky slúžia ako vizuálne meradlo pri výbere správnej veľkosti pomôcky na základe dĺžky voľného okraja aortálnej chlopne. Priemery majú presnosť $\pm 0,010$ palca (0,254 mm) špecifikovanej veľkosti.

Guľový kaliber je určený iba ako referenčná a vizuálna pomôcka na vyhodnotenie efektívnej výšky a geometrickej dĺžky cípu po jeho rekonštrukcii. Stupnice na guľovom kalibre majú presnosť $\pm 0,008$ palca (0,2 mm) medzi susednými značkami.

9. Čistenie a sterilizácia pred použitím

Upozornenie: Súprava nástrojov HAART 201 sa dodáva NESTERILNÁ, preto sa nástroje pred každým použitím musia dôkladne vyčistiť a vysterilizovať.

9.1 Pokyny na čistenie

Pred čistením musíte rukoväť odpojiť od mierky alebo guľového kalibra.

Poznámka: Pokiaľ sa predpokladá, že budú nástroje prenesené do miesta operácie s určitým časovým odstupom, vložte nástroje do zakrytej nádoby s vhodným čistiacim prípravkom (napr. Enzol Enzymatic Detergent alebo rovnocenný), aby sa oddialilo ich osušenie.

Maximálne do 2 hodín po použití odstráňte hrubé nečistoty opláchnutím studenou (25 °C až 30 °C) tečúcou vodou z vodovodného kohútika a nechajte ich namočené 1 minútu v enzymatickom čistiacom prípravku (napr. Enzol Enzymatic Detergent), ktorý ste pripravili zmiešaním 15 g na liter vody. Ponorte nástroje do nádoby s vhodným čistiacim prípravkom (napr. Enzol) pripraveným zmiešaním 15 gramov prípravku s 1 litrom vody z vodovodu (15 °C až 30 °C) na minimálne dve (2) minúty. Na čistenie závitov na mierkach a na guľovom kalibre použite kefku, čistite 15 až 20 sekúnd, aby ste odstránili všetky nečistoty.

Opláchnite tečúcou vodou z vodovodu (20 °C až 35 °C), kým sa neodstránia všetky viditeľné stopy čistiaceho roztoku. Vizuálne skontrolujte, či na nástrojoch neostali nečistoty, podľa potreby postup zopakujte. Osušte mäkkou utierkou a prejdite k ďalšiemu kroku čistenia.

Nástroje vyčistite v automatizovanej umývačke, použite nasledujúce parametre:

Parametre automatizovaného čistenia

Krok postupu	Čas (mm:ss)	Teplota (°C)	Čistiaci prostriedok
Enzymatické umývanie	04:00	Teplá voda z vodovodu	Steris Prolystica 2X koncentrát Enzymatické namočenie a čistiaci prostriedok 3 ml/liter
Umývanie	02:00	60	Steris Prolystica Ultrakonzentrát Neutrálny čistiaci prostriedok 0,7 ml/liter
Oplachovanie	02:00	70	Neudané
Sušenie	15:00	Nízka	Neudané

Vizuálne skontrolujte, či na nástrojoch neostali nečistoty a vlhkosť. Ak by na nástrojoch ostali nečistoty, postup čistenia zopakujte. Ak sú nástroje mokré, na osušenie použite filtrovaný stlačený vzduch alebo utierku, ktorá nezanecháva chlípky.

Upozornenie: Mierky sa nesmú čistiť ultrazvukom, pretože polymérový materiál by mohol prasknúť a mohli by sa poškodiť označenia na pomôckach.

Za kvalifikáciu akejkoľvek odchýlky od odporúčanej metódy čistenia zodpovedá používateľ.

9.2 Pokyny na sterilizáciu

Rukováti sa pred sterilizáciou musia odpojiť od mierky alebo guľového kalibra.

Štyri mierky, samostatný guľový kaliber a rukováti treba vložiť do zásobníka na sterilizáciu parou. Odporúča sa nasledujúci sterilizačný cyklus:

Teplota: 132 °C (270 °F)

Doba procesu: 4 minúty

Cyklus: Predvákuum

Doba sušenia: minimálne 20 minút

Za kvalifikáciu všetkých odchýlok od odporúčanej metódy sterilizácie zodpovedá používateľ.

Spoločnosť Corcym potvrdzuje, že nižšie opísaný sterilizačný cyklus sa bežne používa v európskych nemocniciach, a bol validovaný pre mnoho podobných systémov mierok srdcových chlopní a chirurgických nástrojov.

Predvákuum: cyklus

Teplota: 134 °C (274 °F)

Doba procesu: 3 minúty

Doba sušenia: 20 minúty

Sterilizácia komponentov súpravy nástrojov HAART 201 použitím široko používaného validovaného procesu nepredstavuje žiadny väčší problém. Materiály nástrojov vydrží teplotu až 137 °C.

9.3 Opakované použitie

Spoločnosť Corcym vykonala so súpravou nástrojov HAART 201 minimálne 50 cyklov sterilizácie a použitia bez toho, že by sa na nástrojoch zaznamenali nejaké znaky opotrebovania.

Pozor: Mierky, guľový kaliber a rukoväť sú určené na opakované použitie, pred každým použitím však treba skontrolovať, či na nich nie sú znaky poškodenia. Pred každým použitím treba mierky a guľový kaliber vizuálne skontrolovať, či na nich nie sú praskliny polymérových materiálov, nalomenia alebo znaky oslabenia štruktúry, prípadne, či ostali značky mierok a stupníc čitateľné. Rukoväť treba pred každým použitím a po ohnutí vizuálne skontrolovať, či na nej nie sú praskliny alebo znaky oslabenia štruktúry. Nástroj, na ktorom by sa vyskytla niektorá z týchto porúch, ihneď vymeňte, pretože nemusí fungovať správne a mohol by spôsobiť poranenie pacienta.

Obmedzenie záruky

Aj keď boli pomôcka na aortálnu anuloplastiku HAART 200 a súprava nástrojov HAART 201, v ďalšom texte uvádzané iba ako „výrobok“, vyrobené za starostlivo kontrolovaných podmienok, spoločnosť Corcym nemôže ovplyvniť podmienky, v ktorých bude výrobok použitý. Spoločnosť Corcym a jej dcérske spoločnosti (spoločne uvádzané ako „Corcym“) preto odmietajú akúkoľvek záruku, vyjadrenú aj implikovanú, týkajúcu sa výrobku, vrátane, mimo iného akejkoľvek implikovanej záruky predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť Corcym preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť voči každej osobe alebo subjektu za akékoľvek zdravotné náklady, priame, náhodné alebo následné škody,

spôsobené akýmkoľvek použitím, chabou, poruchou alebo nesprávnym fungovaním výrobku, bez ohľadu na to, či je reklamácia takýchto poškodení predložená na základe záruky, zmluvy, zodpovednosti alebo z inej príčiny. Žiadna osoba nemá oprávnenie zaviazať spoločnosť Corcym k žiadnym povinnostiam ani zárukám vzhľadom na výrobok.

Výnimky a obmedzenia z vyššie uvedených podmienok nie sú určené, a nesmú sa považovať za porušenie povinností vyplývajúcich z platných zákonov. Pokiaľ by bola niektorá časť alebo podmienky tohto odmietnutia záruky alebo obmedzenia zodpovednosti považovaná ktorýmkoľvek súdom v kompetentnej jurisdikcii za nezákonnú, nevynútitelnú alebo v rozpore s platnými zákonmi, platnosť zostávajúcej časti tohto odmietnutia záruk a obmedzenia zodpovednosti nebude narušená a všetky práva a povinnosti budú definované a vymáhané, ako keby odmietnutia záruky a obmedzenia zodpovednosti neobsahovali žiadnu časť alebo podmienku považovanú za neplatnú.

Patenty

Patenty: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Navodila za uporabo – komplet instrumentov HAART 201

Kazalo vsebine

1. Simboli za označevanje instrumentov	116
2. Indikacije	116
3. Opis	116
4. Opozorila	118
5. Previdnostni ukrepi	118
6. Kako je komplet dobavljen	118
7. Navodila za uporabo	119
8. Izjava o točnosti merilnika in merilne krogle	119
9. Čiščenje in sterilizacija pred uporabo	119
Izjava o jamstvu	121
Patenti	122
Slike	137

1. Simboli za označevanje instrumentov



Proizvajalec



Nesterilno



Koda serije



Kataloška številka



Pooblaščen evropski zastopnik



Izdelek je v skladu z zahtevami Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.



Preberite navodila za uporabo

2. Indikacije

Komplet instrumentov HAART 201 je namenjen kot pripomoček pri vsaditvi naprave za anuloplastiko aortne zaklopke HAART 200.

3. Opis

Komplet instrumentov HAART 201 je sestavljen iz štirih (4) merilnikov, ene (1) merilne krogle in dveh (2) ročajev, ki so zagotovljeni v pladnju iz nerjavnega jekla (slika 1 na strani 137). Komplet instrumentov se uporablja za izbiro ustrezne velikosti naprave za anuloplastiko aortne

zaklopke HAART 200 za določenega bolnika in za pomoč pri oceni koaptacije lističa po zaključku celotnega popravila aortne zaklopke. Komplet instrumentov HAART 201 je mogoče ponovno uporabiti, vendar ga je pred vsako uporabo treba očistiti in sterilizirati v avtoklavu (pari). Za podrobne informacije o uporabi in sterilizaciji dodatne opreme glejte spodnja poglavja.

3.1 Ročaj

Ročaj je izdelan iz nerjavnega jekla ASTM A276 ter očiščen in pasiviziran skladno s specifikacijo F86 standarda ASTM. Ročaj lahko vstavite v merilnike, merilno kroglo in držalo, da olajšate namestitev med postopkom (slika 2 na strani 137). Ročaj iz nerjavnega jekla se lahko v zoženem delu upogne, da merilnike, merilno kroglo in pripomoček na želeni način postavite na mesto kirurškega posega. Ročaj je po zasnovi in izdelavi zelo podoben ročajem, ki so dobavljeni z nadomestnimi protezami srčnih zaklopk, in je namenjen za uporabo na podoben način.

3.2 Merilniki

Merilniki so izdelani iz polifenilsulfona. Vsaka krogla ima vzdolž svoje osi skozi luknjo (slika 3 na strani 138). Vrh skozi luknje je narejen z navojem za sprejem ročaja za instrument.

Merilniki so lasersko označeni s črto na ravniku in s širokimi pikastimi območji pod 15° , usmerjenimi za 180° narazen, da uporabniku pomagajo pri oceni dolžine prostega roba lističa. Velikost ustrezne naprave HAART 200 je vidno označena na zgornji površini vsakega merilnika.

3.3 Merilna krogla

Merilna krogla je izdelana iz polifenilsulfona in ima skozi luknjo vzdolž svoje osi. Vrh skozi luknje je narejen z navojem za sprejem ročaja za instrument.

Po zaključku popravila lističev se lahko z uporabo merilne krogle, ki je na voljo v kompletu instrumentov HAART 201, oceni efektivna višina in geometrijska višina lističa. Merilna krogla ima na površini označeni dve različni navpični lestvici (slika 4 na strani 139). Ena lestvica se začne na vrhu krogle ter je namenjena oceni efektivne višine lističa zaklopke. Za uspešno popravilo mora efektivna višina lističa znašati približno od 8 do 10 mm. Druga lestvica se lahko po potrebi uporabi za oceno geometrijske višine lističa za nadaljnjo oceno velikosti in simetrije lističa po celotnem popravilu zaklopke.

4. Opozorila

- Ne uporabljajte merilnikov za anuloplastiko drugega proizvajalca. Na drugih merilnikih za anuloplastiko morda ne bo prikazana ustrezna velikost naprave za anuloplastiko HAART 200.
- Pravilna določitev velikosti naprave za anuloplastiko je pomemben sestavni del uspešnega popravila zaklopke. Občutno premajhna velikost lahko povzroči stenozo zaklopke ali dehiscenco obroča. Prevelika velikost lahko povzroči regurgitacijo zaklopke. Velikost naprave za anuloplastiko aortne zaklopke HAART 200 se izbere z uporabo merilnikov, ki ustrezajo namenu zasnove naprave. Za izbiro ustrezne velikosti naprave uporabljajte samo merilnike HAART, ki so vključeni v komplet instrumentov HAART 201.
- Za povezavo z držalom naprave, merilniki in merilno kroglo uporabljajte samo ročaj HAART.
- Merilniki, merilna krogla in ročaj so NESTERILNI in jih je treba pred vsako uporabo očistiti in sterilizirati.
- To napravo smejo uporabljati samo kirurgi, ki so se udeležili usposabljanja za tehnike vsaditve in določanja velikosti naprave HAART.
- Komplet instrumentov HAART 201 ni namenjen za uporabo z napravami, ki niso naprava za anuloplastiko aortne zaklopke HAART 200.
- Na merilnikih HAART 201 ali merilni krogli ne smete uporabljati ultrazvočnega čiščenja, saj lahko povzroči, da se polimerni materiali in oznake natrgajo.

5. Previdnostni ukrepi

Merilnike in merilno kroglo je pred vsako uporabo treba vizualno pregledati za natrgane polimerne materiale, razpoke, znake strukturnih pomanjkljivosti ali neberljive oznake.

Pred vsako uporabo in po upogibanju je ročaj treba pregledati za znake vidnih razpok ali strukturne pomanjkljivosti. Zamenjajte vsak instrument, ki kaže te napake, saj morda ne deluje pravilno in lahko povzroči poškodbe bolnika.

6. Kako je komplet dobavljen

Komplet instrumentov HAART 201 je zagotovljen NESTERILNO v pladnju iz nerjavnega jekla. Zagotovljeni instrumenti so čisti, toda NESTERILNI.

Po prvem prejemu kompleta instrumentov odstranite vse embalažne materiale in natančno preglejte vse instrumente za znake poškodb pri pošiljanju. Instrumente je treba pred vsako uporabo vizualno pregledati, očistiti in sterilizirati.

Zavržite vse instrumente, ki kažejo znake poškodb ali neberljive oznake.

Komplet instrumentov hranite v čistem okolju.

7. Navodila za uporabo

Komplet instrumentov HAART 201 je namenjen kot pripomoček pri vsaditvi naprave za anuloplastiko aortne zaklopke HAART 200. Glejte Navodila za uporabo naprave za anuloplastiko aortne zaklopke HAART 200.

8. Izjava o točnosti merilnika in merilne krogle

Merilniki služijo kot vizualni merilniki za izbiro ustrezne velikosti naprave na podlagi dolžine prostih robov lističev aortne zaklopke. Velikost premerov je točna do $\pm 0,010$ palcev (0,254 mm) določene velikosti.

Merilna krogla je namenjena le kot referenčni in vizualni pripomoček za oceno efektivne višine lističa in geometrijske dolžine lističa po njegovem popravilu. Lestvice na merilni krogli so točne do $\pm 0,008$ palcev (0,2 mm) med sosednjima oznakama.

9. Čiščenje in sterilizacija pred uporabo

Opozorilo: Komplet instrumentov HAART 201 je zagotovljen NESTERILNO in ga je treba pred uporabo temeljito očistiti in sterilizirati.

9.1 Navodila za čiščenje

Pred čiščenjem je treba ročaj odstraniti iz merilnika ali merilne krogle.

Opomba: Če obstaja verjetnost, da bo prišlo do zamude pri prevozu instrumentov na procesno območje, postavite instrumente v pokrito posodo z ustreznim detergentom (npr. encimskim detergentom Enzol ali enakovrednim sredstvom), da upočasnite sušenje.

V največ 2 urah po uporabi odstranite umazanijo s hladno (od 25 do 30 °C) vodo, sperite s tekočo vodo iz pipe in namočite za 1 minuto v encimskem detergentu (npr. encimskemu detergentu Enzol), pripravljenem z 2 unčama na galon vode. Instrumente potopite v posodo z ustreznim čistilom (npr. Enzol), pripravljenim z 2 unčama na 1 galon vode iz pipe (od 15 do 30 °C), za najmanj dve (2) minuti. S ščetko s ščetinami čistite navojno površino merilnikov in merilnih krogel za 15 do 20 sekund, da zagotovite odstranitev kakršne koli povzročene umazanije.

Splaknite s tekočo vodo iz pipe (od 20 do 35 °C), dokler vse sledi čistilne raztopine niso vidno odstranjene. Vizualno preglejte, ali je ostala kakršna koli umazanija, in po potrebi ponovite postopek. Posušite z mehko krpo in prenesite v fazo čiščenja.

Instrument očistite v avtomatskem stroju za pranje z uporabo naslednjih parametrov:

Avtomatski parametri čiščenja

Korak postopka	Čas (mm:ss)	Temp (C)	Sredstvo za čiščenje
Encimsko pranje	04:00	Vroča voda iz pipe	Steris Prolystica 2X encimski koncentrat Sredstvo za namakanje in čiščenje 3 ml/liter
Pranje	02:00	60	Steris Prolystica Ultrakoncentriran nevtralni detergent 0,7 ml/liter
Izpiranje	02:00	70	Ni relevantno
Sušenje	15:00	Nizke	Ni relevantno

Vizualno preglejte vsak instrument za ostanke umazanije in vlage. Če ostane kaj umazanije, ponovite postopek čiščenja. Če so instrumenti mokri, za sušenje uporabite filtriran stisnjen zrak ali krpice, ki ne puščajo vlaken.

Opozorilo: Na merilnikih ne smete uporabljati ultrazvočnega čiščenja, saj lahko povzroči, da se polimerni materiali in oznake natrgajo.

Uporabnik je odgovoren za kakršna koli odstopanja od priporočenega načina čiščenja.

9.2 Navodila za sterilizacijo

Pred čiščenjem in sterilizacijo je treba ročaje odstraniti iz merilnika oz. merilne krogle.

Štiri merilnike, eno merilno kroglo in ročaje je treba postaviti v pladenj za instrumente za sterilizacijo s paro. Priporočen je naslednji sterilizacijski cikel:

Temperatura: 132 °C (270 °F)

Čas mirovanja: 4 minute

Cikel: pred vakuumom

Čas sušenja: najmanj 20 minut

Uporabnik je odgovoren za kakršna koli odstopanja od priporočene metode sterilizacije.

Družba Corcym potrjuje, da v evropskih bolnišnicah rutinsko uporabljajo spodaj opisani sterilizacijski cikel, ki je bil potrjen za številne podobne sisteme merilnikov za srčne zaklopke in kirurške instrumente.

Pred vakuumom: cikel

Temperatura: 134 °C (274 °F)

Čas mirovanja: 3 minute

Čas sušenja: 20 minut

Sestavni deli kompleta instrumentov HAART 201 ne predstavljajo nobenega večjega izziva za sterilizacijo s tem splošno potrjenim postopkom. Materiali instrumentov prenesejo temperature do 137 °C.

9.3 Ponovna uporaba

V družbi Corcym so izvedli najmanj 50 ciklov sterilizacije in uporabe kompleta instrumentov HAART 201 brez kakršnih koli vidnih znakov obrabe.

Pozor: Merilniki, merilna krogla in ročaj so namenjeni za večkratno uporabo, če jih pred vsako uporabo pregledate za morebitne znake poškodb. Merilnike in merilno kroglo je pred vsako uporabo treba vizualno pregledati za natrgane polimerne materiale, razpoke, znake strukturnih pomanjkljivosti ali neberljive oznake. Pred vsako uporabo in po upogibanju je ročaj treba pregledati za znake vidnih razpok ali strukturne pomanjkljivosti. Zamenjajte vsak instrument, ki kaže te napake, saj morda ne deluje pravilno in lahko povzroči poškodbe bolnika.

Izjava o jamstvu

Čeprav sta naprava za anuloplastiko aortne zaklopke HAART 200 in komplet instrumentov HAART 201, v nadaljevanju »izdelek«, izdelana v skrbno nadzorovanih pogojih, družba Corcym nima nadzora nad pogoji, pod katerimi se ta izdelek uporablja. Družba Corcym in njene podružnice (skupaj navedene kot »Corcym«) zato zavračajo vsa izrecna in implicitna jamstva v zvezi z izdelkom, kar vključuje, vendar ni omejeno na kakršno koli implicitno jamstvo za tržljivost ali primernost za določen namen. Družba Corcym ni odgovorna nobeni fizični ali pravni osebi za kakršne koli zdravstvene stroške ali kakršno koli neposredno, naključno ali posledično škodo, povzročeno zaradi kakršne koli uporabe, napake, okvare ali nepravilnega delovanja izdelka, ne glede na to, ali zahtevke za takšno škodo temelji na garanciji, pogodbi, deliktu ali kašni drugi podlagi. Nobena oseba nima nobenega pooblastila, da bi družbo Corcym vezala na kakršno koli izjavo ali jamstvo v zvezi z izdelkom.

Zgoraj navedene izključitve in omejitve niso namenjene za in se ne smejo razlagati na način, ki je v nasprotju z obveznimi določbami veljavne zakonodaje. Če katero koli pristojno sodišče meni, da je kakršen koli del ali pogoj te izjave o jamstvu in omejitve odgovornosti nezakonit, neizvršljiv ali v nasprotju z veljavno zakonodajo, veljavnost preostalega dela izjave o jamstvu in omejitve odgovornosti ne bo prizadeta, vse pravice in obveznosti pa se bodo razlagale in uveljavljale, kot da ta izjava o jamstvu in omejitvi odgovornosti ne vsebuje določenega dela ali pogoja, ki se šteje za neveljavnega.

Patenti

Patenti: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Instrucciones de uso - Juego de instrumentos HAART 201

Índice

1. Símbolos de las etiquetas de los instrumentos.....	123
2. Indicaciones	123
3. Descripción	123
4. Advertencias	125
5. Precauciones	125
6. Condiciones de envío	126
7. Indicaciones de uso.....	126
8. Declaración de exactitud del dimensionador y de la esfera calibradora.....	126
9. Limpieza y esterilización antes del uso	126
Renuncia a garantías	129
Patentes	129
Figuras.....	137

1. Símbolos de las etiquetas de los instrumentos



Fabricante



No estéril



Código de lote



Número de catálogo



Representante autorizado en Europa



El producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE para dispositivos médicos



Consultar las Instrucciones de uso

2. Indicaciones

El juego de instrumentos HAART 201 está previsto para su uso como dispositivo de asistencia en la implantación del dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200.

3. Descripción

El juego de instrumentos HAART 201 incluye cuatro (4) dimensionadores, una (1) esfera calibradora y dos (2) asas proporcionados en una bandeja de acero inoxidable (Figura 1 en la página 137). El juego de

instrumentos se usa para seleccionar el tamaño correcto de dispositivo para anuloplastia aórtica HAART 200 para un paciente determinado y como ayuda en la evaluación de la coaptación de las valvas después de completar la reparación general de la válvula aórtica. El juego de instrumentos HAART 201 se puede volver a usar; no obstante, debe limpiarse y esterilizarse en autoclave (vapor) antes de cada uso. Consulte las secciones siguientes para obtener información detallada sobre el uso y la esterilización de los accesorios.

3.1 Asa

El asa está fabricada a partir de acero inoxidable ASTM A276, y se limpia y pasiva conforme a la especificación F86 de ASTM. El asa puede enroscarse en los dimensionadores, la esfera calibradora y el soporte para facilitar su posicionamiento durante el procedimiento (Figura 2 en la página 137). El asa de acero inoxidable puede doblarse en la sección estrecha para presentar los dimensionadores, la esfera calibradora y el dispositivo en el sitio de la cirugía de la manera deseada. El asa posee un diseño y fabricación muy similares a las asas proporcionadas con las prótesis para válvulas cardíacas de reemplazo y está destinada al uso de manera similar.

3.2 Dimensionadores

Los dimensionadores están fabricados a partir de polifenilsulfona. Cada esfera tiene un orificio de paso a lo largo de su eje (Figura 3 en la página 138). La parte superior del orificio de paso se enrosca para recibir el asa del instrumento.

Los dimensionadores están marcados con láser con una línea en el ecuador y a 15° de ancho en las regiones punteadas, orientados a 180° de distancia, para ayudar al usuario con la evaluación de la longitud sin borde de la valva. El tamaño del dispositivo HAART 200 correspondiente está marcado notablemente en la superficie superior de cada dimensionador.

3.3 Esfera calibradora

La esfera calibradora está fabricada a partir de polifenilsulfona y posee un orificio de paso a lo largo de su eje. La parte superior del orificio de paso se enrosca para recibir el asa del instrumento.

Después de completar la reparación de la valva, se pueden evaluar la altura efectiva y la altura geométrica de la valva usando la esfera calibradora incluida en el juego de instrumentos HAART 201. La esfera calibradora posee dos escalas verticales diferentes marcadas en la superficie (Figura 4 en la página 139). Una escala se

origina en el vértice de la esfera y su uso previsto es para estimar la altura efectiva de la valva de la válvula. Para lograr una correcta reparación, la altura efectiva de la valva debe ser aproximadamente de 8 a 10 mm. La segunda escala puede usarse para evaluar las alturas geométricas de la valva, si se desea, para una evaluación más detallada del tamaño y la simetría de la valva después de la reparación general de la válvula.

4. Advertencias

- No use dimensionadores de anuloplastia de otros fabricantes. Es posible que otros dimensionadores de anuloplastia no indiquen el tamaño adecuado de dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200.
- El dimensionamiento del dispositivo de anuloplastia correcto es un elemento importante para una correcta reparación de la válvula. Un tamaño significativamente inferior puede provocar estenosis en la válvula o dehiscencia del anillo. Un tamaño superior puede provocar regurgitación de la válvula. El tamaño del dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200 se selecciona usando dimensionadores coherentes con el objetivo de diseño del dispositivo. Use solamente los dimensionadores HAART incluidos en el juego de instrumentos HAART 201 para seleccionar el tamaño del dispositivo adecuado.
- Use solamente el asa HAART para crear una interfaz con el soporte del dispositivo, los dimensionadores y la esfera calibradora.
- Los dimensionadores, la esfera calibradora y el asa se proporcionan NO ESTERILIZADOS y deben limpiarse y esterilizarse antes de cada uso.
- Solo deben usar este dispositivo cirujanos formados en técnicas de implantación y dimensionamiento de dispositivos HAART.
- El juego de instrumentos HAART 201 no está destinado al uso con dispositivos diferentes al dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200.
- La limpieza ultrasónica no debe usarse en los dimensionadores o la esfera calibradora HAART 201 dado que puede provocar el cuarteado del material de polímero y las marcas.

5. Precauciones

Antes de cada uso, los dimensionadores y la esfera calibradora deben inspeccionarse visualmente en busca de cuarteados de los materiales de polímero, grietas y signos de debilidad estructural, o en relación con marcas ilegibles.

El asa debe inspeccionarse en busca de grietas o signos visibles de debilidad estructural antes de cada uso y

después del doblar. Sustituya cualquier instrumento que muestre estos fallos dado que quizás no funcione de manera adecuada y provoque lesiones en el paciente.

6. Condiciones de envío

El juego de instrumentos HAART 201 se proporciona NO ESTERILIZADO en una bandeja de acero inoxidable. Los instrumentos se proporcionan limpios, pero NO ESTERILIZADOS.

Tras la recepción inicial del juego de instrumentos, retire todos los materiales de embalaje y examine cuidadosamente todos los instrumentos en busca de indicios de daños ocasionados por el envío. Los instrumentos deben inspeccionarse visualmente, limpiarse y esterilizarse antes de cada uso.

Descarte los instrumentos que muestren signos de daños o marcas ilegibles.

Guarde el juego de instrumentos en un lugar limpio.

7. Indicaciones de uso

El juego de instrumentos HAART 201 está previsto para su uso como dispositivo de asistencia en la implantación del dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200. Consulte la sección Indicaciones de uso para el dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200.

8. Declaración de exactitud del dimensionador y de la esfera calibradora

Los dimensionadores sirven como un calibrador visual para elegir un tamaño de dispositivo adecuado en función de las longitudes sin borde de las valvas de la válvula aórtica. Los diámetros del tamaño son precisos a $\pm 0,254$ mm del tamaño especificado.

La esfera calibradora se usa solo como referencia y ayuda visual para evaluar la altura efectiva de la valva y su longitud geométrica después de la reparación de la valva. Las escalas en la esfera calibradora son precisas a $\pm 0,2$ mm entre las marcas adyacentes.

9. Limpieza y esterilización antes del uso

Advertencia: El juego de instrumentos HAART 201 se proporciona NO ESTERILIZADO y debe limpiarse y esterilizarse bien antes del uso.

9.1 Instrucciones de limpieza

El asa debe retirarse del dimensionador o la esfera calibradora antes de la limpieza.

Nota: Si hay posibilidad de retraso en el transporte de los instrumentos al área de procesamiento, colóquelos en un recipiente cubierto con un detergente adecuado (p. ej.

detergente enzimático Enzol o equivalente) para retrasar el secamiento.

En un lapso no mayor a 2 horas después del uso, enjuague toda la suciedad visible con agua fría del grifo (de 25° a 30 °C) y deje los instrumentos en remojo durante un minuto en un detergente enzimático (p. ej. detergente Enzol) preparado con 15 g por cada litro de agua. Sumerja los instrumentos en un recipiente con un limpiador apropiado (p. ej. Enzol) preparado con 15 g por cada litro de agua del grifo (de 15° a 30 °C) durante al menos dos (2) minutos. Use un cepillo de cerdas para limpiar el área con rosca de los dimensionadores y las esperas calibradoras durante 15 o 20 segundos para retirar toda la suciedad impactada.

Enjuague con agua del grifo (de 20° a 35 °C) hasta que no queden rastros visibles de la solución limpiadora. Inspeccione visualmente para corroborar que no haya suciedad y repita el proceso de ser necesario. Seque con un paño suave y transporte a la sección de limpieza.

Limpie el instrumento en una lavadora automatizada de acuerdo con los siguientes parámetros:

Parámetros de limpieza automatizada

Paso del proceso	Tiempo (mm:ss)	Temp (C)	Limpiador
Lavado enzimático	04:00	Agua caliente del grifo	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/litro
Lavado	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0.7 mL/liter
Enjuague	02:00	70	N/A
Secado	15:00	Bajo	N/A

Inspeccione visualmente cada instrumento para detectar restos de suciedad y humedad. Si hay partes sucias, repita el proceso de limpieza. Si los instrumentos están húmedos, use aire comprimido filtrado o un paño sin pelusas para secarlos.

Advertencia: La limpieza ultrasónica no debe usarse en los dimensionadores dado que puede provocar cuarteados en el material de polímero y las marcas.

El usuario es responsable de la calificación de cualquier desviación del método de limpieza recomendado.

9.2 Instrucciones para la esterilización

Las asas deben retirarse del dimensionador o la esfera calibradora antes de la limpieza y esterilización.

Los cuatro dimensionadores, la esfera calibradora y las asas deben colocarse en la bandeja de instrumentos para la esterilización con vapor. Se recomienda el siguiente ciclo de esterilización:

Temperatura: 132 °C (270 °F)

Tiempo de permanencia: 4 minutos

Ciclo: Antes del vacío

Tiempo de secado: Mínimo de 20 minutos

El usuario es responsable de la calificación de cualquier desviación del método de esterilización recomendado.

Corcym reconoce que el ciclo de esterilización que se describe a continuación se utiliza habitualmente en los hospitales europeos y se ha validado para muchos sistemas de dimensionadores de válvulas cardíacas e instrumentos quirúrgicos similares.

Antes del vacío: ciclo

Temperatura: 134 °C (274 °F)

Tiempo de permanencia: 3 minutos

Tiempo de secado: 20 minutos

Los componentes del juego de instrumentos HAART 201 no plantean ningún problema importante para la esterilización empleando este proceso ampliamente validado. Los materiales del instrumento pueden soportar temperaturas de hasta 137 °C.

9.3 Reutilización

Corcym ha realizado un mínimo de 50 ciclos de esterilización y uso en el juego de instrumentos HAART 201 sin signos de desgaste.

Precaución: Los dimensionadores, la esfera calibradora y el asa pueden usarse varias veces siempre y cuando se inspeccionen antes de cada uso en busca de signos de daños. Los dimensionadores y la esfera calibradora deben inspeccionarse visualmente en busca de cuarteados de los materiales de polímero, grietas y signos de debilidad estructural o marcas ilegibles antes de cada uso. El asa debe inspeccionarse en busca de grietas o signos visibles de debilidad estructural antes de cada uso y después del doblado. Sustituya cualquier instrumento que muestre estos fallos dado que quizás no funcione de manera adecuada y provoque lesiones en el paciente.

Renuncia a garantías

Si bien el dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200 y el juego de instrumentos HAART 201, en adelante denominados «producto», se han fabricado bajo condiciones estrictamente controladas, Corcym no tiene control alguno sobre las condiciones en las que se usa. Corcym y sus filiales (en conjunto, «Corcym»), por lo tanto, renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con relación al producto, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin en particular. Corcym no será responsable ante ninguna persona o entidad por los gastos médicos o por cualquier daño directo, incidental o consecuente que surja a partir del uso, defecto, fallo o funcionamiento erróneo del producto, ya sea que se trate de una reclamación por daños de este tipo basada en garantía, contrato, agravio u otros. Ninguna persona tiene autoridad para vincular a Corcym a una representación o garantía con relación al producto.

Las exclusiones y limitaciones estipuladas anteriormente no tienen la intención, ni deben interpretarse, como opuestas a las disposiciones obligatorias de la ley aplicable. Si cualquier parte o término de esta renuncia a garantías y limitación de responsabilidad es considerada por un tribunal de jurisdicción competente como ilícita, no exigible o en conflicto con las leyes aplicables, la validez de la parte restante de la renuncia a garantías y limitación de responsabilidad no se verá afectada, y todos los derechos y obligaciones deberán interpretarse y exigirse como si esta renuncia a garantías y limitación de responsabilidad no incluyera la parte o el término concreto que se ha considerado no válido.

Patentes

Patentes: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.



Bruksanvisning - HAART 201 instrumentset

Innehåll

1. Symboler för instrumentmärkning.....	130
2. Indikationer	130
3. Beskrivning	130
4. Varningar	132
5. Försiktighetsåtgärder	132
6. Leveransform.....	132
7. Anvisningar för användning	133
8. Uttalande om noggrannhet för storleksmätare och mätkula	133
9. Rengöring och sterilisering före användning	133
Garantifriskrivning	135
Patent	136
Figurer	137

1. Symboler för instrumentmärkning



Tillverkare



Icke-steril



Satskod



Katalognummer



Auktoriserad representant i Europa



Produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG
för medicintekniska produkter



Se bruksanvisningen

2. Indikationer

HAART 201-instrumentsetet är avsett att användas som hjälpmedel vid implantationen av HAART 200-aortaannuloplastikenheten.

3. Beskrivning

HAART 201-instrumentsetet består av fyra (4) storleksmätare, en (1) mätkula och två (2) handtag som tillhandahålls i ett tråg av rostfritt stål (figur 1 på sidan 137). Instrumentsetet används för att välja rätt storlek av HAART 200-aortaannuloplastikenheten för en viss patient och

för att underlätta bedömningen av segelkoaptation efter slutförande av den totala reparationen av aortaklaffen. HAART 201-instrumentsetet kan återanvändas; men det måste rengöras och steriliseras i autoklav (ånga) före varje användning. Se avsnitten nedan för utförlig information om användning och sterilisering av tillbehör.

3.1 Handtag

Handtaget är tillverkat av ASTM A276 rostfritt stål, samt rengjort och passiverat enligt ASTM-specifikationen F86. Handtaget kan skruvas in i storleksmätarna, mätkulan och hållaren för att underlätta positionering under ingreppet (figur 2 på sidan 137). Handtaget av rostfritt stål kan böjas i den avsmalnande delen för att storleksmätarna, mätkulan och enheten ska kunna föras in till operationsstället på önskat sätt. När det gäller utformning och tillverkning är handtaget mycket likt de handtag som medföljer hjärtklaffsprotoser och är avsett att användas på likartat sätt.

3.2 Storleksmätare

Storleksmätarna är tillverkade av polyfenylsulfon. Varje sfär har ett genomgående hål längs sin axel (figur 3 på sidan 138). Den övre delen av det genomgående hålet är gängad för att instrumenthandtaget ska kunna skruvas fast.

Storleksmätarna är lasermarkerade med en linje vid ekvatorn och 15° breda prickade områden, på 180° avstånd från varandra, för att underlätta bedömningen av längden på seglets fria kant. Storleken på motsvarande HAART 200-enhet är framträdande markerad på varje storleksmätarens övre yta.

3.3 Mätkula

Mätkulan är tillverkad av polyfenylsulfon och har ett genomgående hål längs sin axel. Den övre delen av det genomgående hålet är gängad för att instrumenthandtaget ska kunna skruvas fast.

Efter slutförd segelreparation kan effektiv höjd och seglets geometriska höjd bedömas med mätkulan som medföljer HAART 201-instrumentsetet. Mätkulan har två olika vertikala skalor som är markerade på ytan (figur 4 på sidan 139). Den ena skalan börjar vid toppen på sfären och är avsedd för att beräkna den vertikala effektiva höjden på klaffseglet. För en framgångsrik reparation ska seglets effektiva höjd vara cirka 8 till 10 mm. Den andra skalan kan användas för att bedöma seglens geometriska höjder, när så önskas, för ytterligare utvärdering av seglens storlek och symmetri efter den

totala klaffreparationen.

4. Varningar

- Använd inte annuloplastikstorleksmätare från någon annan tillverkare. Andra annuloplastikstorleksmätare kanske inte anger lämplig storlek på HAART 200-aortaannuloplastikenheten.
- Korrekt storlek på annuloplastikenheten är en viktig del i en framgångsrik klaffreparation. En storlek som är signifikant för liten kan leda till klaffstenos eller att ringen lossnar. En storlek som är signifikant för stor kan leda till klaffregurgitation. Storleken på HAART 200-aortaannuloplastikenheten väljs med hjälp av storleksmätare som är förenliga med avsikten med enhetens utformning. Använd endast de HAART-storleksmätare som ingår i HAART 201-instrumentsetet för att välja rätt storlek på enheten.
- Använd endast HAART-handtaget för att ansluta till enhetens hållare, storleksmätare och mätkula.
- Storleksmätarna, mätkulan och handtaget levereras ICKE-STERILA och måste rengöras och steriliseras före varje användning.
- Denna enhet får bara användas av kirurger som har fått utbildning i implantation av HAART-enheter och metoder för storleksmätning.
- HAART 201-instrumentsetet är inte avsett för användning med andra enheter än HAART 200-aortaannuloplastikenheten.
- Ultraljudsrengöring ska inte användas på HAART 201-storleksmätarna eller -mätkulan eftersom det kan ge upphov till krackelering av polymermaterialet och markeringarna.

5. Försiktighetsåtgärder

Storleksmätarna och mätkulan ska besiktigas avseende krackelering av polymermaterial, sprickor, tecken på strukturell svaghet eller oläsliga markeringar före varje användning.

Handtaget ska inspekteras avseende synliga sprickor eller tecken på strukturell svaghet före varje användning och efter böjning. Byt ut instrument som uppvisar något av dessa fel eftersom de kanske inte fungerar normalt och kan orsaka patientskador.

6. Leveransform

HAART 201-instrumentsetet levereras ICKE-STERILT i ett tråg av rostfritt stål. Instrumenten levereras rena, men ICKE-STERILA.

När instrumentsetet har levererats ska du avlägsna allt

förpackningsmaterial och noga undersöka alla instrument avseende tecken på transportskador. Instrumenten måste besiktigas, rengöras och steriliseras före varje användning.

Kassera instrument som visar tecken på skador eller har oläsliga markeringar.

Förvara instrumentsetet i en ren miljö.

7. Anvisningar för användning

HAART 201-instrumentsetet är avsett att användas som hjälpmedel vid implantationen av HAART 200-aortaannuloplastikenheten. Se "Anvisningar för användning" för HAART 200-aortaannuloplastikenheten.

8. Uttalande om noggrannhet för storleksmätare och mätkula

Storleksmätare används som en visuell mätare för valet av en lämplig storlek på enheten baserat på längderna på seglens fria kant i aortaklaffen. Storleksdiameterarnas noggrannhet är $\pm 0,254$ mm av den specificerade storleken.

Mätkulan är endast avsedd som en referens och ett visuellt hjälpmedel för att bedöma seglets effektiva höjd och seglets geometriska längd efter segelreparation. Mätkulans skalor har en noggrannhet på $\pm 0,2$ mm mellan angränsande markeringar.

9. Rengöring och sterilisering före användning

Varning! HAART 201-instrumentsetet levereras ICKE-STERILT och måste rengöras noggrant och steriliseras före användning.

9.1 Rengöringsanvisningar

Handtaget ska tas bort från storleksmätaren eller mätkulan före rengöring.

Obs: Om det är sannolikt att transporten av instrumentet till bearbetningsområdet fördröjs, ska instrumentet placeras i en täckt behållare med lämpligt rengöringsmedel (t.ex. Enzol Enzymatic Detergent eller motsvarande) för att fördröja uttorkning.

Inom högst 2 timmar efter användning ska grov smuts tas bort med en kall (25 till 30 °C) vattensköljning med rinnande kranvatten och instrumentet blötläggas i 1 minut i ett enzymatiskt rengöringsmedel (t.ex. Enzol Enzymatic Detergent), blandat med 15 ml/liter vatten. Sänk ner instrumentet i en behållare med lämpligt rengöringsmedel (t.ex. Enzol), blandat med 15 ml/liter kranvatten (15 till 30 °C) i minst två (2) minuter. Använd en borste för att rengöra storleksmätarnas och mätkulornas gängade delar i 15 till

20 sekunder för att säkerställa att intryckt smuts tas bort.

Skölj under rinnande kranvatten (20 till 35 °C) tills det inte längre finns några synliga spår av rengöringslösningen. Kontrollera visuellt att ingen smuts finns kvar och upprepa processen vid behov. Torka med en mjuk trasa och transportera till rengöringssteget.

Rengör instrumentet i en automatisk diskmaskin och använd följande parametrar:

Parametrar för automatisk rengöring:

Processteg	Tid (mm:ss)	Temp (C)	Rengöringsmedel
Enzymatisk tvätt	04:00	Varmt kranvatten	Steris Prolystica 2X Concentrate Enzymatic Presoak and Cleaner 3 ml/liter
Tvätt	02:00	60	Steris Prolystica Ultra-Concentrate Neutral Detergent 0,7 ml/liter
Sköljning	02:00	70	-
Torkning	15:00	Låg	-

Kontrollera visuellt att inget instrument är smutsigt eller fuktigt. Upprepa rengöringsprocessen om smuts finns kvar. Om instrumentet är vått ska du torka med filtrerad tryckluft eller en luddfri trasa.

Varning! Ultraljudsrengöring ska inte användas på storleksmätarna eftersom det kan ge upphov till krackelering av polymermaterialet och markeringarna.

Användaren är ansvarig för att validera avvikelser från den rekommenderade rengöringsmetoden.

9.2 Steriliseringsanvisningar

Handtagen ska tas bort från storleksmätaren eller mätkulan före rengöring och sterilisering.

De fyra storleksmätarna, mätkulan och handtagen ska placeras i instrumentträget för ångsterilisering. Följande steriliseringscykel rekommenderas:

- Temperatur: 132 °C (270 °F)
- Kvarliggningstid: 4 minuter
- Cykel: Förvakuum
- Torktid: Minst 20 minuter

Användaren är ansvarig för att validera avvikelser från den rekommenderade steriliseringsmetoden.

Corcym tillstår att den steriliseringscykel som anges nedan används rutinmässigt på sjukhus i Europa och har validerats för många liknande system för storleksmätning av och kirurgiska instrument för hjärtklaffar.

Förvakuum: cykel

Temperatur: 134 °C (274 °F)

Kvarliggningstid: 3 minuter

Torktid: 20 minuter

Komponenterna i HAART 201-instrumentsetet är inte ovanligt svåra att sterilisera om denna allmänt vedertagna process används. Instrumentmaterialen tål temperaturer på upp till 137 °C.

9.3 Återanvändning

Corcym har utfört minst 50 steriliserings- och användningscykler på HAART 201-instrumentsetet utan att några tecken på slitage har noterats.

Försiktighet: Storleksmätarna, mätkulan och handtaget är avsedda att kunna användas flera gånger förutsatt att de undersöks före varje användning avseende tecken på skador. Storleksmätarna och mätkulan ska besiktigas avseende krackelering av polymermaterial, sprickor, tecken på strukturell svaghet eller oläsliga markeringar före varje användning. Handtaget ska inspekteras avseende synliga sprickor eller tecken på strukturell svaghet före varje användning och efter böjning. Byt ut ett instrument som uppvisar något av dessa fel eftersom det kanske inte fungerar normalt och kan orsaka patientskador.

Garantifriskrivning

Även om HAART 200-aortaannuloplastikenheten och HAART 201-instrumentsetet, härnäst benämnda "produkt," har tillverkats under noggrant kontrollerade förhållanden, så har Corcym ingen kontroll över de förhållanden där denna produkt används. Corcym och deras anknutna företag (kollektivt "Corcym"), fransäger sig därför alla garantier, både uttryckliga och underförstådda, när det gäller produkten, däribland alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Corcym ska inte vara skadeståndsskyldiga till någon person eller enhet för medicinska utgifter eller direkta, tillfälliga eller följdskadestånd som orsakats av någon användning, defekt, fel eller funktionsfel hos produkten, oavsett om ett krav på ett sådant skadestånd baseras på garanti, kontrakt, åtalbar handling, eller något annat. Ingen person har befogenhet att binda Corcym till någon utfästelse eller garanti när det gäller produkten.

De undantag och begränsningar som anges ovan är inte avsedda att, och ska inte uppfattas som om de vore avsedda att, strida mot obligatoriska föreskrifter i gällande lagstiftning. Om någon del eller något villkor i denna garantifriskrivning och ansvarsbegränsning av någon domstol i det behöriga rättsskipningsområdet bedöms som olaglig, omöjlig att genomdriva, eller oförenlig med gällande lag, ska giltigheten i den återstående delen av garantifriskrivningen och ansvarsbegränsningen inte påverkas, och alla rättigheter och skyldigheter ska betraktas och genomdrivas som om denna garantifriskrivning och ansvarsbegränsning inte innehöll just den del eller det villkor som betraktas som ogiltig(t).

Patent

Patent: US8,163,011; US8,425,594; US9,161,835; US9,814,574; US9,844,434; US10,130,462; US10,327,891; CA2,665,626; JP5881653; JP5877205; JP6006218; EP2621407; EP2621408; EP2073755.

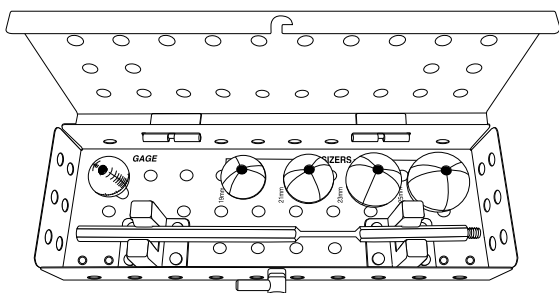


Figure 1 HAART 201 Instrument Set

Фигура 1 Комплект с инструменти HAART 201

Slika 1 Komplet instrumenata HAART 201

Obrázek 1 Souprava nástrojů HAART 201

Figur 1 HAART 201-instrumentsæt

Afbeelding 1 HAART 201-instrumentset

Kuva 1 HAART 201 -instrumenttisarja

Figure 1 Ensemble d'instruments HAART 201

Abbildung 1 – Instrumentensatz HAART 201

Εικόνα 1 Σετ οργάνων HAART 201

1. ábra HAART 201 műszerkészlet

Figura 1 Set di strumenti HAART 201

Figur 1 HAART 201-instrumentsett

Rycina 1 Zestaw instrumentów HAART 201

Figura 1 Setul de instrumente HAART 201

Obrázok 1 Súprava nástrojov HAART 201

Slika 1 Komplet instrumentov HAART 201

Figura 1 Juego de instrumentos HAART 201

Figur 1 HAART 201-instrumentset

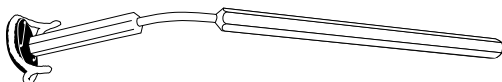


Figure 2 HAART 200 Aortic Annuloplasty Device and Holder Affixed to the Handle

Фигура 2 Изделие за аортна анулопластика HAART 200 и държач, фиксиран на дръжка

Slika 2 Proizvod HAART 200 za aortnu anuloplastiku i držač pričvršćeni na dršku

Obrázek 2 Zařízení k aortální anuloplastice HAART 200 a držák připojené k rukojeti

continued next page

Figure 2 HAART 200 Aortic Annuloplasty Device and Holder Affixed to the Handle (cont)

Figur 2 HAART 200 aortisk annuloplastikanordning og holder fastgjort på håndtaget

Afbeelding 2 HAART 200-aorta-annuloplastiekimplantaat en houder vastgemaakt op handgreep

Kuva 2 HAART 200 -aortta-annuloplastiarengas ja pidike kiinnitettyinä jatkovarteen

Figure 2 Dispositif d'annuloplastie aortique HAART 200 et support fixés à la poignée

Abbildung 2 – Aortenannuloplastie-Implantat HART 200 und am Griff angebrachte Haltevorrichtung

Εικόνα 2 Συσκευή αορτικής δακτυλιοπλαστικής HAART 200 και βάση στήριξης προσαρτημένα στη λαβή

2. ábra HAART 200 aortabillentyű anuloplasztikai eszköz és tartó a fogantyúhoz rögzítve

Figura 2 Dispositivo per anuloplastica aortica HAART 200 su supporto inserito nell'impugnatura

Figur 2 HAART 200 aortisk annuloplastikkenhet og holder festet til håndtaket

Rycina 2 Urządzenie do anuloplastyki aortalnej HAART 200 na uchwycie z przytwierdzoną rączką

Figura 2 Dispozitivul de anuloplastie aortică HAART 200 și suportul aplicate pe mâner

Obrázok 2 Pomôcka na aortálnu anuloplastiku HAART 200 a držiak pripevnený na rukoväť

Slika 2 Naprava za anuloplastiko aortne zaklopke HAART 200 in držalo, pritrjeno na ročaj

Figura 2 Dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 200 y soporte con el asa acoplada

Figur 2 HAART 200-aortaannuloplastikenhet och hållare fäst vid handtag

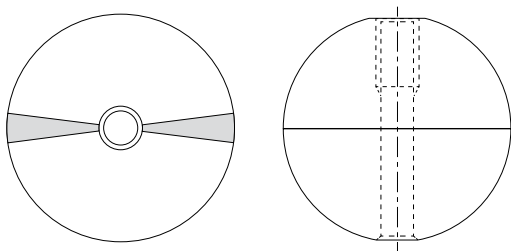


Figure 3 Illustration of Sizer

Фигура 3 Изображение на оразмерител

Slika 3 Prikaz komponente za određivanje veličine

Obrázek 3 Ilustrace měřicí pomůcky

Figur 3 Illustration af størrelsesmåler

Afbeelding 3 Illustratie van sjabloon

Kuva 3 Kaavakuva sovituspallosta

Figure 3 Illustration of Sizer (cont)

Figure 3 Illustration du calibreur

Abbildung 3 – Sizer

Εικόνα 3 Απεικόνιση οδηγού μεγέθους

3. ábra A méretező illusztrációja

Figura 3 Misuratore

Figur 3 Illustrasjon av måler

Rycina 3 Ilustracja z przymiarem

Figura 3 Ilustrație cu dispozitivul de dimensionare

Obrázok 3 Ilustrácia mierky

Slika 3 Prikaz merilnika

Figura 3 Ilustración del dimensionador

Figur 3 Bild på storleksmätare

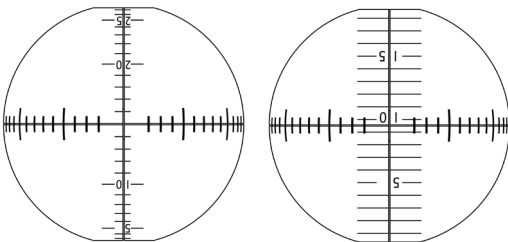


Figure 4 Geometric Height Scale (Left) and Effective Height Scale (Right)

Фигура 4 Скала за дължина (вляво) и скала за ефективна височина (вдясно) на платното

Slika 4 Skala za određivanje geometrijske visine (lijeva strana) i skala za određivanje efektivne visine (desna strana)

Obrázek 4 Škála k měření délky cípů (vlevo) a škála k měření efektivní výšky (vpravo)

Figur 4 Skala for fligs længde (venstre) og skala for effektiv højde (højde)

Afbeelding 4 Lengteschaal blad (links) en effectieve hoogte schaal (rechts)

Kuva 4 Purjeen pituuden asteikko (vasemmalla) ja tehollisen korkeuden asteikko (oikealla)

Figure 4 Échelle de longueur des feuillets (gauche) et échelle de hauteur effective (droite)

Abbildung 4 – Skalen für Taschenseitenlänge (links) und effektive Höhe (rechts)

Εικόνα 4 Κλίμακα μήκους γλωχίνας (αριστερά) και κλίμακα ωφέλιμου ύψους (δεξιά)

4. ábra Geometriai magasság skála (balra) és tényleges magasság skála (jobbra)

Figure 4 Geometric Height Scale (Left) and Effective Height Scale (Right) (cont)

Figura 4 Scala per la misurazione della lunghezza (sinistra) e dell'altezza utile del lembo (destra)

Figur 4 Seillengdeskala (venstre) og skala for effektiv høyde (høyre)

Rycina 4 Skala dla długości płatka (po lewej stronie) i skala dla wysokości efektywnej (po prawej stronie)

Figura 4 Scala pentru lungimea septului (stânga) și scala efectivă a înălțimii (dreapta)

Obrázok 4 Stupnica geometrickej výšky (Vľavo) a Stupnica efektívnej výšky (Vpravo)

Slika 4 Lestvica dolžine lističa (levo) in lestvica efektivne višine (desno)

Figura 4 Escala de longitud de la valva (izquierda) y escala de altura efectiva (derecha)

Figur 4 Skala för seglets längd (vänster) och effektiva höjd (höger)



Corcym Inc.

9800 Mount Pyramid Court
Suite 400
Englewood, CO 80112, USA



Corcym S.r.l.

Via Crescentino sn,
13040 Saluggia (VC)
Italy

